
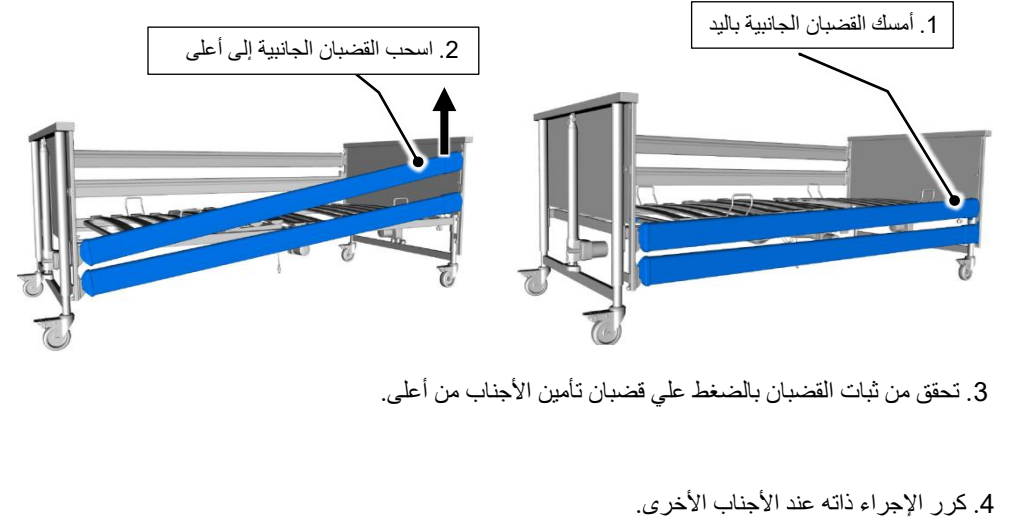


تأمين الأجناب


رفع القضبان الجانبية

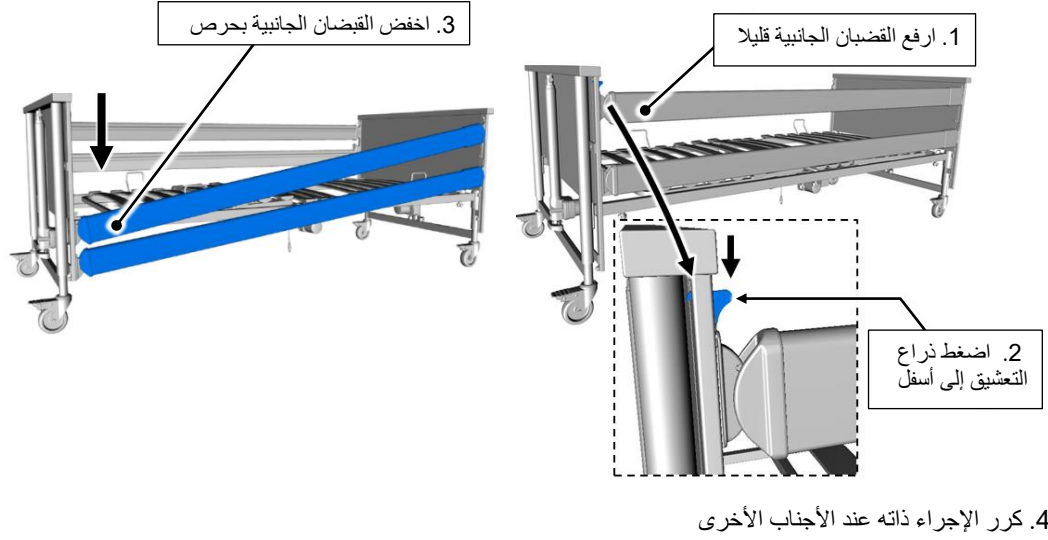

المقبض مثلثي الشكل

التحريك في الاتجاه الأفقي

التحريك في الاتجاه الرأسي


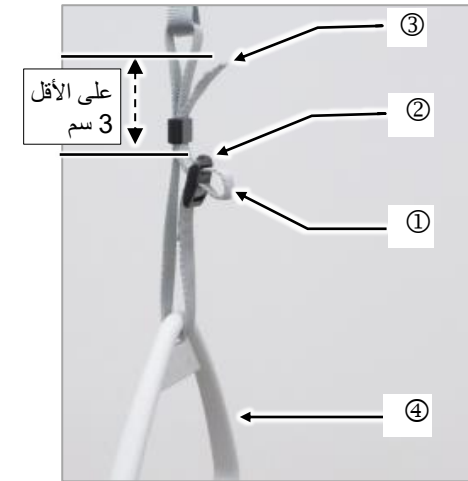


الاستخدام (التقصير/الإطالة)

اسحب حزام التثبيت ① من فتحة عروة التثبيت ②:  
التقصير: اسحب حزام التثبيت ③ من منتهاه إلى أعلى  
الإطالة: اسحب المقبض مثلثي الشكل ④ إلى أسفل

❗ قدرة التحميل القصوى تبلغ 75 كجم.

❗ انتبه عند القيام بالإطالة على أن يكون الفارق بين منتهى حزام التثبيت وفتحة عروة التثبيت 3 سم على الأقل.

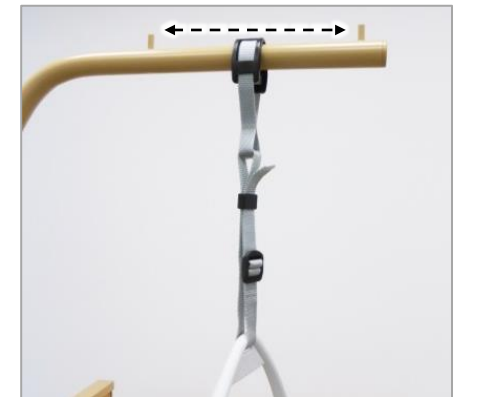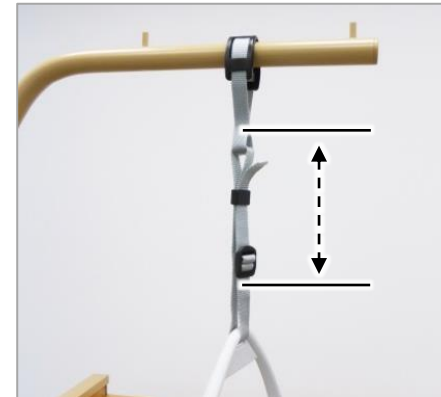

## ريموت التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث

(يأتي مع موديلات Dali Standard، و Dali low-entry، و Dali wash)

وظائف التحريك - جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث



انتباه:

يوجد مستشعر مغناطيس بنهاية جهاز التحكم.

من اللازم استخدام المغناطيس [a] غير الموصول (مرفق مع الجهاز) لتفعيل وظائف التحريك إلى أعلى وأسفل.


اتبع التعليمات التالية حتى تتمكن من تفعيل وظائف التحريك إلى أعلى وأسفل بسرير التمريض عن طريق جهاز التحكم:

1. ضع المغناطيس [a] المرفق فوق مستشعر المغناطيس المتواجد بجهاز التحكم
2. بعد ذلك قم بتفعيل وظيفة التحريك المرغوبة سواء إلى أعلى أو إلى أسفل.
- اضغط على الزر الأيمن بجهاز التحكم حتى يتم التحريك إلى أسفل. اضغط على الزر الأيسر حتى يتم التحريك إلى أعلى (انظر الجدول التالي).

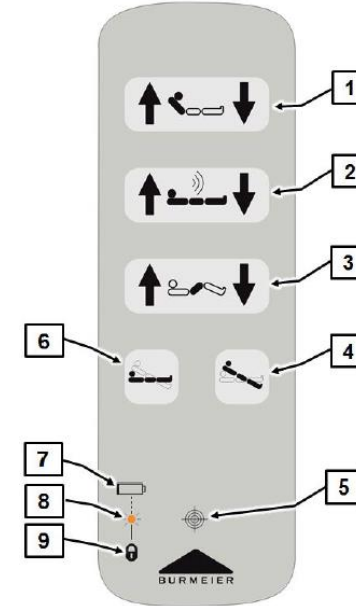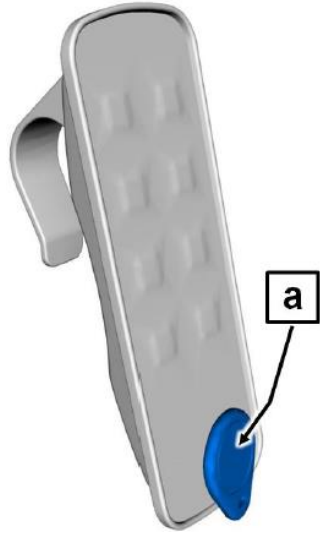


- 1 التحكم في مسند الظهر
- 2 التحكم في ارتفاع سرير التمريض
- 3 التحكم في ارتفاع مسند الفخذ
- 4 التحكم في مستوى ارتفاع القدم
- 5 مستشعر المغناطيس (مميز برمز شبكة التصويب)
- 6 وضعية الاستلقاء
- 7 مؤشر شحن البطارية
- 8 لمبة دايمود LED
- 9 مؤشر التشغيل

بالأساس تدل الأسهم على:

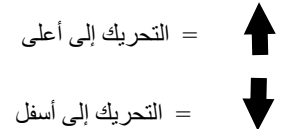

أخبر المريض بوظائف جهاز التحكم.

- ستظل محركات التشغيل تعمل ما دام زر تشغيل هذه المحركات مضغوطاً عليه.
- يمكن لجميع أجزاء السرير المذكورة أن تتحرك في كلا الاتجاهين باستثناء التحكم في مستوى ارتفاع القدم والتحكم في وضعية الاستلقاء.
- جهاز التحكم مانع لتسريب المياه وقابل للغسل.
- يمكن تعليق جهاز التحكم على الخطاف المطاطي المعد لذلك بسرير التمريض.

التحريك إلى أسفل	الوظيفة	التحريك إلى أعلى
	التحكم في مسند الظهر	
	التحكم في ارتفاع سرير التمريض	
	التحكم في ارتفاع مسند الفخذ	
	وضعية الاستلقاء / التحكم في مستوى ارتفاع القدم	

## الربط بين جهاز التحكم ونظام سرير التمريض يأتي مع موديلات (Dali Standard، wash، و low-entry)

انتباه: يجب الربط بين جهاز التحكم ونظام سرير التمريض قبل البدء في استخدام وظائف سرير التمريض.



يجب القيام بإجراء الربط فقط عند بدء تشغيل سرير التمريض أو عند استبدال جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث أو عند تغيير نظام سرير التمريض.

اتبع التعليمات الآتية:



أولاً قم بخلع المغناطيس من مفتاح التبديل اليدوي لتجنب حدوث أي عطل

1. ضع مزود الطاقة ذا منظم الجهد في المقبس.

• إذا كان مزود الطاقة ذو منظم الجهد موضوعاً بالفعل في المقبس، فقم بإخراجه والانتظار لمدة حوالي 10 ثواني ثم ضعه مرة أخرى.

2. يجب خلال 20 ثانية بعد وضع المزود في المقبس أن يتم الضغط على زرّي رفع وخفض التحكم في ارتفاع سرير التمريض في الوقت ذاته (الفارق الزمني بين الضغط على كل زر يجب أن يكون أقل من 5 أجزاء من الثانية) ولمدة لا تقل عن 5 ثواني.

• ستضيء لمبة الدايمود LED لمدة 4 ثواني بالضوء البرتقالي إذا تمت عملية الربط بنجاح.  
• ستومض لمبة الدايمود LED 4 مرات بالضوء البرتقالي إذا لم تنجح عملية الربط. عندئذ يجب تكرار الخطوات 1 و 2 مرة أخرى.

## البطارية - جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث

تزود بطارية ليثيوم طراز CR-2032 جهاز التحكم عن بعد بتقنية البلوتوث بالطاقة.



إذا انخفض شحن البطارية، فسيضيء مؤشر الدايمود LED بجهاز التحكم 4 مرات بالضوء الأصفر مع كل ضغط زر. عندئذ يجب استبدال البطارية خلال الأيام القليلة اللاحقة.

اتبع التعليمات الآتية:


1. قم بفتح غطاء مخدع البطارية **A** المتواجد بالناحية الخلفية من جهاز التحكم.

• لفتح الغطاء قم على سبيل المثال بوضع عملة معدنية في شق الغطاء ثم أدرها في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

2. استخراج البطارية القديمة.

3. ضع البطارية الجديدة (انتبه إلى الاتجاه الصحيح لأقطاب البطارية).

4. قم بغلق غطاء مخدع البطارية (أدر الغطاء في اتجاه دوران عقارب الساعة).

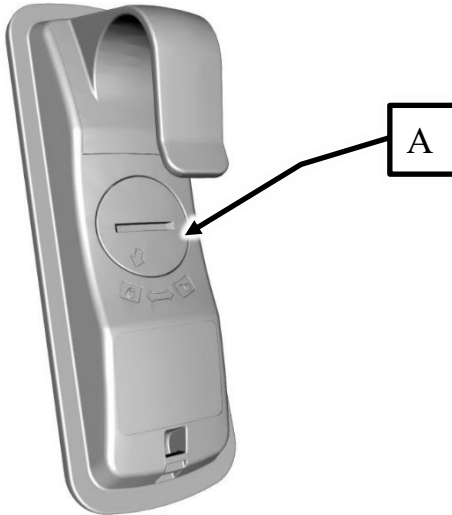

## جهاز التحكم السلكي


(يأتي مع موديلات

Dali Standard، و Dali low-entry، و Dali econ)

الاستخدام

بالأساس تدل الأسهم على:

التحريك إلى أعلى : ↑ التحريك إلى أسفل : ↓


تم إلحاق وظيفة حماية بجهاز التحكم السلكي  
مراعاة لاحتياطات السلامة. 

أدر قفل الحماية باستخدام مفتاح الحماية  
في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يصل إلى وضع التعشيق.  
لون المؤشر المعني يتغير من الأخضر إلى الأصفر.



مفتاح الحماية



لا تستخدم "الشدة" عند إدارة مفتاح الحماية. كلا من قفل الحماية وجهاز التحكم معرضان للضرر. 

بدء التشغيل:

قفل الحماية في وضع عمودي

لون المؤشر: أخضر

يمكن الآن الضغط على الأزرار (صوت الضغط على زر)



إيقاف التشغيل:

قفل الحماية مُدار في اتجاه حركة عقارب الساعة بحوالي 15 درجة

لون المؤشر: أصفر

تم غلق الأزرار




## استخدام عجلات السرير

تحذير! استخدم عجلات السرير فقط بواسطة القدم.  
ارتدي أحذية مغلقة عند استخدام السرير لتجنب حدوث إصابات بالأقدام.

التحريك: ارفع ذراع التحريك a بظهر مشط القدم.

تعشيق الحركة: اضغط ذراع التحريك a بالقدم إلى أسفل.

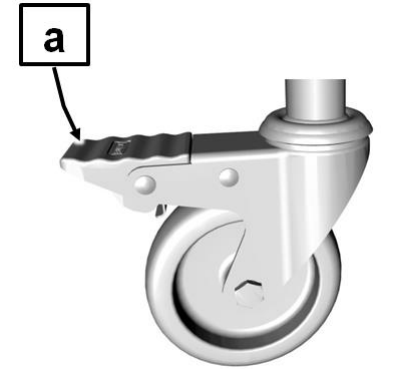

تحذير 

الدليل الموجز لا يحل محل دليل الاستخدام الأساسي لسرير التمريض Dali بأي حال من الأحوال.

احرص على قراءة دليل الاستخدام الأساسي بعناية وانتبه إلى تعليمات السلامة.