


## Sivulaita


### Kohottaminen

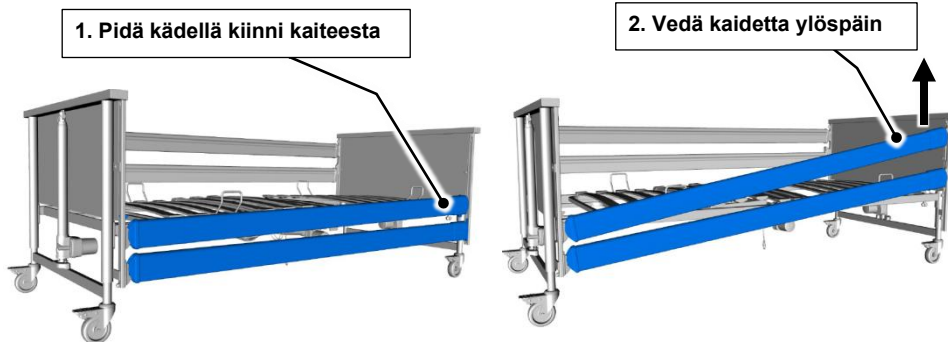

3. Tarkista lukittuminen painamalla sivulaitojen kaiteiden yläosaa.

4. Toista toimenpide toisella puolella.


### Laskeminen alas

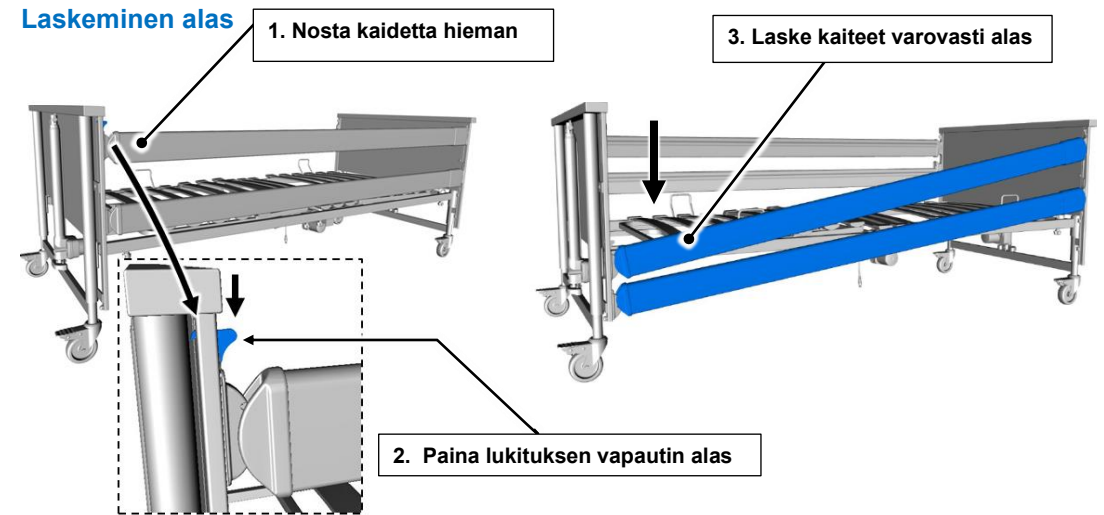


4. Toista toimenpide toisella puolella.

## Kolmiokahva

### Vaakasuuntainen säätö

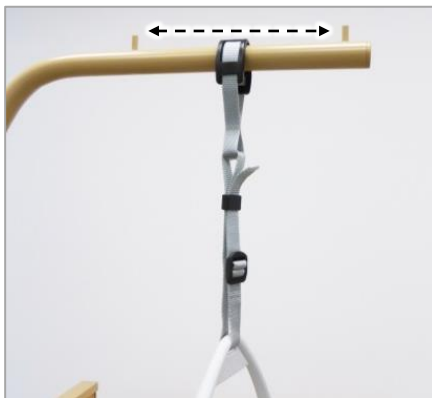

### Korkeuden säätö

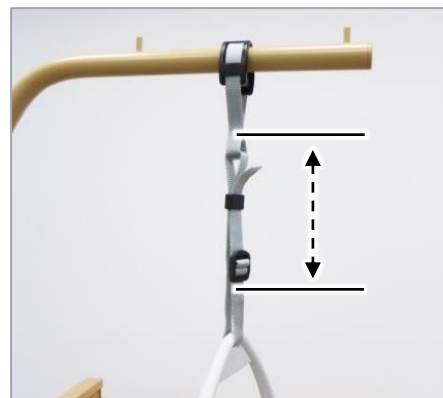

### Käyttö (lyhentäminen/pidentäminen)


Vedä hihna ① hihnalukon ② läpi:

**Lyhentäminen:** Vedä hihnanpäätä ③ ylöspäin

**Pidentäminen:** Vedä kolmiokahvaa ④ alaspäin

**i** Enimmäiskantavuus 75 kg.


**i** Varmista pidentämisessä, että hihnan pää on vähintään 3 cm hihnalukon yläpuolella.

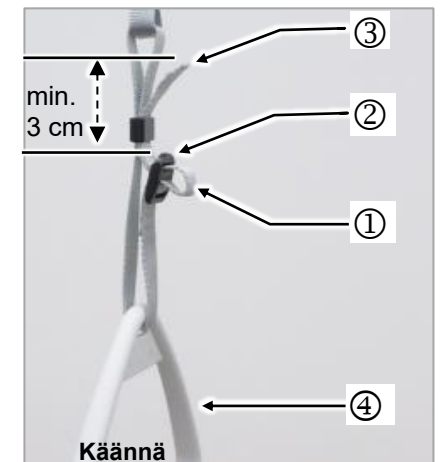


## Bluetooth-käsiohjain (johdoton)

(Dali Standard, Dali low-entry ja Dali wash)

- 1 Selkäosa
- 2 Makuutason korkeus
- 3 Reisituki
- 4 Anti-trendelenburgin asento
- 5 Magneettianturi (tunnistetaan ristisymbolista)
- 6 Nukkuma-asento
- 7 Paristosymboli
- 8 LED
- 9 Lukitussymboli

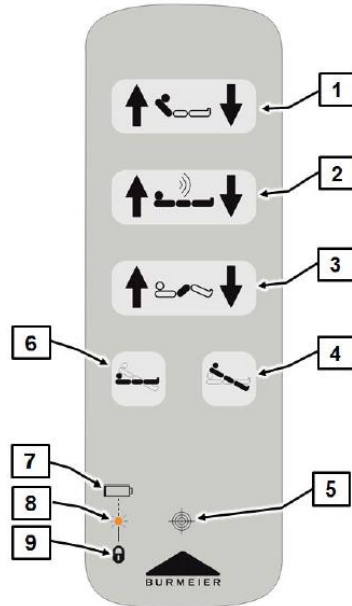

### Käyttösuunnat:

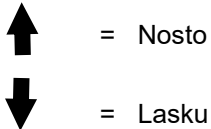

### Opeta asukasta käyttämään käsiohjaimen toimintoja.

- Moottorit käyvät niin kauan kuin vastaavaa painiketta painetaan.
- Anti-trendelenburgin asentoa ja nukkuma-asentoa lukuun ottamatta säätötoiminnot ovat mahdollisia kumpaankin suuntaan.
- Käsiohjain on vesitiivis, ja sen voi puhdistaa pyyhkimällä.
- Käsiohjaimen voi ripustaa joustavan koukun avulla vuoteeseen.

## Bluetooth-käsiohjaimen lukitustoiminnot


### Huomioi:

Käsiohjaimen alaosassa on magneettianturi.

Toimintojen lukitsemiseen ja vapauttamiseen tarvitaan erillinen magneetti **a** (sisältyy toimitukseen).

Käsiohjaimen asetuksia lukitaan ja vapautetaan seuraavalla tavalla:

1. Pidä mukana toimitettua magneettia **a** käsiohjaimen integroitua magneettianturia vasten.
2. Lukitse tai vapauta tarvitsemasi toiminnot sitten.
  - Lukitse toiminto painamalla käsiohjaimen oikeanpuoleista painiketta. Vapauta toiminto painamalla vasemmanpuoleista painiketta (katso seuraava taulukko).

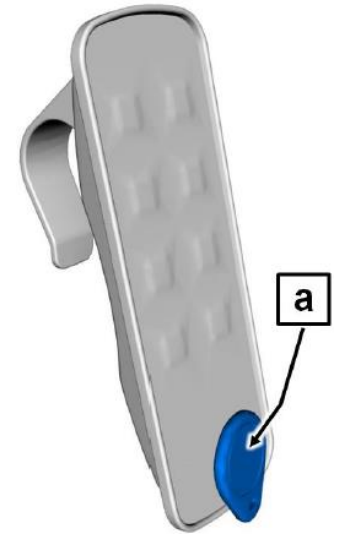

Vapautus	Toiminto	Lukitus
	Selkäosa	
	Makuutason korkeus	
	Reisituki	
	Nukkuma-asento / Anti-trendelenburgin asento	

## Käsiohjaimen yhdistäminen ohjauslaitteeseen (vain Dali standard, wash ja low-entry)

**i** Huomioi: Jotta vuoteen toimintoja voidaan säätää, on käsiohjain yhdistettävä (liitettävä) ensin ohjauslaitteen kanssa.

Yhdistäminen on tarpeen vain vuoteen käyttöönoton, Bluetooth-käsiohjaimen vaihdon ja ohjauslaitteen vaihdon yhteydessä.

Toimi seuraavasti:

**i** Irrota ensin magneetti käsiohjaimesta toimintahäiriöiden välttämiseksi.

1. Liitä verkkolaite pistorasiaan.
  - Jos verkkolaite on jo pistorasiassa, poista verkkolaite pistorasiasta, odota noin 10 sekuntia ja kytke se sitten takaisin pistorasiaan.
2. Paina 20 sekunnin kuluessa kumpaakin makuutason korkeudensäädön ylös-/alas-painiketta samanaikaisesti (0,5 s kuluessa) vähintään 5 sekuntia.
  - Jos yhdistäminen onnistui, ohjauslaitteen LEDissä palaa oranssi valo 4 sekuntia.
  - Jos yhdistäminen ei onnistunut, ohjauslaitteen LEDissä vilkkuu oranssi valo 4 kertaa. Toista silloin vaiheet 1 ja 2.


## Bluetooth-käsiohjaimen paristo

**i** Bluetooth-käsiohjainta käytetään CR 2032 -litiumparistolla.

Pariston virran vähentyessä käsiohjaimen LED-näytössä vilkkuu keltainen valo 4 kertaa jokaisen painikkeen painalluksen yhteydessä. Paristo on silloin vaihdettava muutaman päivän kuluessa.

Toimi seuraavasti:

1. Avaa käsiohjaimen takaosassa olevan paristolokeron **a** kansi.
  - Työnnä esimerkiksi kolikko kannen uraan ja käännä sitä vastapäivään.
2. Poista vanha paristo.
3. Aseta uusi paristo paikalleen (varmista, että navat ovat oikeinpäin).
4. Sulje paristolokeron kansi (kääntämällä myötäpäivään).

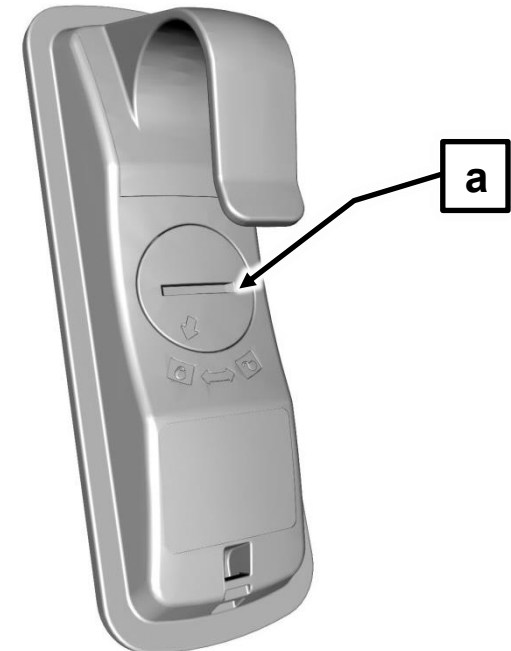


## Johdollinen käsiohjain


(Dali Standard, Dali low-entry ja Dali econ)


### Käyttö


Painikkeiden käyttösuunnat:


Nosto: ↑ Lasku: ↓

 Turvallisuuksyistä käsiohjaimeen on integroitu lukitustoiminto. Käännä lukitusliitäntä lukitusavaimella myötäpäivään lukittuun asentoon. Kyseisen näytön väri muuttuu vihreästä keltaiseksi.

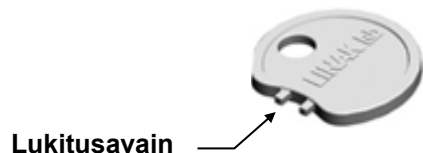

 Älä käännä lukitusavainta väkisin. Lukitusliitäntä tai käsiohjain voi vaurioitua.

 **Moottori vapautettu:**  
Lukitusliitäntä on pystysuorassa  
Näytön väri: vihreä  
Painikkeita voi painaa ("napsahdus")


 **Moottori lukittu:**  
Lukitusliitäntää on käännetty noin 15° myötäpäivään  
Näytön väri: keltainen  
Painikkeet ovat lukossa

## Pyörien käyttö

**Varo!** Käytä pyöriä vain jalalla. Käytä umpinaisia kenkiä työskennellessäsi vuoteen äärellä, jotta jaloille ei aiheudu vammoja.

**Siirtäminen:** Nosta jalkavipua  jalalla.

**Pyörien lukitseminen:** Paina jalkavipua  jalalla.

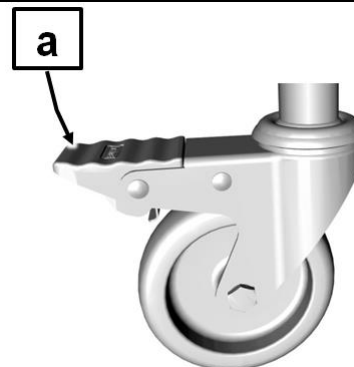

 **VARO**

Pikaohje ei korvaa Dali-hoitovuoteen pääkäyttöohjetta. Lue pääkäyttöohje huolellisesti ja noudata turvallisuusohjeita.