



מחיצה צדדית

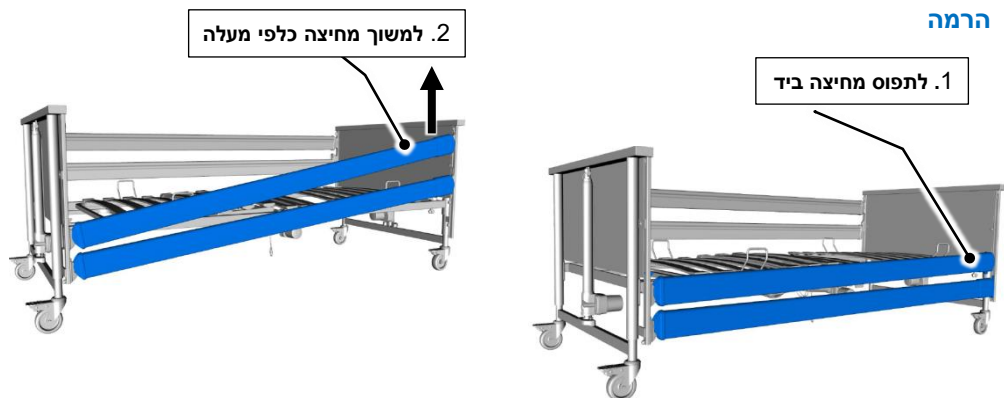


הרמה

3. לבדוק את הקיבוע על ידי לחיצה על המחיצה מלמעלה.
4. לחזור על המהלך בצדדים האחרים.

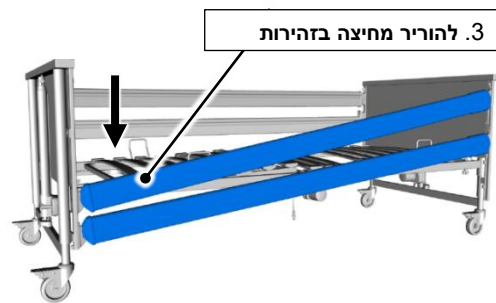

הורדה

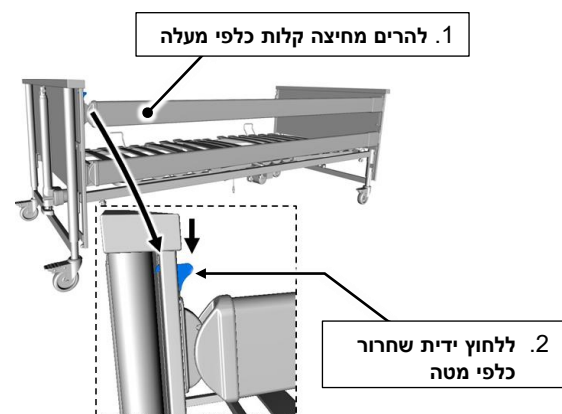

4. לחזור על המהלך בצדדים האחרים.


ידית המשולש

התאמה (קיצור/הארכה)

להוציא ① את הרצועה דרך ② מנעול הרצועה: קיצור: למשוך את קצה הרצועה ③ כלפי מעלה הארכה: למשוך את ④ ידית המשולש כלפי מטה


יכולת נשיאה מירבית 75 ק"ג.

בעת ההארכה יש להקפיד שקצה הרצועה יוצאת לפחות 3 ס"מ מעבר למנעול הרצועה.

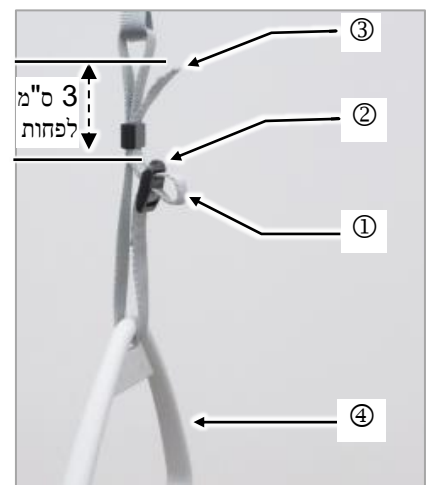


כונן אופקי

כונן אנכי

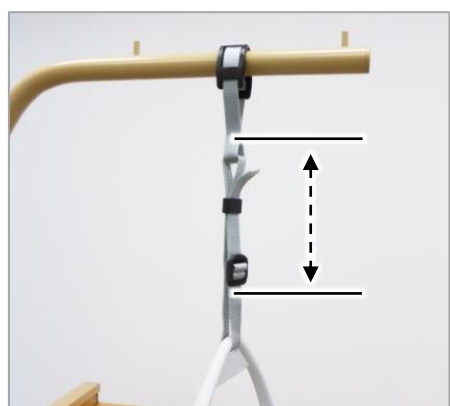

מתג ידני בלוטות-אלחוטי

(במיטות Dali Standard, Dali wash-ו, Dali low-entry)

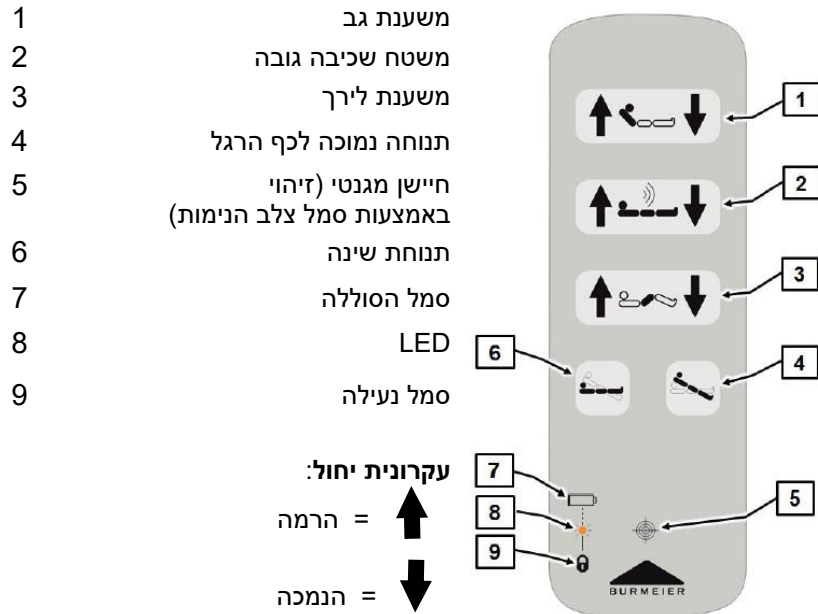

- יש להדריך את הדייר בתפקודי המתג הידני!
- מנועי ההפעלה פועלים כל עוד נלחץ המקש הרלוונטי.
 - להוציא התנוחה הנמוכה לכף הרגל ותנוחת שינה, ניתן לכוון לשני הכיוונים.
 - המתג הידני מוגן מפני מים וניתן לנגב אותו.
 - ניתן לתלות את המתג הידני על המיטה באמצעות וו גמיש.


פעולות נעילה - מתג ידני בלוטות

לתשומת לב:

בתחתית המתג הידני נמצא חיישן מגנטי.

לשם נעילה ו/או שחרור פעולות נדרש מגנט א' (מצורף במשלוח).

יש לפעול כדלקמן, כדי לנעול / לשחרר את כונון המתג הידני:

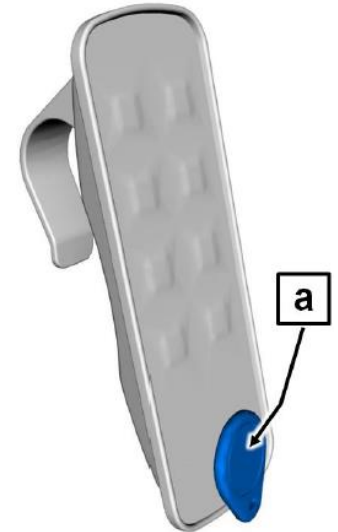

1. להצמיד את המגנט המסופק א' לחיישן המגנטי המובנה במתג הידני
2. בהמשך לנעול / לשחרר את הפעלה המבוקשת.
 - לנעילה יש ללחוץ על המקש הימני במתג בידני. לשחרור יש ללחוץ על המקש השמאלי (ראה טבלה להלן).

שחרור	פעולה	נעילה
	משענת גב	
	משטח שכיבה גובה	
	משענת לירך	
	תנוחת שינה / תנוחה נמוכה לכף הרגל	

לחבר את המתג הידני עם הבקרה (רק במיטות Dali wash, Dali standard, Dali low-entry-I)

לתשומת לב: לפני שניתן לכונן את פעולות המיטה, חובה לחבר את המתג הידני עם הבקרה. החיבור רלוונטי רק בעת ההפעלה הראשונית של המיטה, בעת והחלפת מתג הידני - בלוטות, והחלפת הבקרה. יש לפעול כדלקמן:

ראשית הסר את המגנט מהמתג הידני כדי למנוע תקלות.

1. לחבר את ספק הכוח לשקע חשמלי.

- אם ספק הכוח כבר מחובר לשקע חשמלי, יש לנתק את ספק הכוח מן השקע, להמתין כ-10 שניות, ולחזור ולחבר אותו.
- 2. תוך 20 שניות יש ללחוץ ביחד את שני המקשים גובה משטח השכיבה למעלה/למטה (תוך 0.5 שניות) למשך לפחות 5 שניות.
- אם החיבור היה מוצלח, תאיר נורת ה-LED בצבע כתום בבקרה למשך 4 שניות.
- אם החיבור לא הצליח, נורת ה-LED על הבקרה מהבהבת 4 פעמים בצבע כתום. במקרה זה יש לחזור על השלבים 1 ו-2.

סוללה - מתג ידני בלוטות

המתג הידני בלוטות מופעל באמצעות סוללת ליתיום CR-2032.

כאשר הסוללה נחלשת, יבהב סמל ה-LED במתג הידני בכל לחיצת מקש 4 פעמים בצבע צהוב. במקרה זה יש להחליף את הסוללה תוך מספר ימים.

יש לפעול כדלקמן:

1. לפתוח את כיסוי תא הסוללה 'a' בצד האחורי של המתג ידני.
 - ניתן להכניס במטבע בחריץ הכיסוי ולסובב אותו נגד כיוון השעון.
2. להוציא את הסוללה המשומשת.
3. להכניס סוללה חדשה (יש לשים לב לקטביות).
4. לסגור את תא הסוללה עם הכיסוי (לסובב בכיוון השעון).



מתג ידני עם כבל

(במיטות Dali Standard, Dali low-entry, ו-Dali econ)

אופן הפעלה

עקרונית יחול לגבי המקשים:

↑ הרמה: הנמכה: ↓

מסיבות של בטיחות מובנית פעולת נעילה במתג הידני. לשוב את מנעול הנעילה באמצעות מפתח הנעילה בכיוון השעון למצב נעילה. צבע הצג הרלוונטי עוב מצבע ירוק לצהוב.



מפתח נעילה



אין להפעיל כוח בסיבוב מפתח הנעילה! מפתח נעילה ו/או מתג ידני פגומים.

הנעה משוחררת:

מפתח הנעילה מוצב אנכית צבע הצג: ירוק ניתן להפעיל את המקשים (נשמע "קליק")

הנעה נעולה:


מפתח נעילה בכיוון השעון צבע הצג: צהוב המקשים נעולים

הפעלה על גלגלים

זהירות! להפעיל הגלגלים באמצעות כף הרגל בלבד. בעת ביצוע פעולות במיטה יש לנעול נעליים סגורות, כדי למנוע פציעות בכפות הגרליים.

הנעה: להרים את המנוף הרגלי **a** באמצעות גב כף הרגל בלבד.

בלימה: לדחוף את המנוף הרגלי **a** באמצעות כף הרגל כלפי מטה.

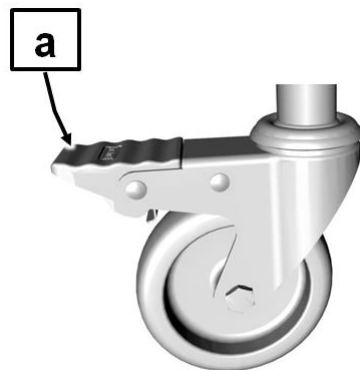

זהירות

קיצור הוראות שימוש זה אינו מהווה תחליף להוראות השימוש המלאים למיטה הטיפולית דאלי. יש לקרוא את הוראות השימוש בעיון ולפעול על פי הערות הבטיחות!