


Zijhek


Omhoog zetten

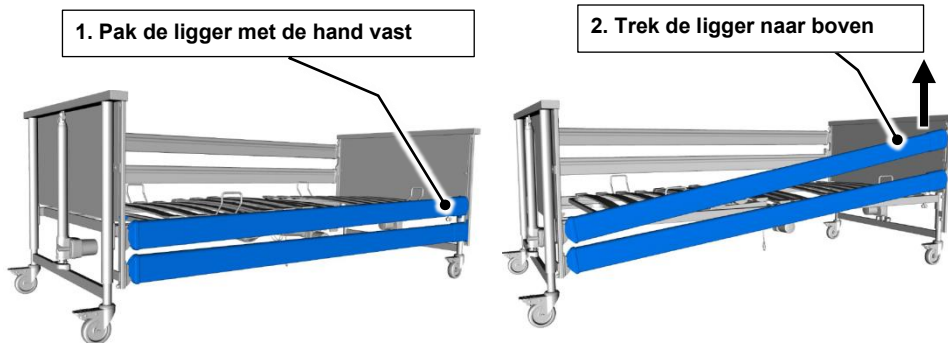

3. Controleer de blokkering door vanaf de bovenkant op de zijhekliggers te drukken.

4. Herhaal deze stappen aan de andere zijden.


Neerlaten

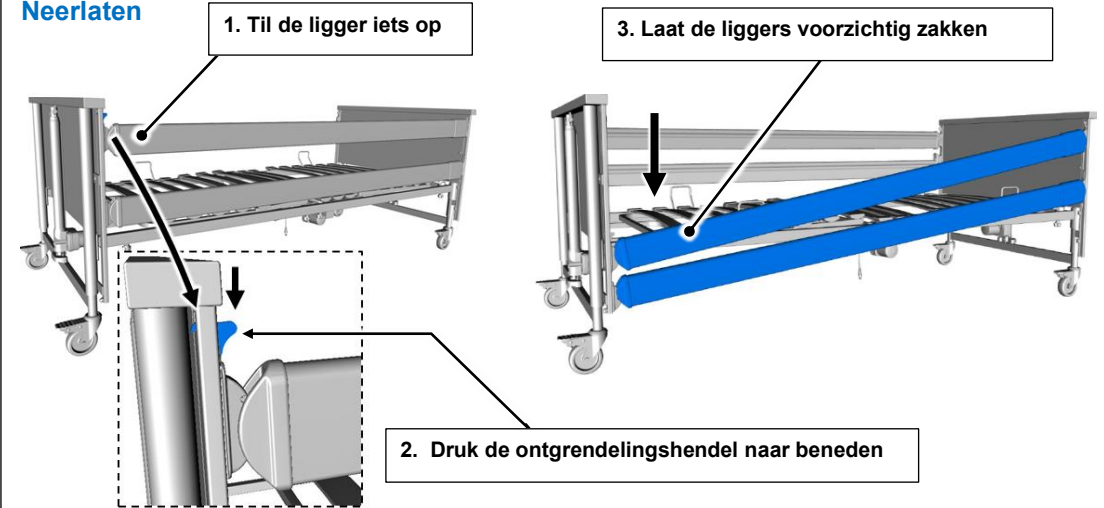


4. Herhaal deze stappen aan de andere zijden.

Papegaaigreep

Horizontale aanpassing

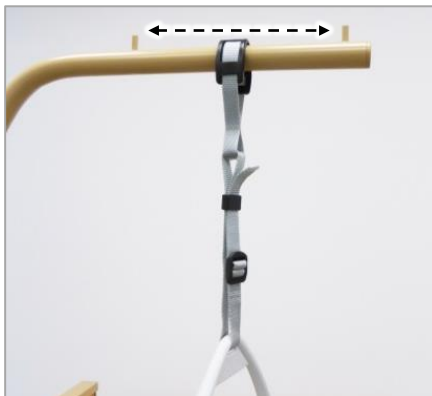

Verticale aanpassing

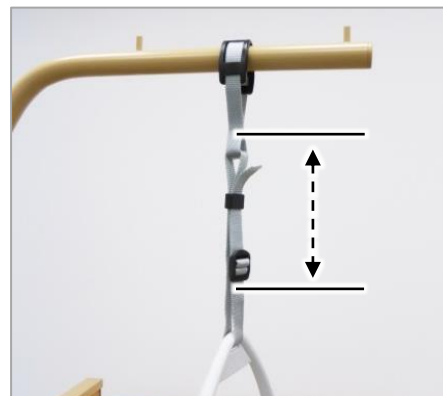

Bediening (verkorten/verlengen)


De riem ① door de gesp ② naar buiten trekken:

Verkorten: Riemuiteinde ③ naar boven trekken

Verlengen: De papegaaigreep ④ naar beneden trekken

i Maximaal draagvermogen 75 kg.


i Let er bij het verlengen op dat het uiteinde van de riem minstens 3 cm voorbij de gesp steekt.

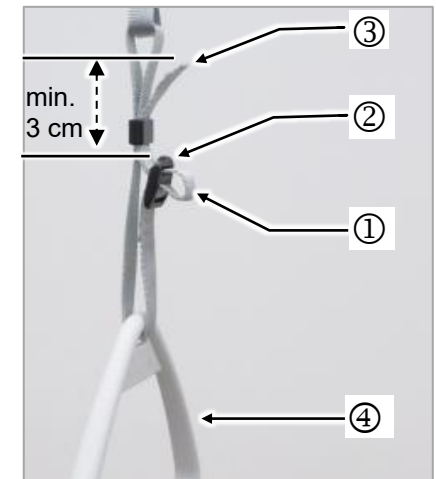

Bluetooth-handschakelaar (draadloos)

(Voor Dali Standard, Dali Low Entry en Dali Wash)

- 1 Rugsteun
- 2 Hoogte ligvlak
- 3 Bovenbeensteun
- 4 Anti-Trendelenburgstand
- 5 Magneetsensor (herkenbaar door het dradenkruissymbool)
- 6 Slaappositie
- 7 Batterijsymbool
- 8 Ledje
- 9 Blokkeersymbool

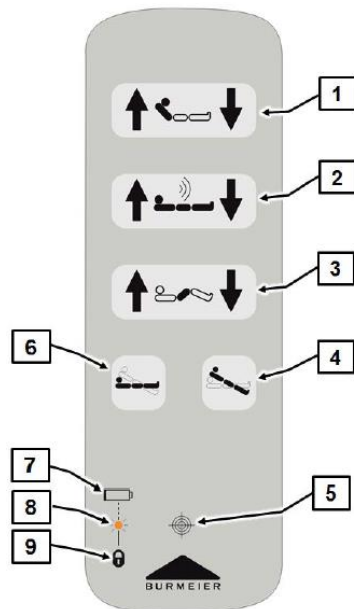

In principe geldt:

- = Omhoog
- = Omlaag

Instrueer de bewoner in de functies van de handschakelaar!

- De aandrijfmotoren draaien net zolang als de desbetreffende knop wordt ingedrukt.
- De verstelmogelijkheden zijn in beide richtingen mogelijk, behalve de anti-Trendelenburgstand en de slaappositie.
- De handschakelaar is waterdicht en afveegbaar.
- De handschakelaar kan met een elastische haak aan het bed worden opgehangen.

Blokkeerfuncties - Bluetooth-handschakelaar


Let op:

Aan de onderzijde van de handschakelaar bevindt zich een magneetsensor.

Voor de blokkering of deblokkering van functies is een losse magneet **[a]** vereist (onderdeel van de levering).

Ga als volgt te werk om de instelmogelijkheden op de handschakelaar te blokkeren/deblokkeren:

1. Houd de bijgeleverde magneet **[a]** op de magnetische sensor die in de handschakelaar is geïntegreerd
2. Blokkeer/deblokkeer vervolgens de gewenste functie.
 - Druk op de rechterknop van de handschakelaar om te blokkeren. Druk op de linkerknop om te deblokkeren (zie de volgende tabel).

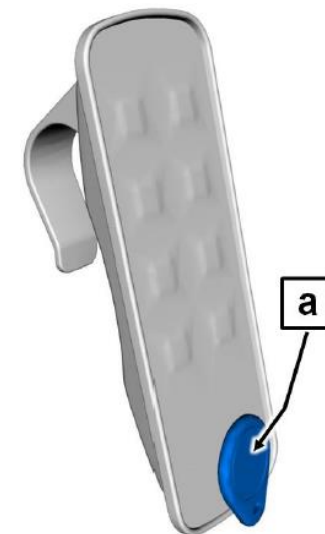

Deblokkeren	Functie	Blokkeren
	Rugsteun	
	Hoogte ligvlak	
	Bovenbeensteun	
	Slaappositie / anti-Trendelenburgstand	

De handschakelaar aan de besturing koppelen (alleen voor Dali standard, wash en low-entry)



Let op: Voordat de bedfuncties kunnen worden versteld, moet de handschakelaar zijn gekoppeld (verbonden) aan (met) de besturing.

Het koppelen is alleen relevant bij de inbedrijfstelling van het bed, het vervangen van de Bluetooth-handschakelaar en het vervangen van de besturing.

Ga als volgt te werk:



Verwijder eerst de magneet uit de handschakelaar om storingen te voorkomen.

1. Steek de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact.
 - Als de stekker al in het stopcontact zat, trek dan de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.
2. Druk binnen 20 sec. tegelijkertijd (binnen 0,5 s) gedurende minstens 5 sec. op de twee knoppen Hoogte ligvlak omhoog/omlaag.
 - Het ledje op de besturing brandt 4 seconden oranje op als het koppelen is gelukt.
 - Het ledje op de besturing knippert 4x oranje als het koppelen niet is gelukt. In dit geval de stappen 1 en 2 herhalen.

Batterij - Bluetooth-handschakelaar



De Bluetooth-handschakelaar wordt van stroom voorzien door een CR -2032 Lithium-batterij.

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het ledje op de handschakelaar 4x geel telkens wanneer op de knop wordt gedrukt. De batterij moet dan binnen enkele dagen worden

Ga als volgt te werk:

1. Open de afdekking van het batterijcompartiment **a** op de achterzijde van de handschakelaar.
 - Steek bijvoorbeeld een muntje in de gleuf van de afdekking en draai dan tegen de klok in.
2. Verwijder de oude batterij.
3. Plaats de nieuwe batterij (let op de polen).
4. Sluit het batterijcompartiment met de afdekking (met de klok meedraaien).





Handschakelaar met kabel

(Bij Dali Standard, Dali low-entry en Dali econ)


Bediening


Principieel geldt bij de knoppen:


Omhoog:  Omlaag: 

 Om veiligheidsredenen is in de handschakelaar een blokkeerfunctie ingebouwd.

Blokkeerslot met een blokkeersleutel met de klok mee in de geblokkeerde positie draaien. De kleur van de weergave verandert van groen in geel.

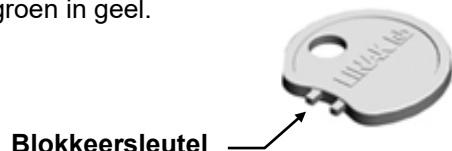


 Geen "geweld" gebruiken om de blokkeersleutel om te draaien! Het blokkeerslot en de handschakelaar kunnen beschadigd raken.


 **Aandrijving vrijgegeven:**
Blokkeerslot is verticaal
Kleur weergave: groen
Knoppen kunnen worden bediend („klik-geluid“)


 **Aandrijving geblokkeerd:**
Blokkeerslot wordt ongeveer 15° met de klok mee gedraaid
Kleur display: geel
Knoppen zijn geblokkeerd

Wielen- bediening

Voorzichtig! Wielen alleen met de voet bedienen. Draag gesloten schoenen bij het bedienen van het bed, om letsel aan de voeten te voorkomen.

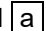Rijden: Til het pedaal  met de achterkant van uw voet omhoog.

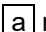Remmen: Duw het pedaal  met uw voet naar beneden.

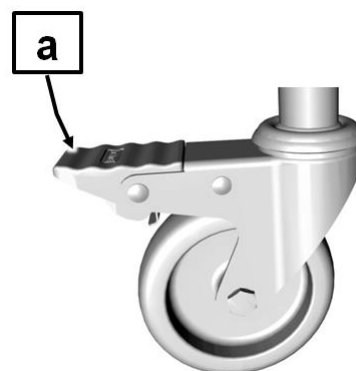

VOORZICHTIG

De beknopte handleiding is geen vervanging van de hoofdgebruikershandleiding van het Dali-verpleegbed. Lees de hoofdgebruikershandleiding zorgvuldig door en neem de veiligheidsinstructies in acht!