


Barierki boczne


Podnoszenie

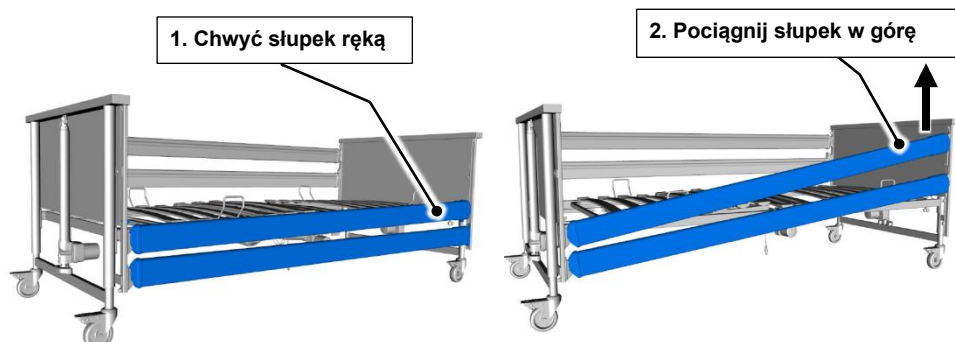

3. Sprawdź zatrzaśnięcie naciskając na słupki barierki bocznych od góry.

4. Powtórz czynność z drugiej strony łóżka.


Opuszczanie

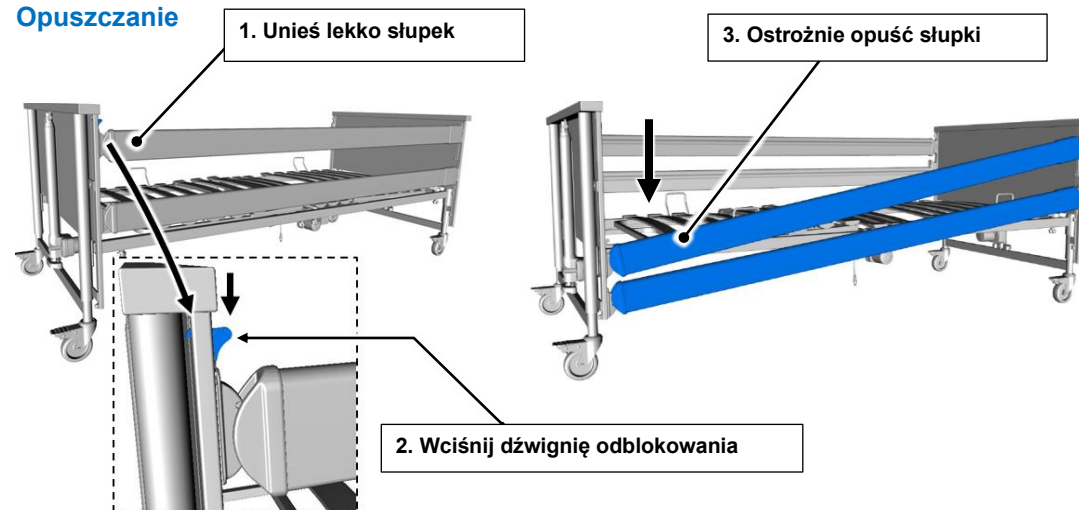


4. Powtórz czynność z drugiej strony łóżka.

Uchwyt trójkątny

Regulacja pozioma

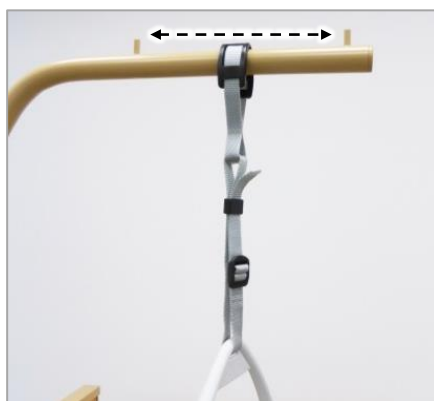

Regulacja pionowa

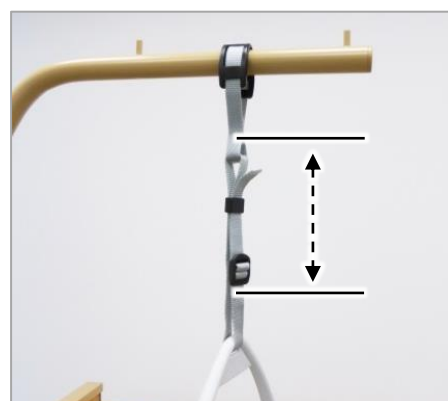

Obsługa (skrócenie / wydłużenie)


Wyciągnij pasek ① na spince ②:

Skracanie: Pociągnij koniec paska ③ do góry

Wydłużanie: Pociągnij uchwyt trójkątny ④ w dół

i Maksymalna nośność: 75 kg.


i Przy wydłużaniu zwróć uwagę na to, aby koniec paska wystawał co najmniej 3 cm ponad klamrę.

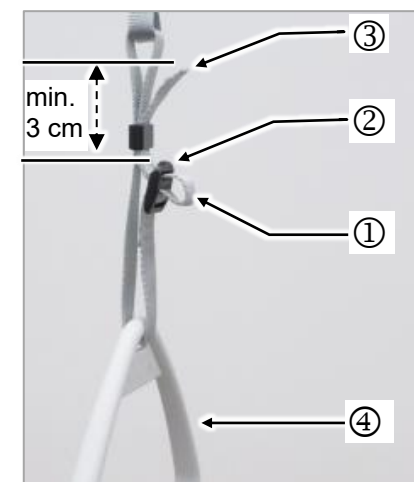


Pilot bluetooth (beprzewodowy)

(Do Dali standard, Dali low-entry i Dali wash)

- 1 Oparcie pleców
- 2 Wysokość leża
- 3 Podparcie ud
- 4 Pozycja z opuszczonymi stopami
- 5 Czujnik magnetyczny (oznaczony celownikiem)
- 6 Pozycja do spania
- 7 Symbol baterii
- 8 LED
- 9 Symbol blokady

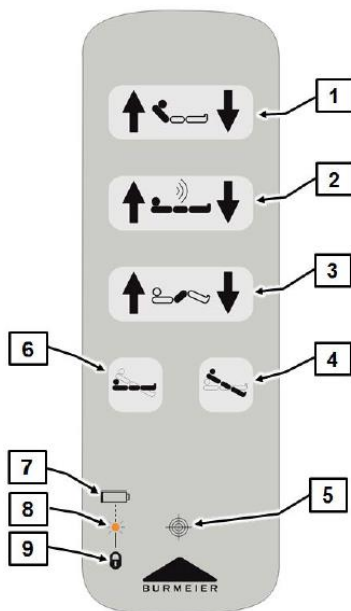

Ogólna zasada:

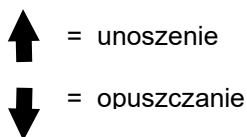

Zademonstruj pensjonariuszowi funkcje pilota!

- Silniki napędowe pracują tak długo, jak długo wciśnięty jest odpowiedni przycisk.
- Istnieje możliwość regulacji w obu kierunkach aż do położenia z opuszczonymi stopami i pozycji do spania.
- Pilot jest wodoodporny i można go myć.
- Panel można zawiesić na łóżku, na elastycznym haku.

Funkcje blokady – pilot bluetooth


Pamiętaj:

Pod pilotem podręcznym znajduje się czujnik magnetyczny.

Do blokowania bądź odblokowania funkcji potrzebny jest magnes **a** (objęty zakresem dostawy).

Aby zablokować / odblokować opcje regulacji pilota, postępuj w poniższy sposób:

1. Dostarczony magnes **a** przyłóż do czujnika magnetycznego w pilocie
2. Następnie zablokuj / odblokuj pożądane funkcje.
 - Aby zablokować, naciśnij prawy przycisk na pilocie. Aby odblokować, naciśnij lewy przycisk (patrz poniższa tabela).

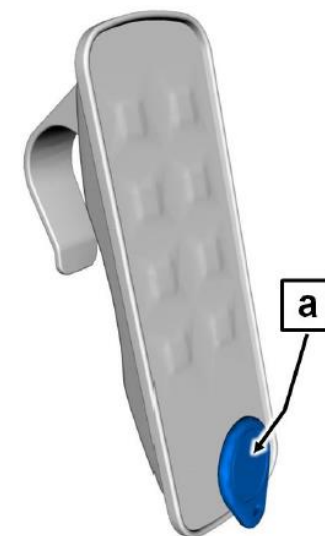

Odblokowanie	Funkcja	Blokowanie
	Oparcie pleców	
	Wysokość leża	
	Podparcie ud	
	Pozycja do spania / pozycja z opuszczonymi nogami	

Parowanie pilota ze sterownikiem (tylko Dali standard, wash i low-entry)

- i** Pamiętaj: Przed zmianą funkcji łóżka należy sparować (połączyć) pilot podręczny ze sterownikiem.
- Parowanie wykonuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu łóżka, wymianie pilota bluetooth i wymianie sterownika.

Postępuj następująco:

- i** Entfernen Sie zunächst den Magneten vom Handschalter, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
1. podłącz zasilacz do gniazdka.
 - Jeśli zasilacz był już podłączony do gniazdka, odłącz go, odczekaj ok. 10 sekund i podłącz ponownie.
 2. W ciągu 20 sekund wciśnij jednocześnie oba przyciski regulacji wysokości leża (góra / dół) i przytrzymaj co najmniej 5 sekundy.
 - Dioda LED sterownika zaświeci się przez 4 sekundy na pomarańczowo, jeżeli parowanie zakończyło się prawidłowo.
 - Dioda LED sterownika zamiga 4x na pomarańczowo, jeżeli parowanie nie powiodło się. W takim przypadku powtórz krok 1 i 2.

Bateria pilota bluetooth

- i** Pilot bluetooth jest zasilany baterią litową CR-2032.
- W razie rozładowania baterii dioda LED na pilocie podręcznym miga przy każdym wciśnięciu przycisku 4x na żółto. Baterię należy wymienić w ciągu kilku dni.

Postępuj następująco:

1. Otwórz klapkę komory na baterie **a** z tyłu pilota.
 - Włóż na przykład monetę w szczelinę pokrywki i przekręć ją w lewo.
2. Wyjmij zużytą baterię.
3. Włóż nową baterię (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość).
4. Zamknij pokrywkę komory na baterie (przekręć w prawo).






Pilot przewodowy

(do Dali standard, Dali low-entry i Dali econ)

Obsługa


Ogólne zasady dla przycisków:


Unoszenie:  Opuszczanie: 


 Ze względów bezpieczeństwa pilot wyposażono w funkcję blokady.


Przekręć klucz blokady w prawo do pozycji zablokowanej.

Kolor danego wskaźnika zmienia się z zielonego na żółty.

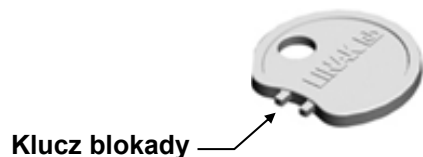

 Nie przekraczaj klucza „na siłę”! Może to uszkodzić zamek blokady lub pilot.


 **Zatwierdzenie napędu:**
Zamek blokady ustawiony pionowo
Kolor wskaźnika: zielony
Przyciski działają (słychać „kliknięcia”)


 **Napęd zablokowany:**
Zamek blokady przekręcony w prawo o ok. 15°
Kolor wskaźnika: żółty
Przyciski zablokowane


Koła jezdne, obsługa

Uwaga! Koła obsługiwać tylko stopą.

Podczas obsługi łóżka nosić pełne obuwie, aby uniknąć urazów stóp.

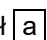Przejazd: Naciśnij pedał  wierzchem stopy w górę.

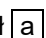Hamowanie: Naciśnij pedał  stopą w dół.

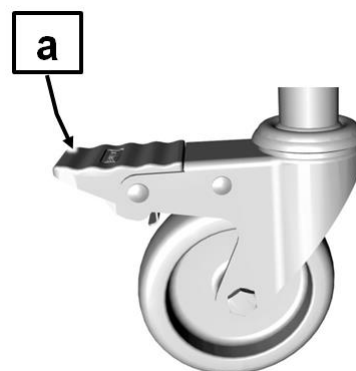

OSTROŻNIE

Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje głównej instrukcji użytkownika łóżka do opieki długoterminowej Dali.

Dokładnie zapoznaj się z główną instrukcją użytkownika i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!