


Bočná zábrana


Nastavovanie

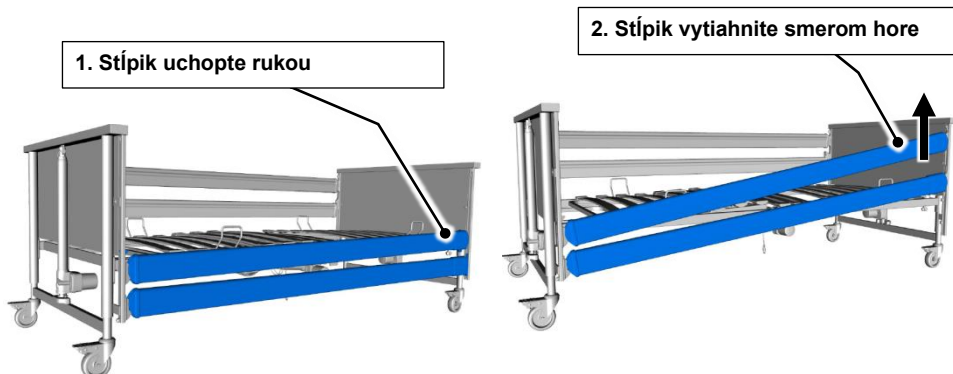

3. Prekontrolujte zaskočenie (v západke) tlakom na stípiaky bočných zábran zhora.

4. Zopakujte postup na druhej strane.


Spustenie

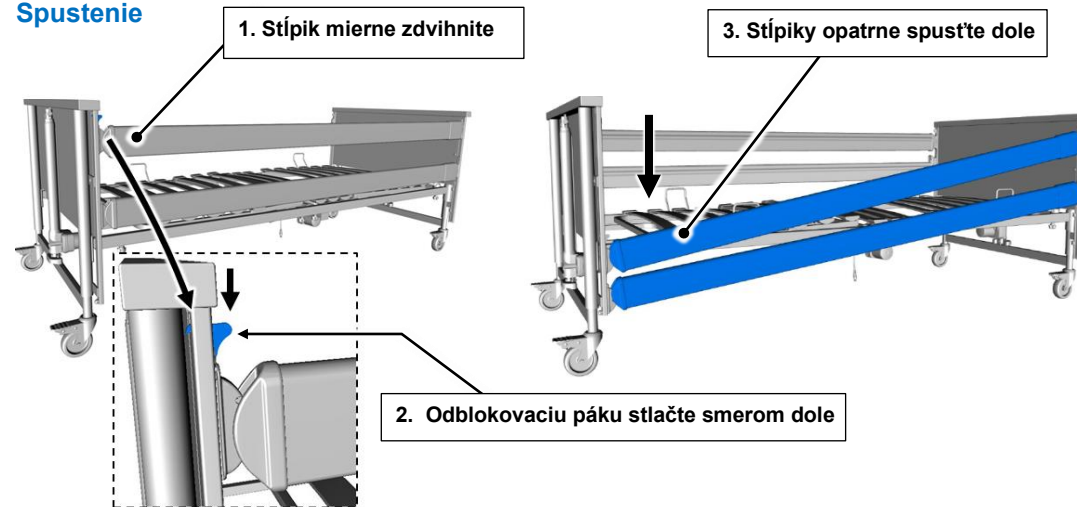


4. Zopakujte postup na druhej strane.

Trianglová rukoväť

Horizontálne nastavenie

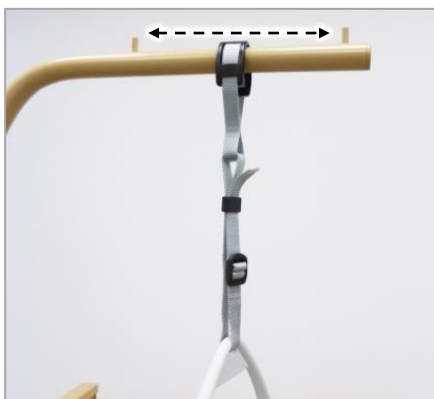

Vertikálne nastavenie

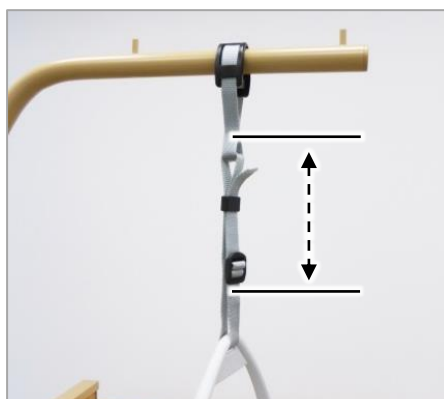

Ovládanie (skracovanie/predlžovanie)


Popruh ① vytiahnite cez zámok popruhu ② :

Skrátenie: Koniec popruhu ③ vytiahnite smerom hore

Predlženie: Trianglovú rukoväť ④ stiahnite smerom dole.

i Maximálna nosnosť je 75 kg.


i Pri predlžovaní dbajte na to, aby koniec pásu popruhu prečnieval minimálne 3 cm nad zámok popruhu.

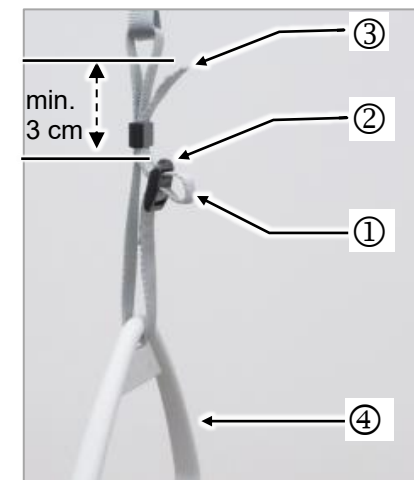


Ručný bluetooth (bezdrôtový) ovládač

(Pri posteliach Dali Standard, Dali low-entry a Dali wash)

- 1 Chrbtová opierka
- 2 Výška plochy ležadla
- 3 Opierka stehien
- 4 Spodná poloha nôh
- 5 Magnetický senzor (rozpoznateľný vďaka symbolu nitkového kríža)
- 6 Poloha na spanie
- 7 Symbol batérie
- 8 LED
- 9 Symbol blokovania

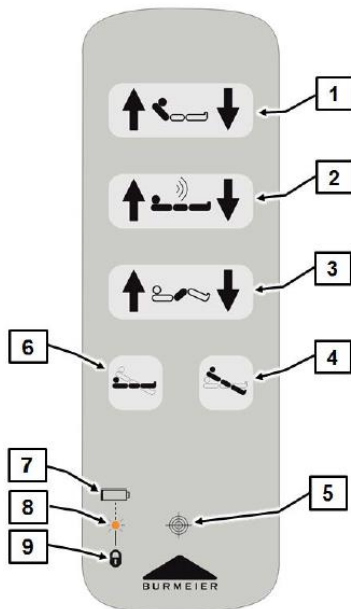

Vo všeobecnosti platí:

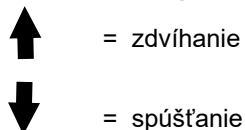

Oboznámte pacienta s funkciami ručného ovládania!

- Hnacie motory sú v prevádzke tak dlho, pokiaľ je stlačený príslušný kláves.
- Nastavenia môžete vykonávať až na spodnú polohu nôh a polohu na spanie v oboch smeroch.
- Ručný ovládač je chránený proti vode a môžete ho utierať.
- Ručný ovládač môžete elastickým hákom zavesiť na posteľ.

Funkcie blokovania - ručného bluetooth ovládača

Majte, prosím, na pamäti:


Dole v ovládači sa nachádza magnetický senzor.

Pre zablokovanie príp. odblokovanie funkcií je potrebný voľný magnet **a** (súčasť dodávky).

Pre zablokovanie/odblokovanie nastavení na ručnom ovládači

postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Dodaný magnet **a** podržte bezprostredne na magnetickom senzore, ktorý je integrovaný v ručnom ovládači
2. Následne zablokujte/odblokujte požadovanú funkciu.
 - Za účelom zablokovania stlačte pravý kláves na ručnom ovládači. Za účelom odblokovania stlačte ľavý kláves (pozri nasledujúcu tabuľku).

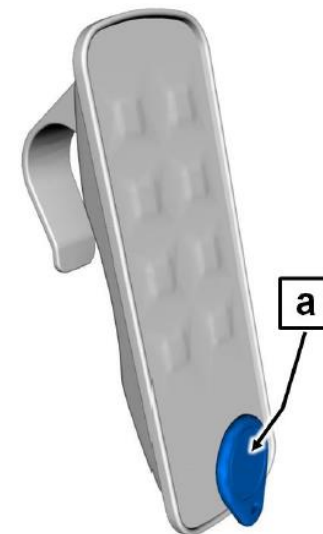

Odblokovanie	Funkcia	Blokovanie
	Chrbtová opierka	
	Výška plochy ležadla	
	Opierka stehien	
	Poloha na spanie / spodná poloha nôh	

Ručný ovládač spojte s riadením (len pri Dali Standard, wash a low-entry)

- i** Majte, prosím, na pamäti: Skôr než zmeníte funkcie postele, musíte ručný ovládač spojiť s riadením.
- Spojenie je relevantné pri uvedení postele do prevádzky, pri výmene bluetooth ovládača a výmene riadenia.

Postupujte nasledovne:

- i** Od ručného ovládača najprv odstráňte magnet, aby sa predišlo vzniku chybných funkcií.
- Spínaný napájací zdroj zasuňte do elektrickej zásuvky.
 - Ak sa spínaný napájací zdroj už nachádzal v elektrickej zásuvke, tak ho z elektrickej zásuvky vytiahnite, počkajte cca 10 sekúnd a opäť ho zasuňte.
 - V priebehu 20 sekúnd stlačte po dobu minimálne 5 sekúnd súčasne (v priebehu 0,5 s) obidve klávesy výšky plochy ležadla hore/dole.
 - Ak bolo spriahnutie úspešné LEDka na ovládaní sa rozsvieti počas 4 sekúnd oranžovo.
 - Ak spriahnutie nebolo úspešné LEDka na ovládaní bliká 4x oranžovo. V tomto prípade krok 1 a 2 zopakujte.

Batéria ručného bluetooth ovládača

- i** Ručný bluetooth ovládač je prevádzkovaný lítiovou batériou CR-2032.
- Pri poklese kapacity batérie bliká LEDková kontrolka pri každom stlačení klávesu na ručnom ovládači 4x žltá. Batériu potom musíte v priebehu niekoľkých dní vymeniť.

Postupujte nasledovne:

- Na zadnej strane ručného ovládača otvorte kryt priečinku pre batériu **a**.
 - Do drážky krytu zasuňte napr. mincu a otočte ho proti smeru otáčania hodinových ručičiek.
- Vyberte staré (vybité) batérie.
- Vložte nové batérie (rešpektujte pritom správnu polaritu).
- Priečinok pre batériu zatvorte krytom (otočte v smere otáčania hodinových ručičiek).



Ručný káblový ovládač

(Pri posteliach Dali Standard, Dali low-entry a Dali econ)

Obsluha


V zásade pri klávesoch platí:

zdvíhanie: ↑ spúšťanie: ↓

i Z bezpečnostných dôvodov je v ručnom ovládači zabudovaná funkcia blokovania.

Blokovací zámok otočte blokovacím kľúčom v smere otáčania hodinových ručičiek.

Farba príslušnej indikácie sa zmení zo zelenej na žltú.

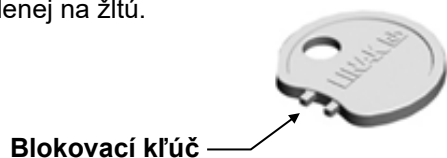

Blokovací kľúč



i Blokovací kľúč neotáčajte násilím! Môže dôjsť k poškodeniu blokovacieho zámku alebo celého ručného ovládača.

Pohon odblokováný:
Blokovací zámok je vo zvislej polohe
Farba indikácie: zelená
Môžu sa aktivovať klávesy („zvuk kliknutia“)


Pohon zablokovaný:
Blokovací zámok je v smere otáčania hodinových ručičiek pootočený o cca 15°
Farba indikácie: žltá
Tlačidlá sú zablokované!

Obsluha transportných koliesok

Pozor / Obozretnosť! Transportné kolieska obsluhujte len nohou. Pri obsluhe postele noste uzavretú obuv, aby ste zabránili poraneniu prstov na nohách.

Posúvanie: nožnú páku **a** chrbtom nohy zdvihnite smerom hore.

Brzdenie: nožnú páku **a** nohou stlačte dole.

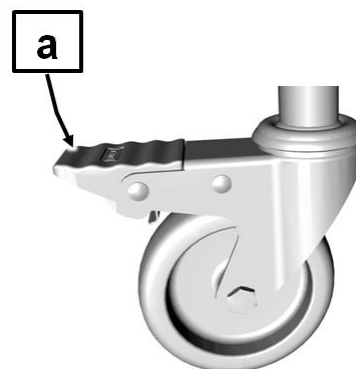

⚠ POZOR / OBOZRETNOSŤ

Stručný návod nenahrádza hlavný návod na používanie polohovacej postele Dali.

Hlavný návodom na používanie starostlivo prečítajte a rešpektujte bezpečnostné upozornenia!