


Stransko varovalo


Nastavljanje

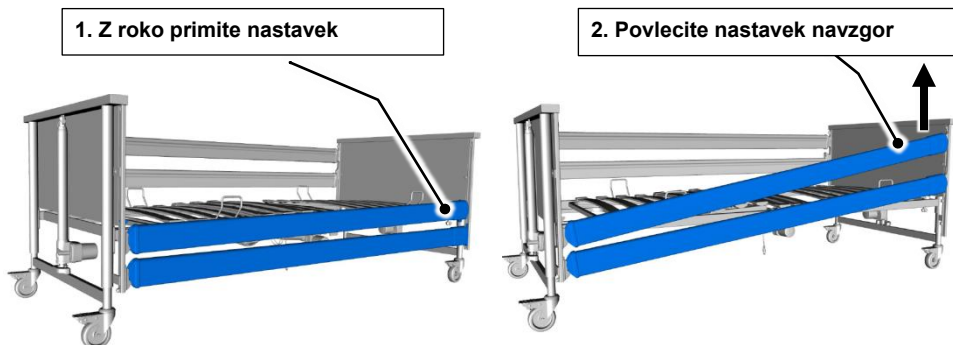

3. Preizkusite zaskočenost s pritiskom od zgoraj na letev stranskega varovala.

4. Postopek ponovite na drugi strani.


Spuščanje

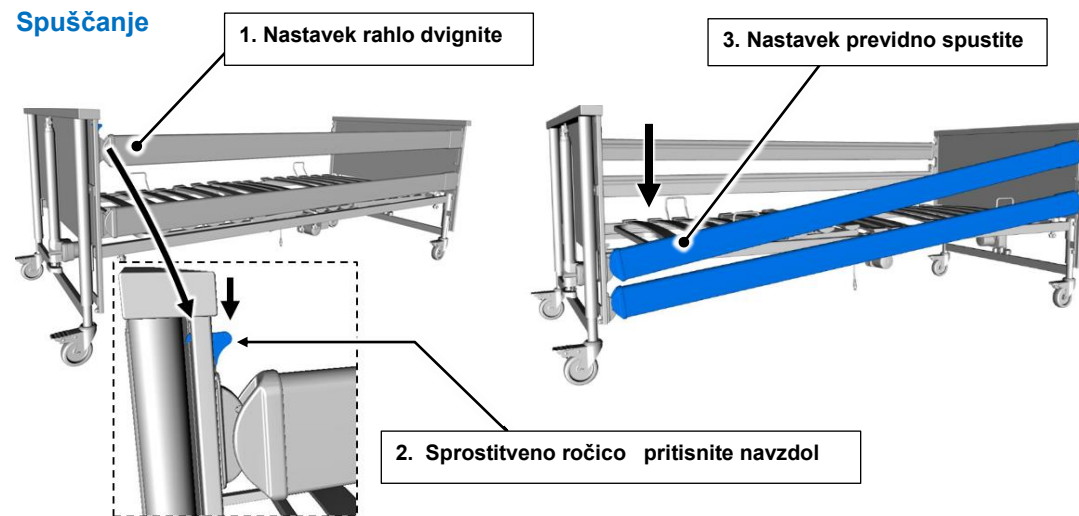


4. Postopek ponovite na drugi strani.

Trikotni ročaj

Vodoravna nastavitvev

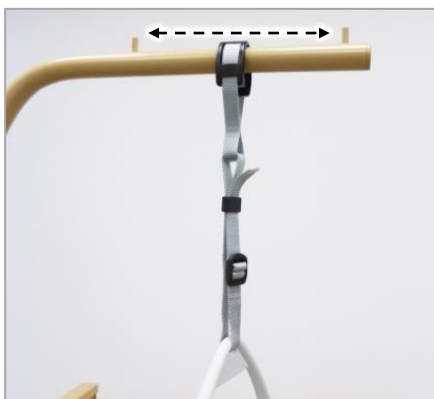

Navpična nastavitvev

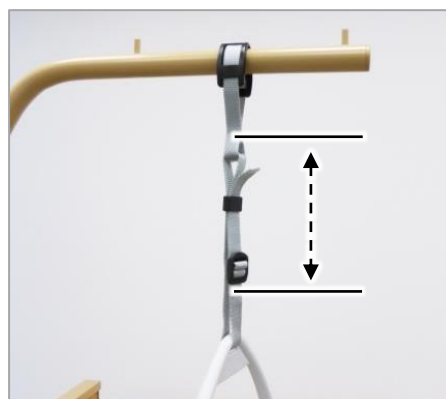

Uporaba (skrajšanje/podaljšanje)


Trak ① povlecite skozi sponko traku ②:

Skrajšanje: Konec traku ③ povlecite navzgor

Podaljšanje: Povlecite trikotni ročaj ④ navzdol

i Največja nosilnost 75 kg.


i Pri podaljšanju pazite, da sega konec traku najmanj 3 cm iz sponke.

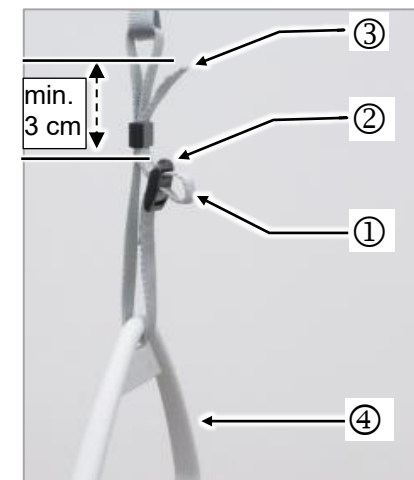

Počno stikalo Bluetooth (brez kabla)

(Pri Dali standard, Dali low-entry in Dali wash)

- 1 Naslon za hrbet
- 2 Visoka ležalna površina
- 3 Naslon za stegna
- 4 Nižji položaj za noge
- 5 Magnetni senzor (spoznate ga po simbolu križa)
- 6 Položaj za spanje
- 7 Simbol baterije
- 8 LED
- 9 Zaporna funkcija

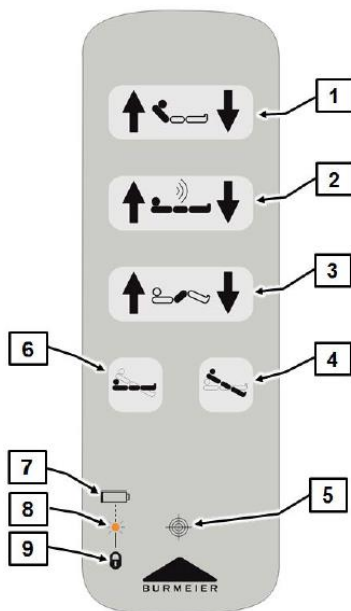

Načeloma velja:

- = Dviganje
- = Spuščanje

Pokažite stanovalcu funkcije ročnega stikala!

- Pogonski motorji delujejo tako dolgo, kot je pritisnjena ustrezna tipka.
- Možnosti nastavljanja so možne v obe smeri vse do nižjega položaja nog in položaja spanja.
- Ročno stikalo je zaščiteno pred vodo in ga je možno brisati s krpo.
- Ročno stikalo lahko pritrdite na posteljo s pomočjo elastične kljukice.

Zaporne funkcije– ročno stikalo Bluetooth


Prosimo, pazite:

Pod ročnim stikalom je nameščen magnetni senzor.

Za blokiranje oziroma sprostitve funkcij je potreben prosti magnet **[a]** (vključen v dobavni obseg).

Pri blokiranju/sprostitvi nastavitvev na ročnem stikalu postopajte, kot sledi:

1. Dobavljeni magnet **[a]** postavite na magnetni senzor, vgrajen v ročnem stikalu
2. Zdaj lahko blokirate/sprostite želene funkcije.
 - Za blokiranje pritisnite desno tipko na ročnem stikalu. Za sprostitvev pritisnite levo tipko (glejte naslednjo tabelo).

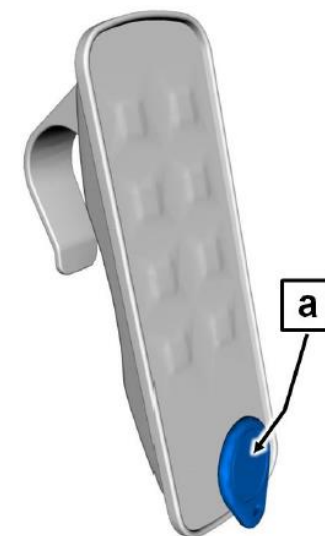

Sprostitev	Delovanje	Blokiranje
	Naslon za hrbet	
	Visoka ležalna površina	
	Naslon za stegna	
	Položaj za spanje/nižji položaj nog	

Seznajte ročno stikalo s krmilnikom (le pri Dali standard, wash in low-entry)

- i** Prosimo, pazite: Preden lahko nastavljate funkcije postelje, morate ročno stikalo seznaniti (povezati) s krmilnikom. Seznanjanje je pomembno le pri prvi uporabi postelje, zamenjavi ročnega stikala Bluetooth in zamenjavi krmilne enote.

Postopajte, kot sledi:

- i** Najprej odstranite magnet z ročnega stikala, da preprečite nepravilno delovanje.

1. Vstavite preklopni napajalnik v vtičnico.
 - Če je bil preklopni napajalnik že priključen v vtičnico, ga izvlecite iz vtičnice in počakajte približno 10 sekund, nato ponovno priključite.
2. V času 20 s istočasno pritisnite (z razliko največ 0,5 sek) obe tipki za dvig in spust višine ležalne površine za najmanj 5 s.
 - LED dioda krmilnika zasveti za 4 s v oranžni barvi, ko je seznanitev uspešna.
 - LED dioda krmilnika utripne 4x v oranžni barvi, če seznanitev ni uspešna. V tem primeru ponovite koraka 1 in 2.

Baterija - ročno stikalo Bluetooth

- i** Ročno stikalo Bluetooth uporablja eno litijevo baterijo CR-2032. Pri delno prazni bateriji začne LED dioda ročnega stikala ob vsakem pritisku tipke utripati 4x rumeno. Baterijo morate nato v nekaj dneh zamenjati.

Postopajte, kot sledi:

1. Odprite pokrov razdelka baterije **a** na zadnji strani ročnega stikala.
 - Vstavite na primer kovanec v utor pokrovčka in zavrtite v protiurni smeri.
2. Vzemite staro baterijo iz ležišča.
3. Vstavite novo baterijo (pri tem pazite na usmerjenost polov).
4. Zaprite pokrov razdelka baterije (zavrtite v sourni smeri).



Ročno stikalo s kablom

(Pri Dali standard, Dali low-entry in Dali econ)

Uporaba


Načeloma velja pri tipkah:

Dviganje: Spuščanje:

Iz varnostnih razlogov je v ročno stikalo vgrajena zaporna funkcija.

S pomočjo zapornega ključa zavrtite ključavnico v sourni smeri v zaklenjen položaj.

Barva zadevnega prikaza se spremeni iz zelene v rumeno.

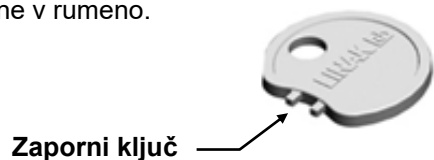

Zapornega ključa ne obračajte „na silo“! Lahko pride do poškodbe zaporne ključavnice ali celega ročnega stikala.

Sproščen pogon:
Zaporna ključavnica je postavljena navpično
Barva prikaza: Zelena
Tipke so aktivne ("Zvok klikanja")


Pogon zaklenjen:
Zaporna ključavnica je obrnjena za 15° v sourni smer
Barva prikaza: Rumena
Tipke so zaklenjene

Upravljanje tekalnih koles

Pozor! Tekalna kolesa upravljajte le z nogami. Pri uporabi zavore nosite zaprte čevlje, da preprečite poškodbe nog.

Vožnja: S potiskom noge postavite ročico zavore navzgor.

Zaviranje: Z nogo pritisnite ročico zavore navzdol.

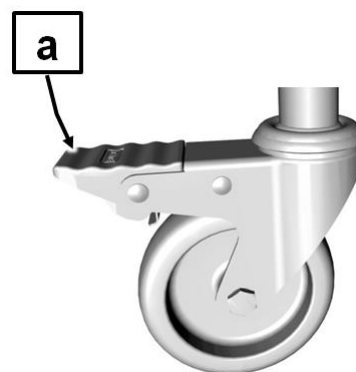

POZOR

Kratka navodila niso zamenjava za glavna navodila za uporabo negovalne postelje Dali.

Glavna navodila za uporabo je treba skrbno prebrati in upoštevati varnostne napotke!