


Sivulaita


Kohottaminen

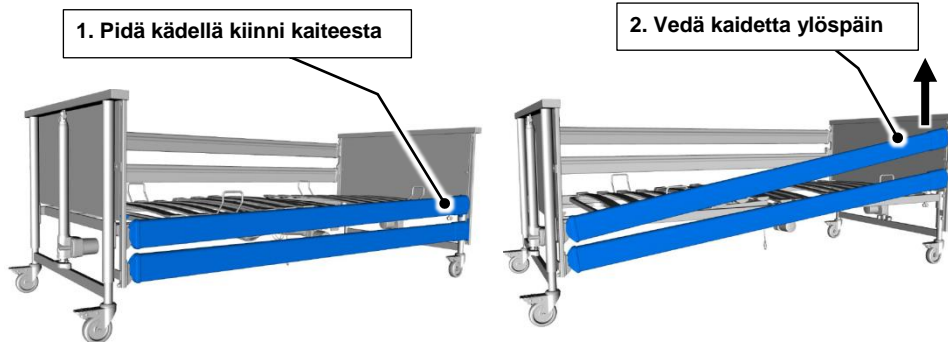

3. Tarkista lukittuminen painamalla sivulaitojen kaiteiden yläosaa.

4. Toista toimenpide toisella puolella.


Laskeminen alas

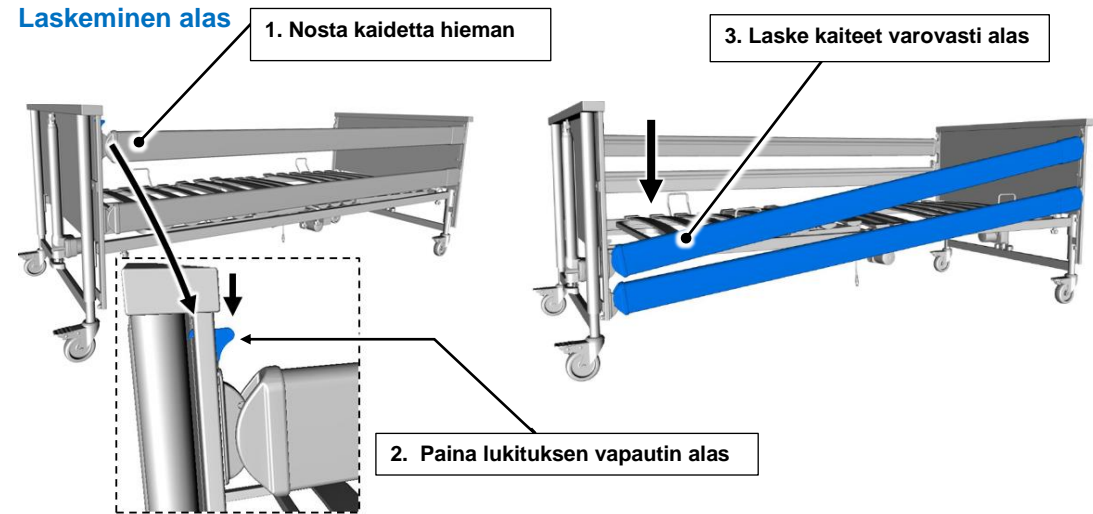


4. Toista toimenpide toisella puolella.

Kolmiokahva

Vaakasuuntainen säätö

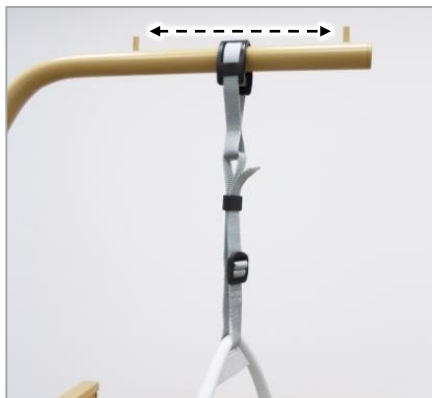

Korkeuden säätö

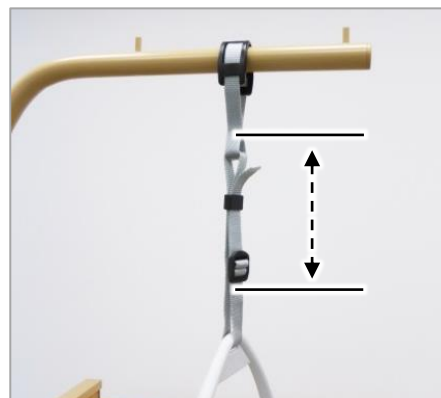

Käyttö (lyhentäminen/pidentäminen)


Vedä hihna ① hihnalukon ② läpi:

Lyhentäminen: Vedä hihnanpäää ③ ylöspäin

Pidentäminen: Vedä kolmiokahvaa ④ alaspäin

i Enimmäiskantavuus 75 kg.


i Varmista pidentämisessä, että hihnan pää on vähintään 3 cm hihnalukon yläpuolella.

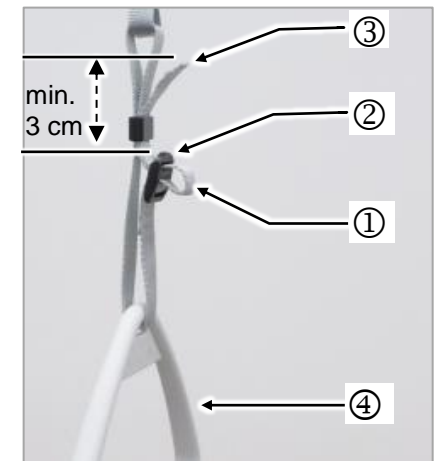


Bluetooth-käsiohjain (johdoton)

(Dali Standard, Dali low-entry ja Dali wash)

- 1 Selkäosa
- 2 Makuutason korkeus
- 3 Reisituki
- 4 Anti-trendelenburgin asento
- 5 Magneettianturi (tunnistetaan ristisymbolista)
- 6 Nukkuma-asento
- 7 Paristosymboli
- 8 LED
- 9 Lukitussymboli

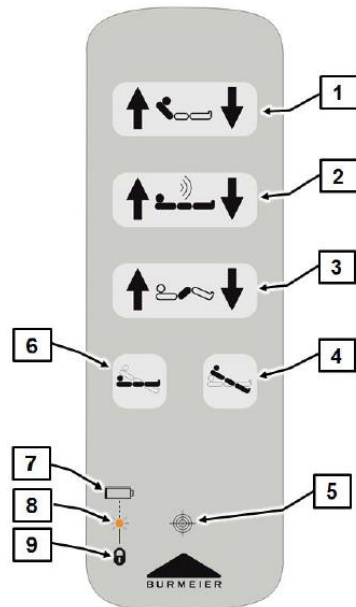

Käyttösuunnat:

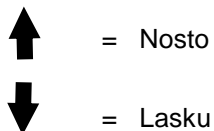

Opeta asukasta käyttämään käsiohjaimen toimintoja.

- Moottorit käyvät niin kauan kuin vastaavaa painiketta painetaan.
- Anti-trendelenburgin asentoa ja nukkuma-asentoa lukuun ottamatta säätötoiminnot ovat mahdollisia kumpaankin suuntaan.
- Käsiohjain on vesitiivis, ja sen voi puhdistaa pyyhkimällä.
- Käsiohjaimen voi ripustaa joustavan koukun avulla vuoteeseen.

Bluetooth-käsiohjaimen lukitustoiminnot


Huomioi:

Käsiohjaimen alaosassa on magneettianturi.

Toimintojen lukitsemiseen ja vapauttamiseen tarvitaan erillinen magneetti **[a]** (sisältyy toimitukseen).

Käsiohjaimen asetuksia lukitaan ja vapautetaan seuraavalla tavalla:

1. Pidä mukana toimitettua magneettia **[a]** käsiohjaimen integroitua magneettianturia vasten.
2. Lukitse tai vapauta tarvitsemasi toiminnot sitten.
 - Lukitse toiminto painamalla käsiohjaimen oikeanpuoleista painiketta. Vapauta toiminto painamalla vasemmanpuoleista painiketta (katso seuraava taulukko).

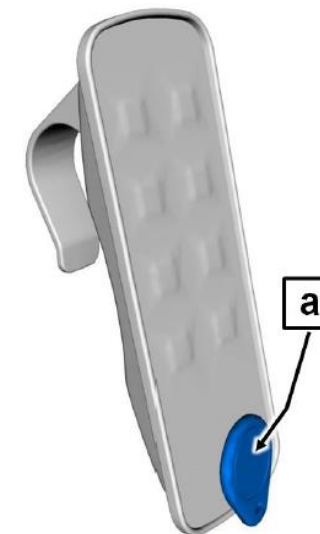

Vapautus	Toiminto	Lukitus
	Selkäosa	
	Makuutason korkeus	
	Reisituki	
	Nukkuma-asento / Anti-trendelenburgin asento	

Käsiohjaimen yhdistäminen ohjauslaitteeseen (vain Dali standard, wash ja low-entry)

i Huomioi: Jotta vuoteen toimintoja voidaan säätää, on käsiohjain yhdistettävä (liitettävä) ensin ohjauslaitteen kanssa.

Yhdistäminen on tarpeen vain vuoteen käyttöönoton, Bluetooth-käsiohjaimen vaihdon ja ohjauslaitteen vaihdon yhteydessä.

Toimi seuraavasti:

1. Liitä verkkolaite pistorasiaan.
 - Jos verkkolaite on jo pistorasiassa, poista verkkolaite pistorasiasta, odota noin 10 sekuntia ja kytke se sitten takaisin pistorasiaan.
2. Paina 20 sekunnin kuluessa kumpaakin makuutason korkeudensäädön ylös-/alas-painiketta samanaikaisesti (0,5 s kuluessa) vähintään 5 sekuntia.
 - Jos yhdistäminen onnistui, ohjauslaitteen LEDissä palaa oranssi valo 4 sekuntia.
 - Jos yhdistäminen ei onnistunut, ohjauslaitteen LEDissä vilkkuu oranssi valo 4 kertaa. Toista silloin vaiheet 1 ja 2.


Bluetooth-käsiohjaimen paristo

i Bluetooth-käsiohjainta käytetään CR 2032 -litiumparistolla.

Pariston virran vähentyessä käsiohjaimen LED-näytössä vilkkuu keltainen valo 4 kertaa jokaisen painikkeen painalluksen yhteydessä. Paristo on silloin vaihdettava muutaman päivän kuluessa.

Toimi seuraavasti:

1. Avaa käsiohjaimen takaosassa olevan paristolokeron **a** kansi.
 - Työnnä esimerkiksi kolikko kannen uraan ja käännä sitä vastapäivään.
2. Poista vanha paristo.
3. Aseta uusi paristo paikalleen (varmista, että navat ovat oikeinpäin).
4. Sulje paristolokeron kansi (kääntämällä myötäpäivään).

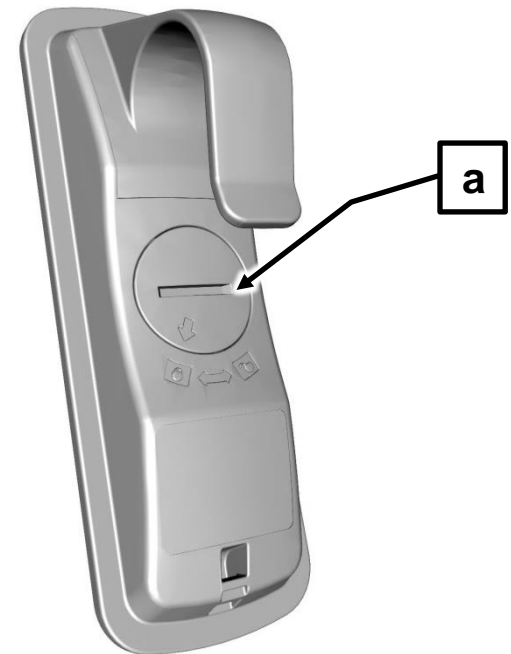

Pikaohje – Dali-hoitovuode

Johdollinen käsiohjin


(Dali Standard, Dali low-entry ja Dali econ)

Käyttö

Painikkeiden käyttösuunnat:

Nosto: ↑ Lasku: ↓

i Turvallisuussyistä käsiohjaimeen on integroitu lukitustoiminto. Käännä lukitusliitäntä lukitusavaimella myötäpäivään lukittuun asentoon. Kyseisen näytön väri muuttuu vihreästä keltaiseksi.

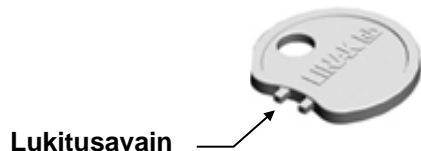

i Älä käännä lukitusavainta väkisin. Lukitusliitäntä tai käsiohjin voi vaurioitua.

Moottori vapautettu:
Lukitusliitäntä on pystysuorassa
Näytön väri: vihreä
Painikkeita voi painaa ("napsahdus")


Moottori lukittu:
Lukitusliitäntää on käännetty noin 15° myötäpäivään
Näytön väri: keltainen
Painikkeet ovat lukossa

Pyörien käyttö

Varo! Käytä pyöriä vain jalalla. Käytä umpinaisia kenkiä työskennellessäsi vuoteen äärellä, jotta jaloille ei aiheudu vammoja.

Siirtäminen: Nosta jalkavipua **a** jalalla.

Pyörien lukitseminen: Paina jalkavipua **a** jalalla.

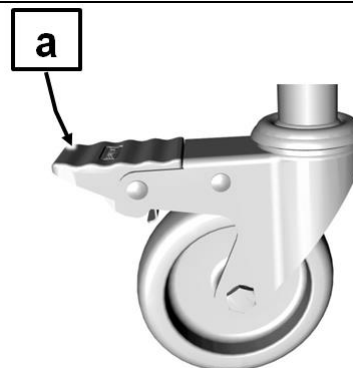

VARO

Pikaohje ei korvaa Dali-hoitovuoteen pääkäyttöohjetta. Lue pääkäyttöohje huolellisesti ja noudata turvallisuusohjeita.