

جهاز التحكم السلكي

(يأتي مع موديلات Dali Standard، و-Dali low، وDali econ، وDali entry)

الاستخدام

بالأساس تدل الأسهم على:

التحريك إلى أعلى : ↑
التحريك إلى أسفل : ↓

تم إلحاق وظيفة حماية بجهاز التحكم السلكي
مراعاة لاحتياطات السلامة.



أدر قفل الحماية باستخدام مفتاح الحماية
في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يصل إلى وضع التعشيق.
لون المؤشر المعني يتغير من الأخضر إلى الأصفر.



مفتاح الحماية

لا تستخدم "الشدة" عند إدارة مفتاح الحماية. كلا من قفل الحماية وجهاز التحكم معرضان للضرر.



بدء التشغيل:

قفل الحماية في وضع عمودي

لون المؤشر: أخضر

يمكن الآن الضغط على الأزرار (صوت الضغط على زر)



إيقاف التشغيل:

قفل الحماية مُدار في اتجاه حركة عقارب الساعة بحوالي 15 درجة

لون المؤشر: أصفر

تم غلق الأزرار




استخدام عجلات السرير

تحذير! استخدم عجلات السرير فقط بواسطة القدم.
ارتدي أحذية مغلقة عند استخدام السرير لتجنب حدوث إصابات بالأقدام.

التحريك: ارفع ذراع التحريك a بظهر مشط القدم.

تعشيق الحركة: اضغط ذراع التحريك a بالقدم إلى أسفل.

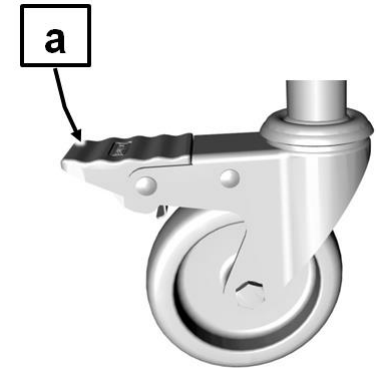

تحذير

الدليل الموجز لا يحل محل دليل الاستخدام الأساسي لسرير التمريض Dali بأي حال من الأحوال.

احرص على قراءة دليل الاستخدام الأساسي بعناية وانتبه إلى تعليمات السلامة.