






Montageanleitung für Transporttasche der Seitensicherungsholme

In der Transporttasche können die durchgehenden Seitensicherungsholme (4 Holme) der Burmeier-Pflegebetten wie auf den folgenden Seiten beschrieben aufbewahrt, an der Lagerhilfe sicher befestigt und transportiert werden.

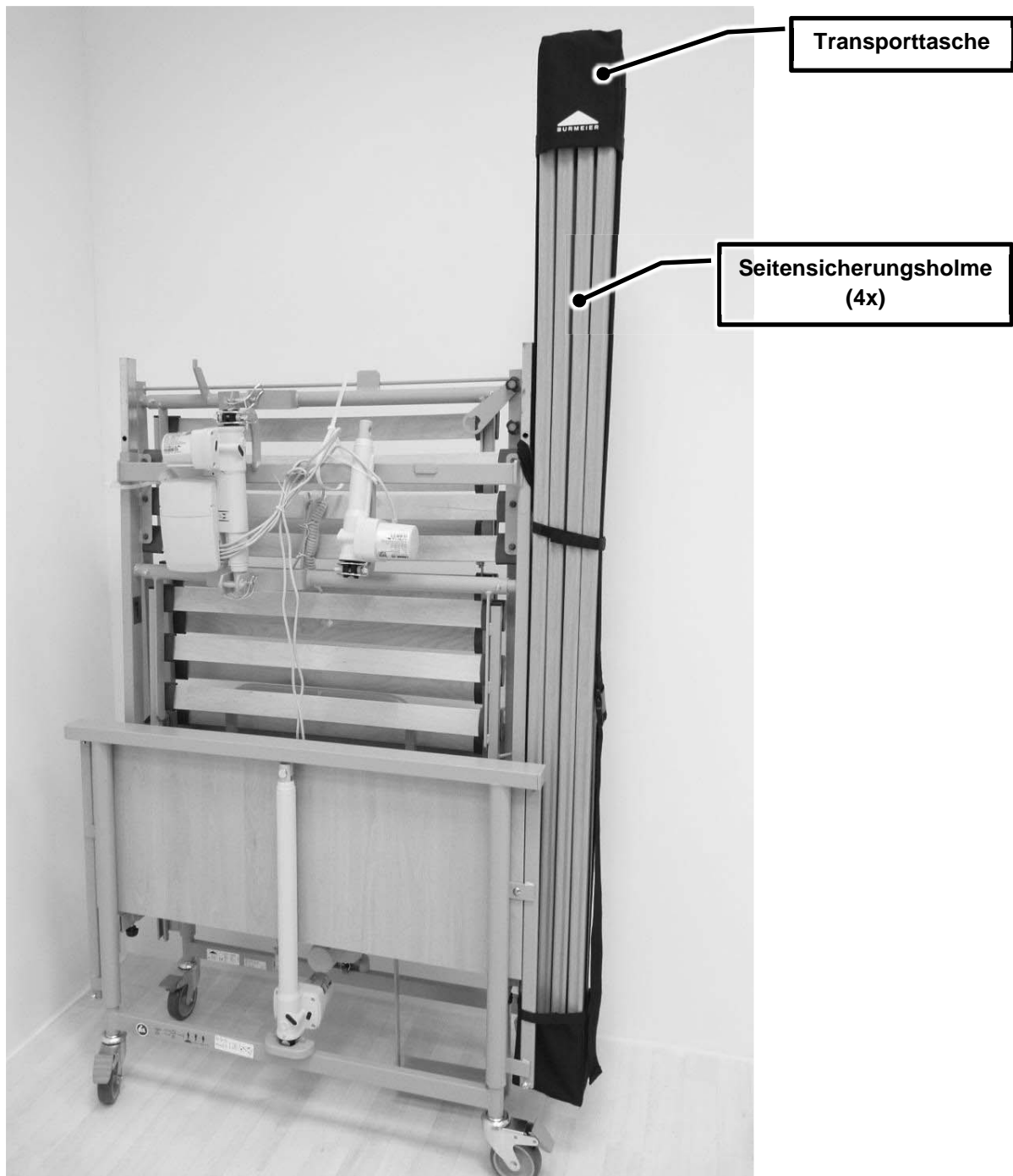

Weiter auf der nächsten Seite

Gehen Sie wie folgt vor:
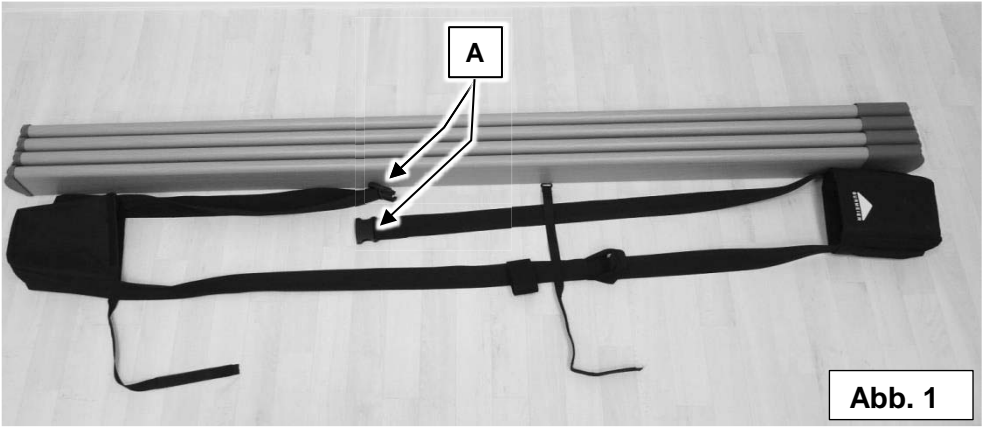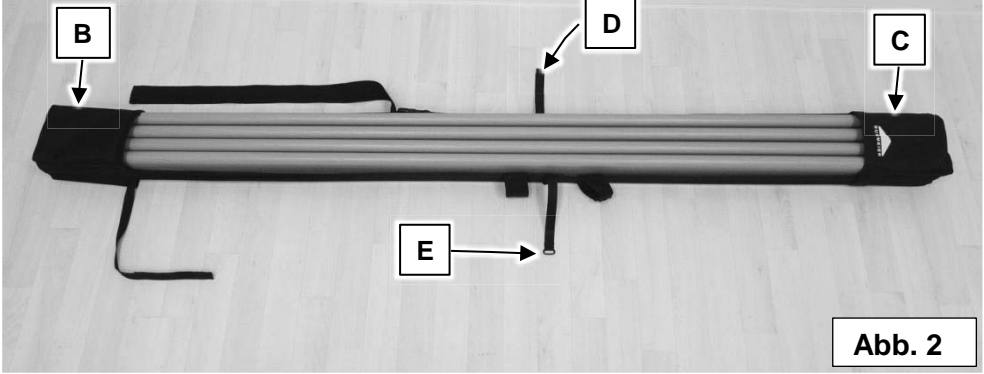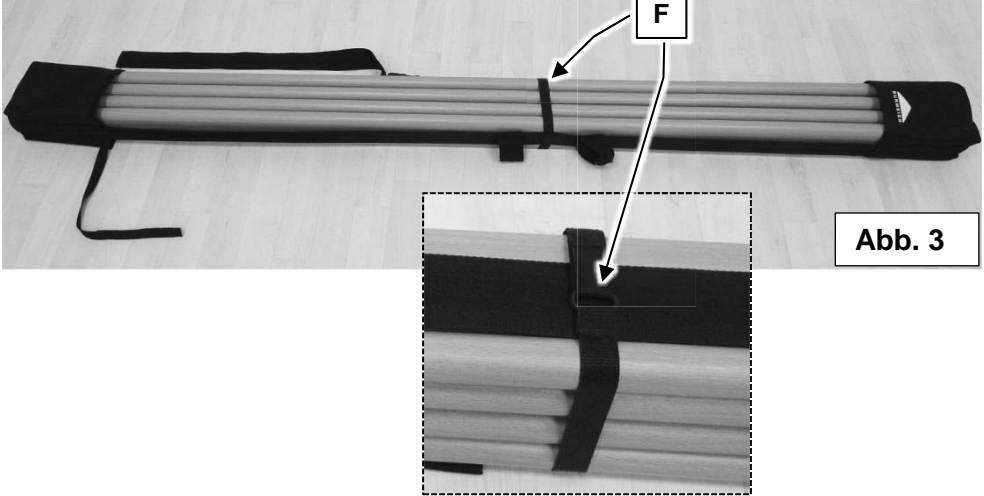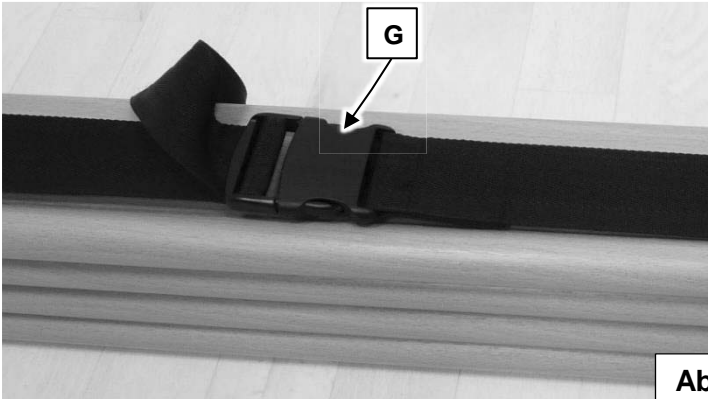
<p>1. Legen Sie die 4 Holme wie dargestellt auf den Boden.</p> <p>Legen Sie dann die Transporttasche direkt neben die Holme.</p> <p>Hinweis: Burmeier-Logo zeigt nach oben.</p>	 <p style="text-align: right;">Abb. 1</p>
<p>2. Führen Sie die Holme wie dargestellt in die Einstecktaschen B und C ein.</p> <p>Ziehen Sie das Flauschband D unter den Holmen durch.</p>	 <p style="text-align: right;">Abb. 2</p>
<p>3. Flauschband D in den Ring E (Abb. 2) einführen, festziehen und Klettverschluss schließen F.</p>	 <p style="text-align: right;">Abb. 3</p>
<p>4. Klickverschluss des Gurtbandes A (Abb. 1) schließen G (Abb. 4).</p> <p>Gurt bei Bedarf verstellen (verlängern/verkürzen).</p> <p>Hinweis: Ziehen Sie den Gurt vor dem Schließen straff und flach. Der Gurt darf nicht verdreht /verknotet sein.</p>	 <p style="text-align: right;">Abb. 4</p>

5. Holme mit der Transporttasche senkrecht neben das Bett stellen.

Beachten Sie dabei folgendes:

Die Trageschlaufen **H** und **I** sind für die Aufnahme an der Lagerhilfe vorgesehen. Je nach Bettmodell verwenden Sie eine der beiden Schlaufen.

Das Flauschband **J** ist zur Fixierung der Holme unten an der Lagerhilfe vorgesehen.

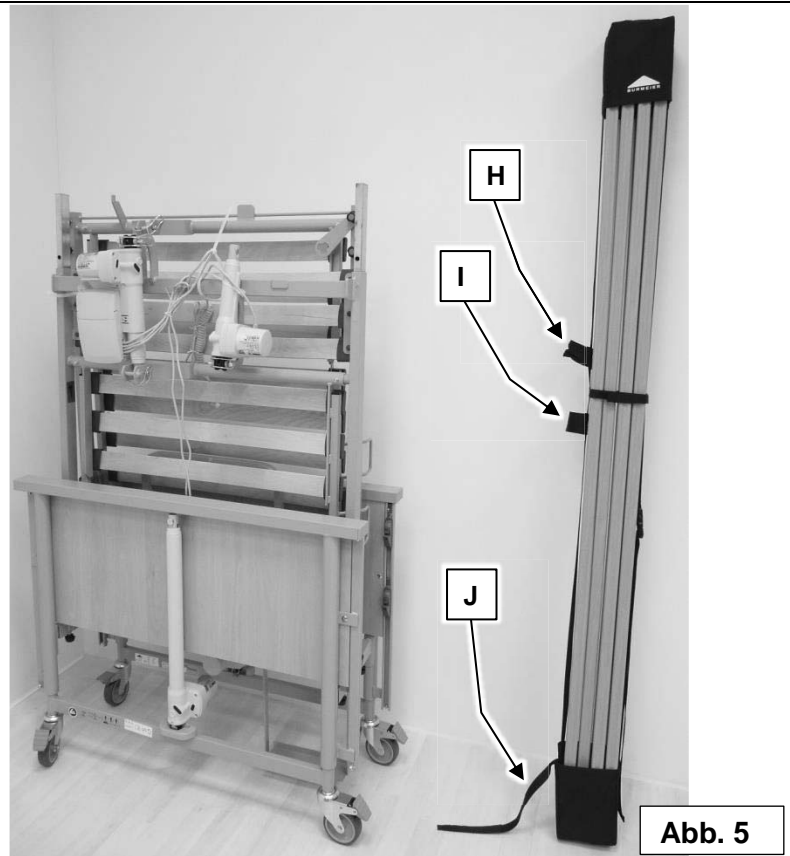


Abb. 5

6. Die Holme wie dargestellt mittels der Trageschleife **H** oder **I** (je nach Bettmodelle) in den Rahmen der Liegefläche **K** einhängen (siehe Abb. 6.1).

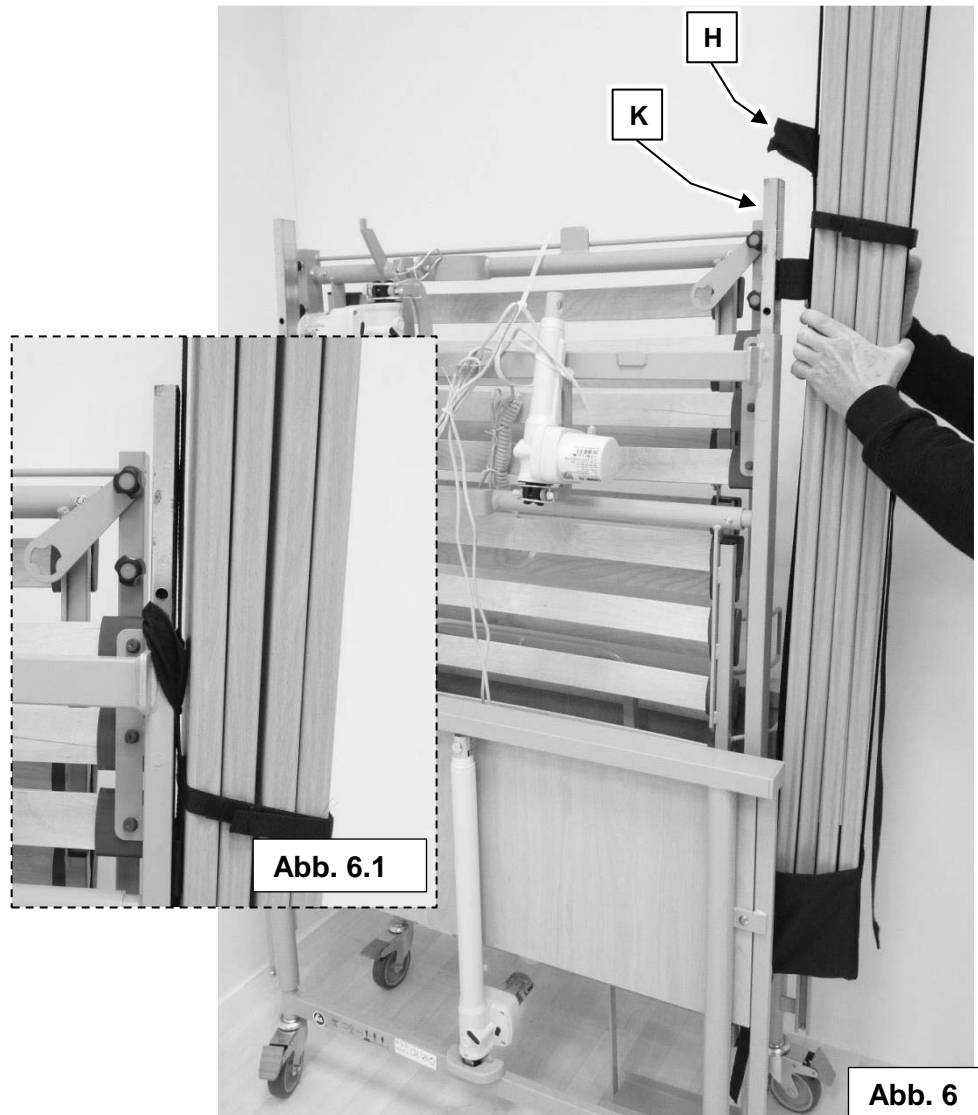




Abb. 6.1

Abb. 6


7. Transporttasche mittels des unteren Flauschbandes **J** wie abgebildet sicher an der Lagerhilfe **L** fixieren.

Hinweis:

Achten Sie vor dem Transport darauf, dass die Transporttasche sicher an der Lagerhilfe befestigt ist.

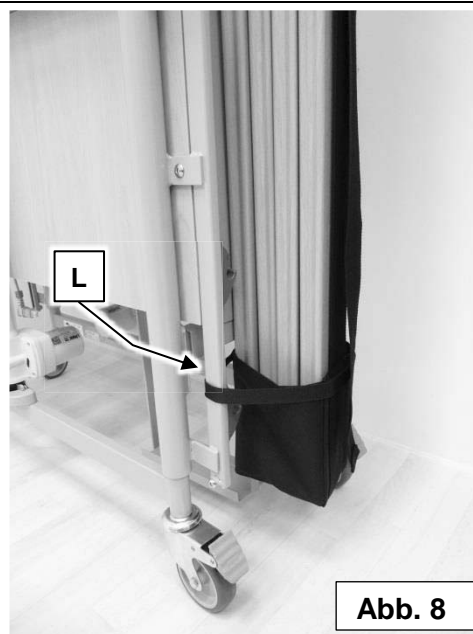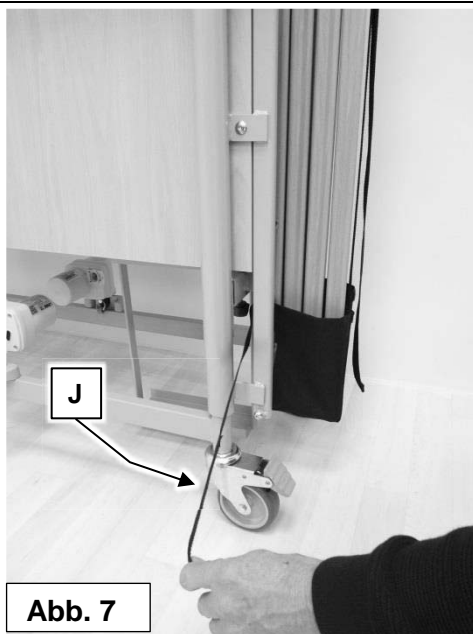

Ende der Montage.

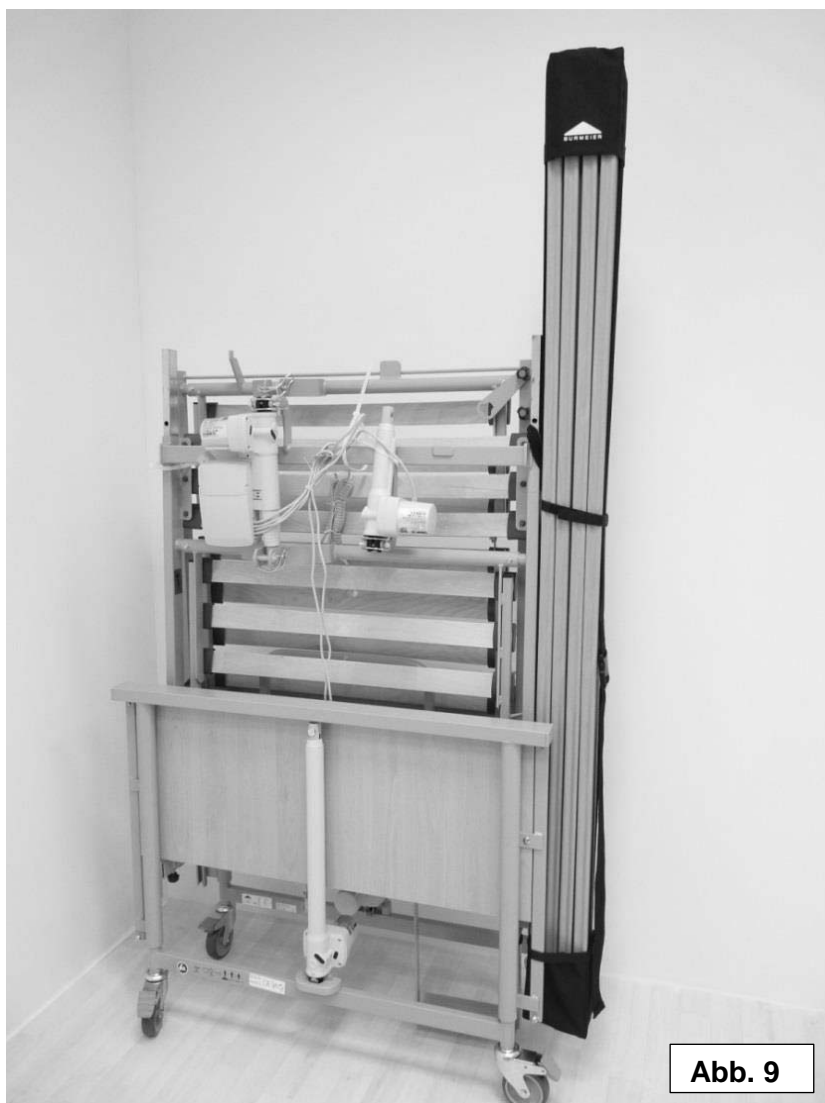


Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage/Lippe
Telefon: + 49 (0) 5232 / 9841- 0
Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 4
www.burmeier.de
info@burmeier.com

29.01.2019 / V1 / 277562





Mounting instructions for the safety side bar transport bag

In the transport bag can be stored the full-length safety side bars (4 bars) for Burmeier care beds. It can be attached securely to the storage aid and transported as described in the following pages.

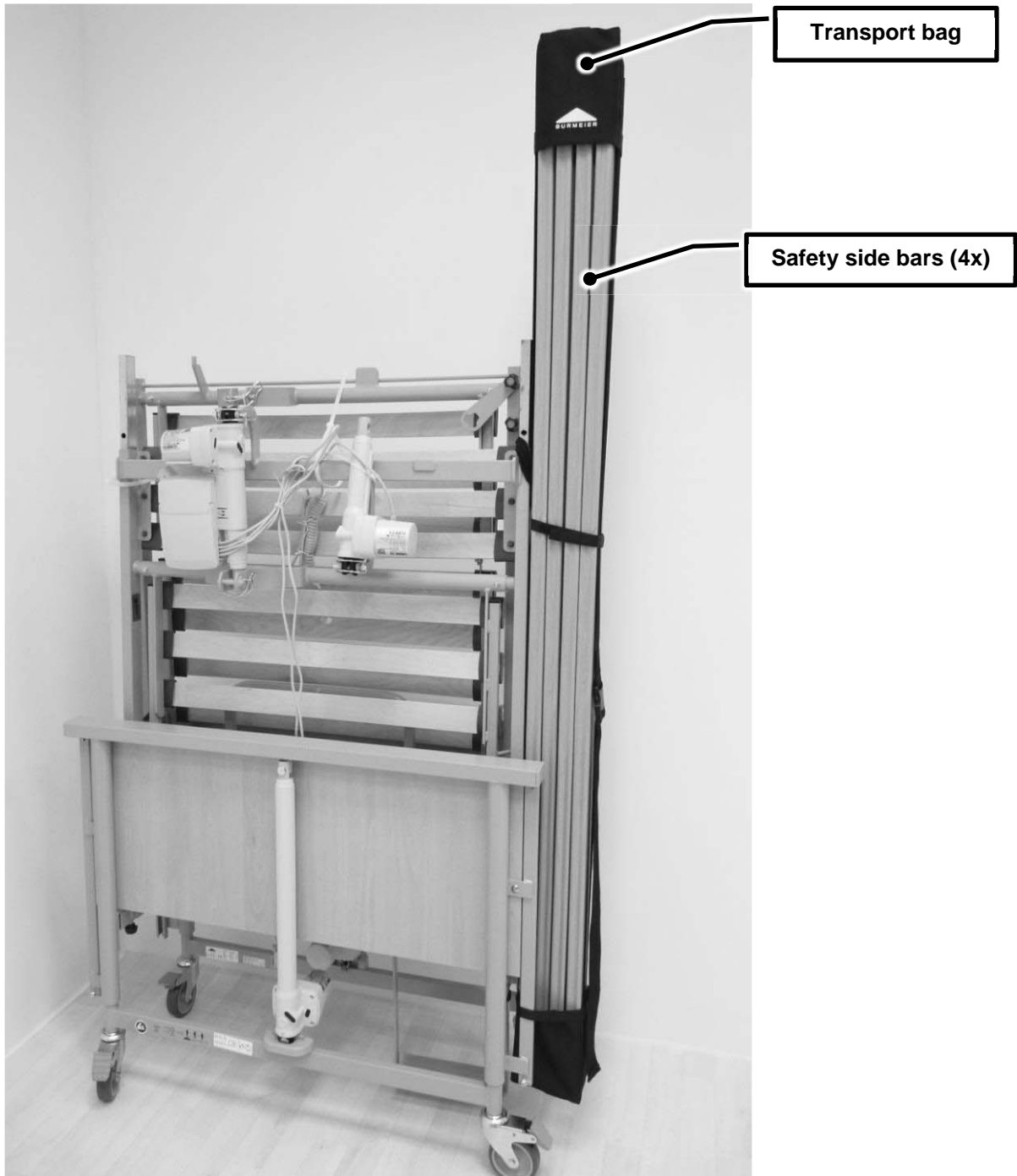

Continue on the next page

Proceed as follows:

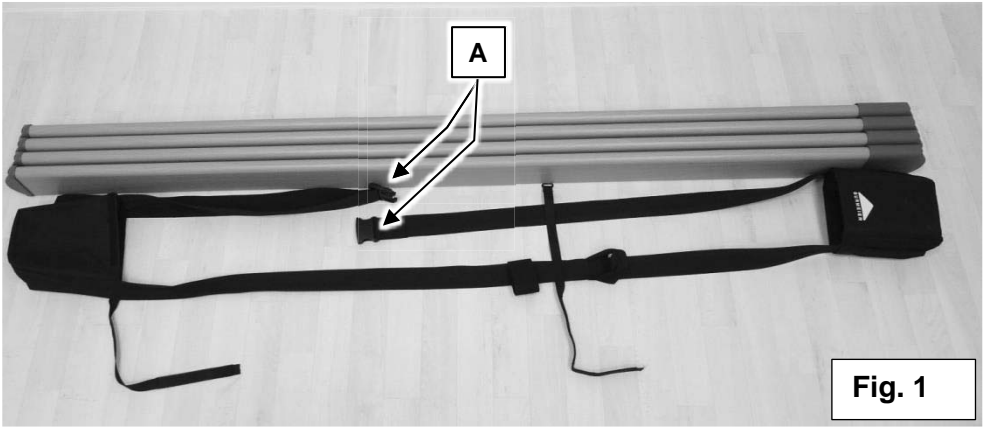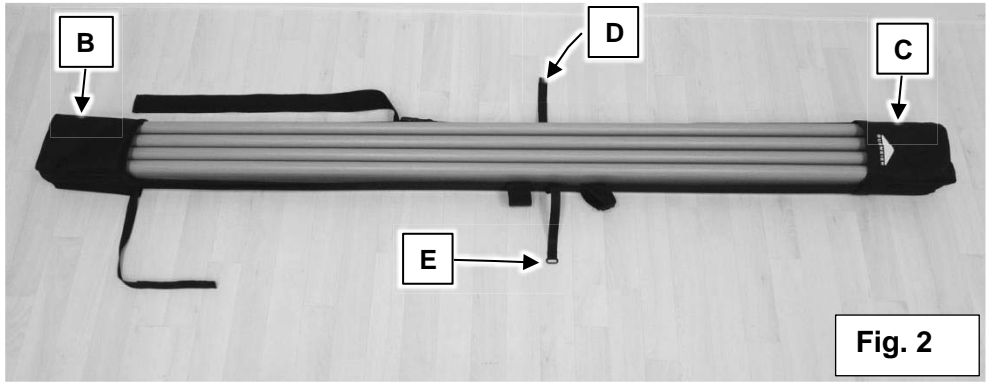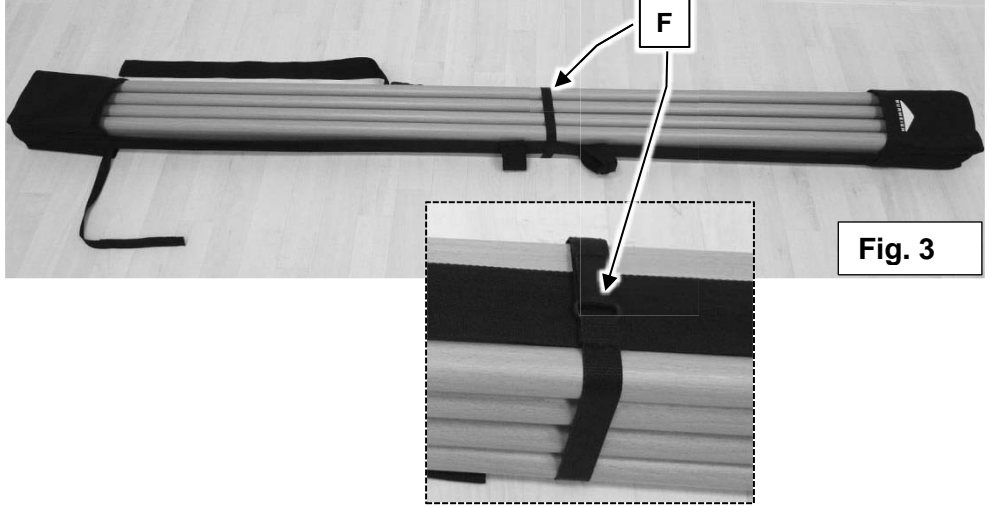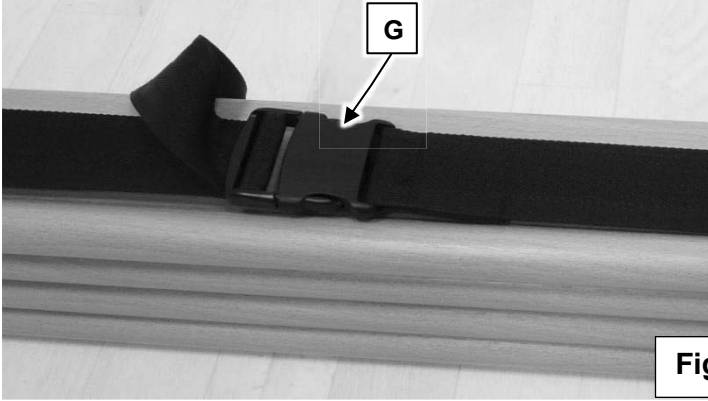
<p>1. Place the 4 bars on the floor as shown.</p> <p>Place the transport bag directly next to the bars.</p> <p>Note: The Burmeier logo is facing up.</p>	 <p>Fig. 1</p>
<p>2. Insert the bars in the pockets B and C as shown.</p> <p>Pull the velcro tape D under the bars.</p>	 <p>Fig. 2</p>
<p>3. Insert the velcro tape D into the ring E (Fig. 2), pull it tightly and close the Velcro fastener F.</p>	 <p>Fig. 3</p>
<p>4. Close the strap's side-release buckle A (Fig.1) G (Fig. 4).</p> <p>Adjust the strap as required (lengthen/shorten).</p> <p>Note: Pull the strap tight and flat before closing. The strap must not be twisted/knotted.</p>	 <p>Fig. 4</p>

5. Place the bars with the transport bag upright next to the bed.


Please note the following:

The carrying loops **H** and **I** are used for hanging the bag to the storage aid. Depending on the bed model, use one or the other loop.

The velcro tape **J** is used for attaching the bars at the bottom of the storage aid.

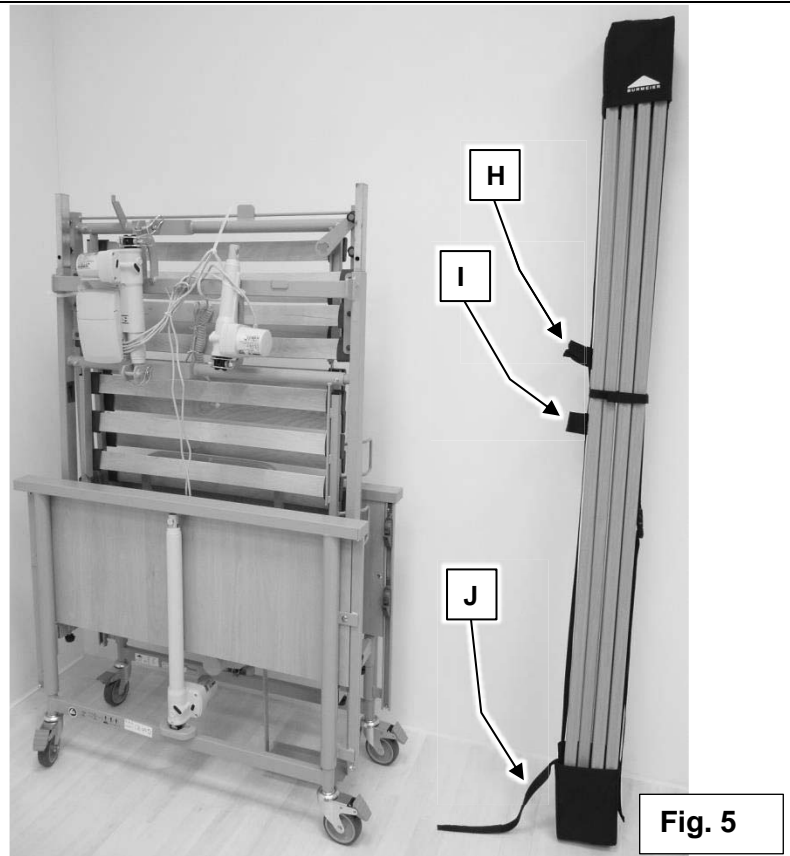

6. Attach the bars using the carrying loop **H** or **I** (depending on the bed model) to the frame of the mattress base **K** as shown (see Fig. 6.1).

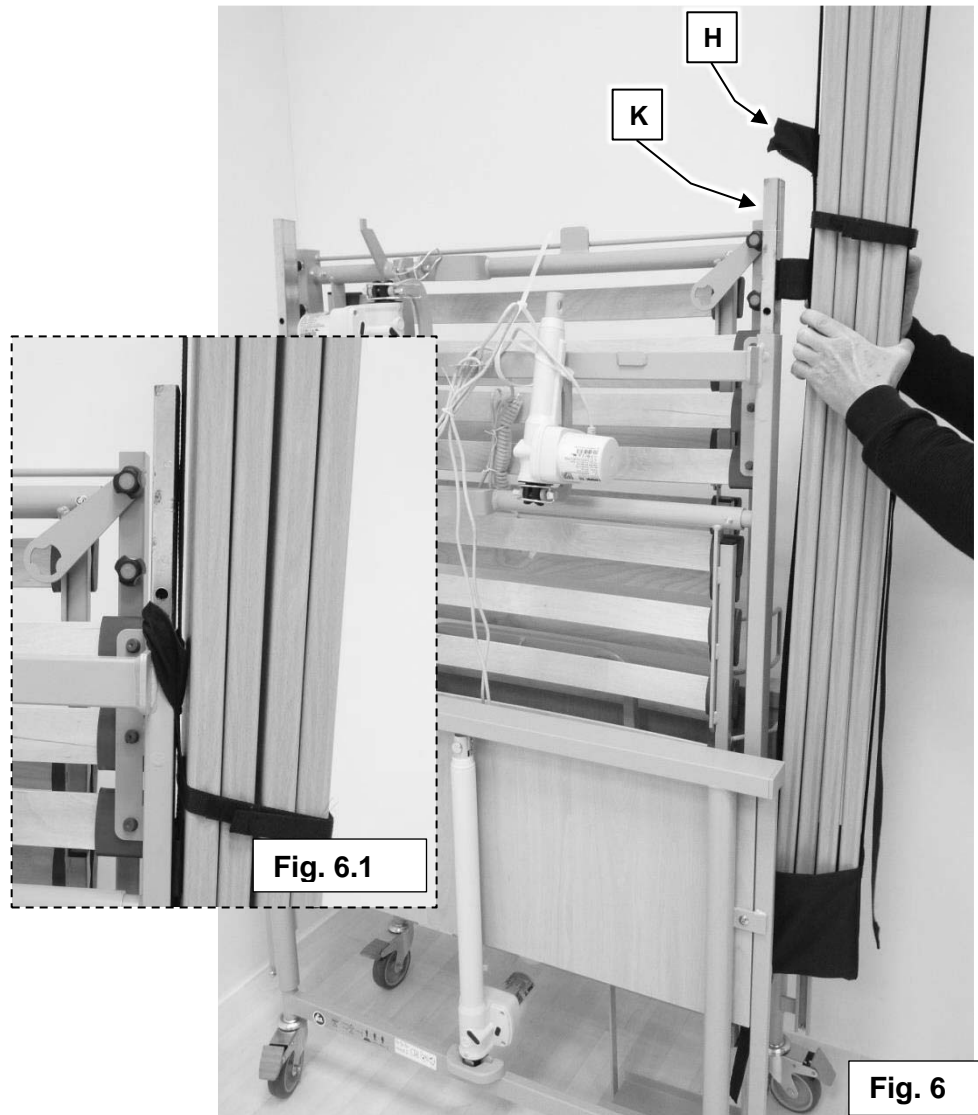

7. Attach the transport bag securely to the storage aid **L** using the velcro tape **J** as shown.

Note:

Before transport, make sure that the transport bag is securely attached to the storage aid.

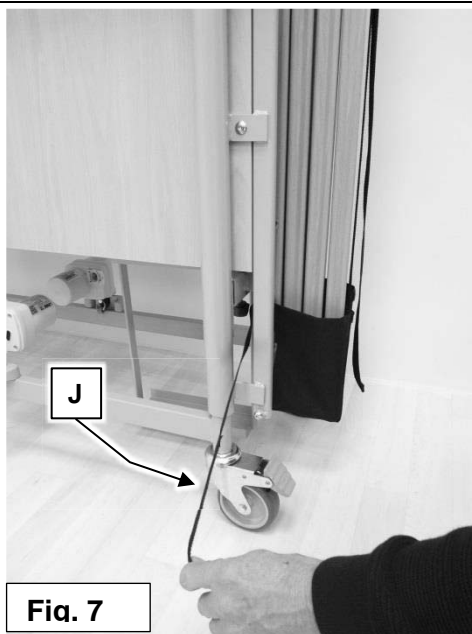


Fig. 7



Fig. 8

The mounting procedure is now completed.

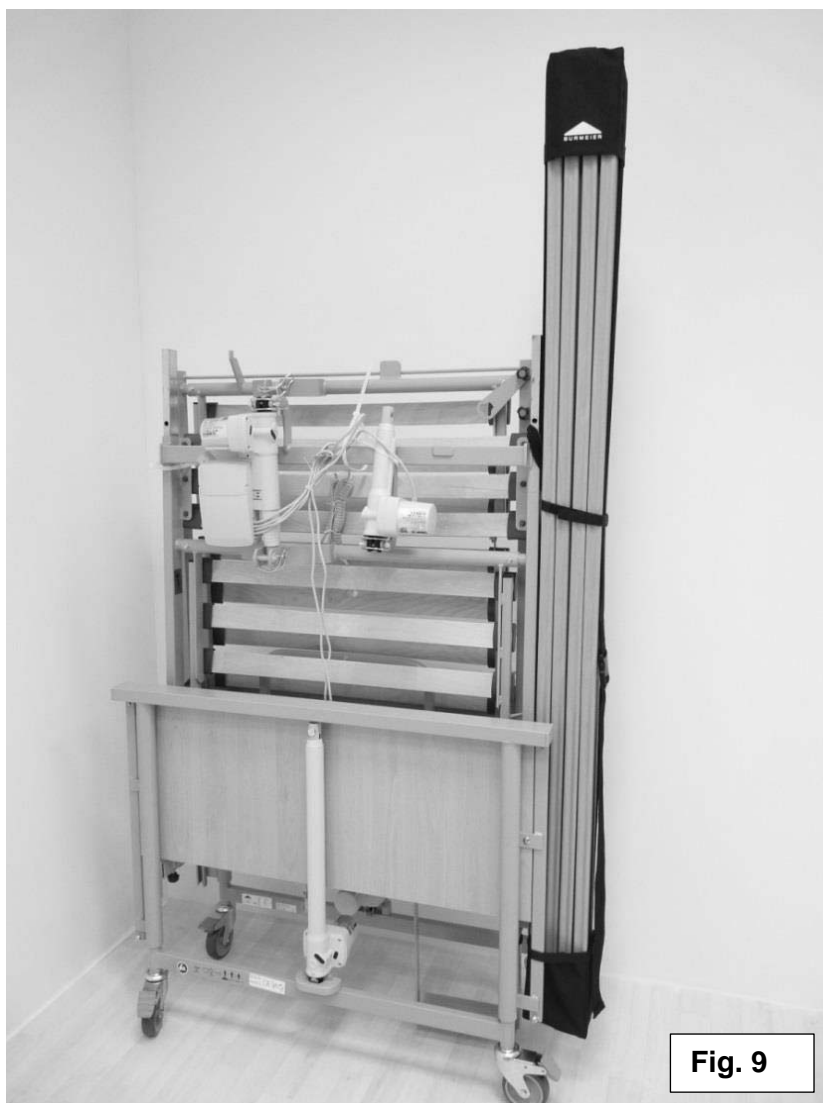


Fig. 9

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage/Lippe
Telephone: + 49 (0) 5232 / 9841- 0
Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 4
www.burmeier.de
info@burmeier.com

29/01/2019 / V1 / 277562