

Lippe 120/140

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Der höhenverstellbare
Betteinsatz



250 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

komfortable Liegeflächenbreite von 120 und 140 cm

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

Doppelhubschere

Standfuß mit Bodenausgleichsschraube, Befestigungslasche

Ausstattung mit busbasiertem Antriebssystem für Assistenzsysteme

Liegefläche in der Mitte geteilt

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

Betteinsatz Lippe 120/140 - Die praktische Alternative zum Schwerlastbett

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Der Betteinsatz „Lippe 120/140“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Sichere Arbeitslast von 250 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Betteinsatzes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Details



Standfuß mit Bodenausgleichsschraube, Befestigungslasche



Kugelgelagerte Höhenverstellung



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem serienmäßig)



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



Niedrige Einstiegs-
höhe von 29 cm –
erleichtert den
Ein- und Ausstieg

Betteinsatz **Lippe** 120/140

Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar
- Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Liegehöhenverstellung von 29 cm bis 74 cm
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Doppelhubschere für stabilen Stand in jeder Position
- 5. Matratzenbügelgriff serienmäßig zur fußseitigen Fixierung der Matratze
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52:2009




Technische Änderungen vorbehalten, Stand 11/2015, Version 4, Artikel-Nr. 600165.

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Leselampen

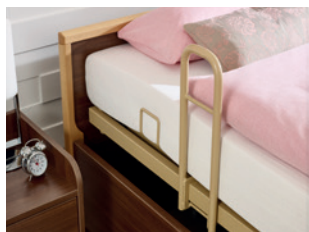

Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm)



Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar)



Aufrichter

Bestellnummern und Außenmaße

30.9956.12 Betteinsatz **Lippe 120**, Liegeflächen-Nennmaß 120 x 200 cm, tatsächliches Liegeflächenmaß 115 x 195 cm

30.9956.14 Betteinsatz **Lippe 140**, Liegeflächen-Nennmaß 140 x 200 cm, tatsächliches Liegeflächenmaß 135 x 195 cm

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage

Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0

Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41

E-Mail: info@burmeier.com

www.burmeier.com

