

VEILIG THUIS LEVEN

Lippe-serie en Relax-bedombouw



Comfort en veiligheid
in het eigen bed



Nieuwe kwaliteit van leven in een vertrouwd bed

Mensen op hoge leeftijd of zieken en hun verzorgers profiteren van de ondersteuning van een verstelbaar zorgbed. Maar de stap ernaartoe is soms moeilijk. Het afscheid van het eigen geliefde bed betekent het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven, dat met onzekerheden wordt omgeven.

Burmeier biedt een overtuigende oplossing voor dit gevoelige probleem. Onze bedinzetstukken uit de Lippe-serie kunnen eenvoudig in het vertrouwde, bestaande bedframe worden geplaatst. De persoonlijke uitstraling van de slaapkamer blijft onveranderd, maar tegelijkertijd geniet u van de voordelen van een elektrisch verstelbaar bed - bijvoorbeeld de hoogteverstelling voor ergonomische verzorging of het vierdelige ligvlak voor een comfortabele verstelling van de rug- en bovenbeensteunen. Met een breedte van 80 tot 140 cm biedt de Lippe ook meer ruimte dan een zorgbed.

Sterke argumenten voor de medische vakhandel biedt de machinewasbare uitvoering Lippe IV wasbaar: Hij staat voor valideerbare hygiëne, bescherming en lastenverlichting van de medewerkers, evenals voor kosten- en tijdsparing. Ook door het optionele digitale CCS-communicatiesysteem begint de Lippe-serie samen met u aan een nieuw veelbelovend hoofdstuk in de thuiszorg.

Voor de thuiszorg

Nummers verpleeghulpmiddelen:

Lippe IV:	50.45.03.0026
Lippe 120:	50.45.03.4003
Lippe 140:	50.45.03.4004

Nummers hulpmiddelen:

Lippe IV:	19.40.03.0026
Lippe 120:	19.40.03.4003
Lippe 140:	19.40.03.4004

Inhoud

4 Lippe IV

6 Lippe IV – Alle voordelen op een rijtje

8 Lippe IV wasbaar

10 Lippe 120/140

12 Relax

14 CCS – Care Communication System

15 Toebehoren

17 Uitvoeringen en opties

18 De Stiegmeyer-groep

Lippe IV



- **Hoogteverstelling:**
29 - 74 cm
- **Veilige werklust: 200 kg**
- **Flexibel comfort:**
 - Grote selectie van verschillende lengte- en breedtematen
 - Selectief blokkeerbare handschakelaar
 - Ondersteunt valpreventie en ergonomische zorg

Pagina 4

Lippe IV wasbaar



- **Hoogteverstelling:**
29 - 74 cm
- **Veilige werklust: 200 kg**
- **Machinewasbaar voor valideerbare hygiëne:**
 - KTL-coating beschermt tegen corrosie
 - Bescherming en verlichting voor medisch en thuiszorgpersoneel
 - Verlaging van de proceskosten door automatisering en snel hergebruik

Pagina 8

Lippe 120/140



- **Hoogteverstelling:**
29 - 74 cm
- **Veilige werklust: 250 kg**
- **Comfortabel alternatief bed voor zware cliënten:**
 - Zeer groot ligvlak tot 140 x 220 cm
 - Cliëntgewicht tot boven 200 kg mogelijk
 - Zuinig en veilig 24-volt aandrijfsysteem

Pagina 10

Relax



- **Zijhoogte:**
45 cm
- **Afmetingen: van 90 x 200 cm tot 140 x 220 cm**
- **De elegante bedombouw:**
 - Geschikt voor de meeste Lippe-modellen
 - Keuze uit elektrische motorframes
 - 4 huiselijke houtdessins

Pagina 12



Lippe IV

Meer comfort en ondersteuning


De Lippe IV biedt een bijzonder grote keuze aan **verschillende maten** en past in bijna elk bestaand bedframe. Breedtes van 80, 90 of 100 cm en lengtes van 190 of 200 cm zorgen voor flexibiliteit. Het grote **hoogte-verstelbereik** van een lage 29 cm tot 74 cm helpt om moeiteloos op te staan en maakt voor de mantelzorgers ergonomisch werken mogelijk zonder hun rug te belasten.

Sterke voordelen

- Veilige werklust 200 kg
- 4-delig ligvlak met latten van verend hout voor een rustgevende slaap en meer comfort bij het lezen of tv kijken
- Selectief blokkeerbare handschakelaar voor eenvoudige bediening
- 5 beugelgrepen houden de matras in positie
- De beugelgrepen kunnen naar buiten toe worden verplaatst, zodat 10 cm bredere matrassen kunnen worden gebruikt



Buitenafmetingen/hoogteverstelling (voor ligvlakafmetingen 90 x 200 cm):

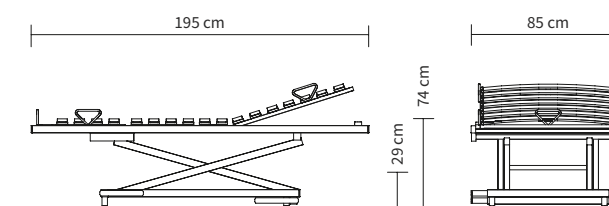

Producteigenschappen:



▲ 5 beugelgrepen houden de matras stevig op zijn plaats.




▲ Standaard standvoeten met vloerstelschroeven zorgen voor een stevige stand.

▼ De selectief blokkeerbare handschakelaar biedt een hoog bedieningsgemak met de grootst mogelijke veiligheid.



VEILIG THUIS LEVEN

24-volt-systeem

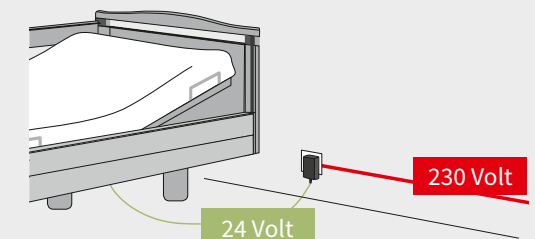

Alle modellen van de Lippe-serie hebben een modern 24 Volt-aandrijfsysteem. Profiteer van deze voordelen:

- Veilige laagspanning vanaf de transformator in het stopcontact
- Geen 230 Volt-componenten aan het bed
- Geen lekstroommeting na installatie en gedurende de verwachte levensduur van het bed
- Voor elk bed is een testcertificaat voor download beschikbaar

VEILIG THUIS LEVEN

Energiebesparing



* in vergelijking met 230 Volt-systemen bij ca. 5 aanpassingen per dag

De afstand van de matrasbeugel kan 10 cm verbreed worden. De beugels kunnen worden gedemonteerd.

Een 5de matrasbeugelgreep aan het voeten-einde geeft de matras extra houvast.

Onderbeensteun blijft bij afstelling van de bovenbeensteun horizontaal. Hij kan met behulp van een Rastomat naar beneden worden gezet.

Het veilige 24 Volt-aandrijfsysteem vereist geen lekstroombetaling binnen de te verwachten gebruiksduur van de Lippe IV.

Het 4-delige, elektrisch verstelbare ligvlak kan een veilige werklust van 200 kg dragen.

Hulzen voor de bevestiging van de bedgalg en een leeslamp zijn aan beide zijden beschikbaar.

De handschakelaar met selectieve blokkeerfunctie maakt een veilige en intuïtieve bediening mogelijk.

De elektronische schakelende Switch-Mode-voedingseenheid kan eenvoudig in een aansluiting worden gestoken.

4 standvoeten met vloerstelschroeven en bevestigingsverbinding zorgen voor een stevige stand van het bedinzetstuk.

Lippe IV

De voordelen op een rijtje




De hygiënische voordelen van de machinale bedvoorbereiding zijn overtuigend: het biedt een optimale, **valideerbare bescherming** tegen multiresistente ziekteverwekkers. Ook voor de gebruikers van thuiszorgbedden is het een voordeel, omdat in het forfaitaire tariefsysteem verschillende medewerkers, bewoners en verzorgers snel wisselend met de bedden in contact komen.

Ons model Lippe IV wasbaar is ontworpen voor de reiniging in wasinstallaties en verhoogt de bescherming voor alle betrokkenen aanzienlijk. Tegelijkertijd spaart het wegvallen van de omslachtige handmatige reiniging **tijd en middelen** en voorkomt dat de bedinzetstukken onbenut zijn.

Sterke voordelen

- Hoge beschermingsgraad IPX6 voor machinale reiniging
- Kathodische dompelcoating (KTL) beschermt tegen corrosie
- Resterende vloeistof stroomt weg door gaten
- Voorbereiding op vervoer en opslag zonder demontage van het aandrijfsysteem
- Veilige werklust 200 kg
- Ligvlakafmetingen 90 x 190 cm en 90 x 200 cm selecteerbaar, elk met 10 cm door middel van instelbare beugelgrepen te verbreden
- Verlaging van de gebruikskosten door automatisering en snel hergebruik

Buitenafmetingen/hoogteverstelling
(bij ligvlakafmetingen 90 x 200 cm):

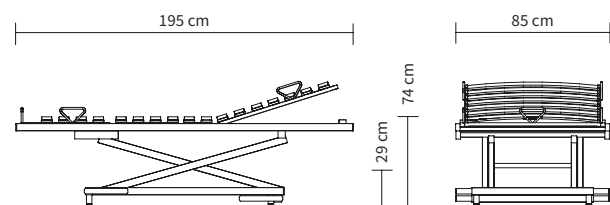

Producteigenschappen:



Lippe IV wasbaar

Het bedinzetstuk voor optimale hygiëne




Lippe 120/140

Veel ruimte en comfort in elke levensfase

De overgang naar een traditioneel verpleegbed is voor sommige mensen ook lastig omdat er daardoor ook vaak minder plaats is. Wie tientallen jaren in een tweepersoonsbed of een breed futonbed heeft geslapen, kan zich opgesloten voelen in een eenpersoonsbed. De Lippe 120/140 lost dit probleem op. Met een ligvlakbreedte van **120 of 140 cm** biedt hij zoveel ruimte, dat de patiënt onbeperkt kan genieten van de kwaliteit van leven waaraan hij of zij is gewend. Tegelijkertijd past dit model in veel bredere bedombouwen.

De Lippe 120/140 is ook een huiselijk **alternatief voor een bed voor zware cliënten**. Met zijn zeer veilige werkbelasting van 250 kg kan het, afhankelijk van de gebruikte matras en toebehoren, een bewoner met een lichaamsgewicht van meer dan 200 kg dragen. De optioneel verkrijgbare bedverlenging van 20 cm biedt ook aan grote personen de nodige ruimte.

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik
(Bij ligvlakmatten 120 x 200 cm en 140 x 200 cm):

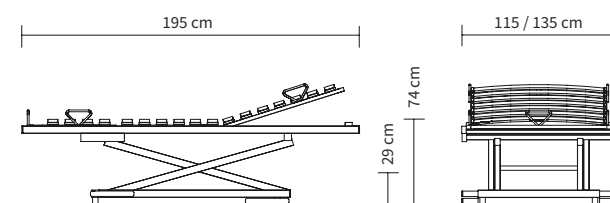

Producteigenschappen:



Sterke voordelen

- Groot hoogteverstelbereik van 29 tot 74 cm voor valpreventie en ergonomische verzorging
- De metalen latten van het ligvlak kunnen gemakkelijk en grondig worden gereinigd en zijn geschikt voor hoge gewichten tot 250 kg
- Vloerstelschroeven voor een vaste stand
- Zuinig en veilig 24-volt aandrijfsysteem



▲ De brede modellen Lippe 120 en 140 kunnen ook worden gecombineerd met onze Relax-bedombouw.



▲ De kogelgelagerde hoogteverstelling werkt veilig, zacht en stil.



▲ Standaard vloerstelschroeven en bevestigingsverbindingen zorgen voor een veilige stand.



▲ De schakelende voeding is eenvoudig met het bedinzetstuk te verbinden via een aansluiting.



Relax

De combineerbare huiselijke bedombouw

De bedinzetstukken uit de Lippe-serie kunnen met veel bestaande bedden worden gecombineerd - maar soms is een nieuwe bedombouw de betere keuze voor meer comfort. Dit geldt in het bijzonder voor onze Relax met zijn **huiselijke houtlook**. Het past perfect bij de meeste Lippe-modellen. Ook de maximale grootte van 140 x 220 cm is verkrijgbaar, zodat niets maximaal comfort in de weg staat.

De Relax is ook geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een **tweepersoonsbed met technische ondersteuning**. Twee bedombouwen kunnen worden gecombineerd tot één tweepersoonsbed. Elke partner kan daarbij een ligvlak kiezen dat aan zijn behoeften voldoet. Naast de Lippe serie biedt Burmeier ook een elektrisch verstelbaar motorframe in de afmetingen 90 x 200 cm en 100 x 200 cm. Dit frame staat niet op de vloer, maar is gemakkelijk te bevestigen aan bestaande bevestigingspunten in de Relax. Als de gebruiker de poten van de Lippe wil verbergen, kan hij optionele zijpanelen tot op de vloer gebruiken.

Sterke voordelen

- Zijhoogte van 45 cm (zonder matras) voor comfortabel in- en uit bed stappen
- Grepen aan de hoofdeinden geven de bewoners ondersteuning bij het zitten op het bed of staan in de kamer
- Optionele houten afdekking overbrugt de middenspleet van een tweepersoonsbed

Aantrekkelijke
houtdessins
voor elke
woonstijl



▲ Het optionele, elektrisch verstelbare motorframe zorgt voor een groot ligcomfort.



▲ Relax-bedombouwen kunnen tot een tweepersoonsbed worden gecombineerd, daarbij kan de middenspleet door een optionele houten afdekking worden overbrugd.



De Relax-bedombouw kan door aantrekkelijke houtcombinaties aan elke omgeving worden aangepast. De frames van de hoofd- en voeteneinden zijn altijd van massief beukenhout vervaardigd. Voor de bedzijden en hoofd en voeteneinde-opvullingen staan **4 huiselijke houtdessins** ter beschikking. Naturel beuken past precies

bij het frame. Esdoorn is iets helderder en meer grijsachtig – een dessin met een discrete elegantie. De houttint kersenhout Havana straalt een rustig, zelfverzekerd karakter uit. En de donkere Bella Noce Schoko zet krachtige accenten.



▲ Naturel beuken

▲ Esdoorn

▲ Kersen Havanna

▲ Bella Noce Choco



Met CCS ontspannen leven



▲ Met één druk op de knop kan contact worden opgenomen met een zorgverlener. Het is ook mogelijk om de knoppen van foto's van familieleden te voorzien.



▲ De geadresseerde ontvangt het verzoek om terug te bellen via een app op zijn smartphone.



▲ In het portaal kunnen zorgverleners en sociale contactpersonen worden gekoppeld aan een veilige informatieketen.

De zorg voor hulpbehoevende mensen beperkt de slaapgewoonten van de mantelzorgers vaak extreem. Elke gang door het huis gaat gepaard met de onzekerheid of het goed gaat met moeder of vader. Ons CCS-communicatiesysteem biedt een veilige en innovatieve oplossing voor dit probleem.

De kern van het systeem is de **communicatiemodule** op het Lippe-bedinzetstuk. Met één druk op de knop op deze module kan de bewoner een terugbelverzoek sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verpleging. De geadresseerde ontvangt dit verzoek als bericht via een **smartphone-app**. Hij of zij kan onmiddellijk terugbellen - daarbij dient de communicatiemodule op het bed als handenvrij systeem. Naar keuze kan het verzoek ook worden doorgestuurd naar een andere zorgverlener. Want met de CCS kunt u een heel netwerk van contactpersonen opzetten. Het systeem wordt eenvoudig en veilig beheerd in een **internetportaal**.

Voor de bediening van het systeem is slechts één mobiele verbinding nodig. Een simkaart is al geïntegreerd en klaar voor gebruik. Zelfs als de bewoner niet langer in staat is om zelfstandig contact te maken, beschermt het CCS hem. Het geïntegreerde **out-of-bed-systeem** meldt de verantwoordelijke persoon wanneer de hulpbehoevende opstaat en niet meer naar bed terugkeert.



VEILIG THUIS LEVEN

Care Communication System

- 3 componenten voor een veilige communicatie: Module aan het bed, smartphone-app, internetportaal voor beheer
- Out-of-bed-systeem met selecteerbare responstijden inbegrepen in het pakket
- Persoonlijke gegevens die door encryptie worden beschermd, de actuele voorschriften inzake gegevensbescherming zijn van toepassing



De Sola-leeslamp geeft een aangenaam licht zonder sterke warmteontwikkeling. Hij kan worden bevestigd aan de bedgalg of in de bevestigingshuls.

Toebehoren

voor meer levensvreugde en veiligheid in het dagelijks leven

Met het bijpassende originele toebehoren van Burmeier kan het comfortabele en gezondheidsbevorderende effect van de Lippe-bedinzetstukken nog verder worden vergroot. De bedgalg en het opstahulpje bevorderen de mobiliteit en verschillende zijhekken beschermen tegen vallen. Met behulp van de toebehoren kan de Lippe nog flexibeler worden aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt.



De opstahulp geeft veilig houvast bij het verlaten van het bed.



De aanpasbare poten maken het mogelijk om de bedombouw met 7 cm te verhogen - ideaal voor hogere bedombouwen.



▼ Met behulp van de 19-cm-handgreep kunnen ook hoge anti-decubitusmatrassen in de Lippe worden gelegd.





Met de verlengkabel van 2,40 m kunnen ook de handschakelaars van de Lippe IV en Lippe IV overal in de kamer worden gebruikt.



▲ De **sensorhouder** voor de handschakelaar bevindt zich met zijn flexibele statief altijd in de gewenste positie op de Lippe IV.

▼ Voor de Lippe 120/140 is een **bedverlenging** van 20 cm beschikbaar.

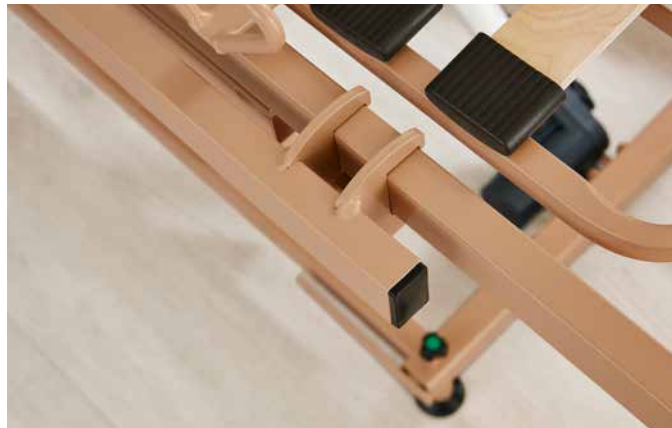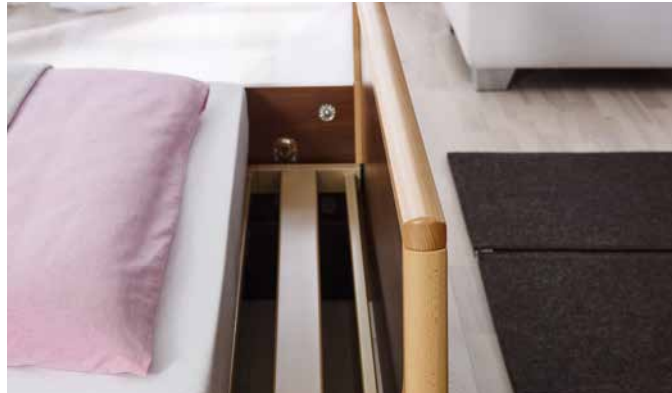

▲ Het ligvlak van de Lippe IV kan verbreed worden met de 5 cm brede **verbredingsrails** aan beide zijden.



▲ De **transport- en opslaghulp** voor de Lippe IV vergemakkelijkt met zijn wielen het transport . Bij de Lippe IV wasbaar wordt hij standaard meegeleverd.

▼ Het opzetbare **Lippe-zijhek** blijft stevig op zijn plaats zitten en schermt één zijde permanent af.



▲ Het **aanpasbare zijhek** voor de Lippe IV kan moeiteloos omhoog en omlaag worden gezet.

Vitrusting en opties

Modelvarianten	Lippe IV	Lippe IV wasbaar	Lippe 120/140	Relax
Ligvlakbreedtes	80/90/100 cm	90 cm	120/140 cm	90/100/120/140 cm
Ligvlaklengtes	190/200 cm	190/200 cm	200/220 cm	200/220 cm
Hoogteverstelling	29–74 cm	29–74 cm	29–74 cm	-
Veilige werklust	200 kg	200 kg	250 kg	-
2 bevestigingshulzen hoofdeinde	✓	✓	✓	O ³⁾
5. Matrasbeugelgreep voeteneinde	✓	✓	✓	O ³⁾
KTL-coating	-	✓	-	-
Poten met vloerstelschroeven en bevestigingsverbindingen	✓	✓	✓	-
Selectief blokkeerbare handschakelaar	✓	✓	✓	O ³⁾
Houder voor handschakelaar	O	O	-	O ¹⁾
Verlengkabel voor handschakelaar (240 cm)	O	O	-	O ¹⁾
Rastomat voor onderbeensteun	✓	✓	✓	O ³⁾
Ligvlak met latten van verend hout	✓	-	-	O ¹⁾
Metalen lamellen ligvlak	-	✓	✓	O ²⁾
Motorframe	-	-	-	O
Linak-24-volt aandrijfsysteem	✓	✓	✓	O ³⁾
Leeslamp Sola	O	O	O	O ³⁾
Bedgalg met triangelgreep	O	O	O	O ³⁾
Opstahulp	O	O	O	O ³⁾
Aanpasbaar zijhek	O	-	-	O ¹⁾
Lippe-zijhek	O	-	-	O ¹⁾
• Bedverlenging 20 cm	-	-	O	O ⁴⁾
Verbredingsrail 5 cm	O	-	-	O ¹⁾
Verhoogde matrasbeugelgrepen (ca. 19 cm)	O	O	O	O ³⁾
Opslag- en transporthulp	O	✓	-	-

✓ = Standaarduitrusting
O = Optioneel verkrijgbaar
- = Niet leverbaar

¹⁾ in combinatie met Lippe IV ²⁾ met Lippe-Wash en Lippe 120/140 ³⁾ met alle Lippe-bedinzetstukken
⁴⁾ Afmetingen 120 x 220 cm en 140 x 220 cm voor verlengde Lippe 120/140 beschikbaar

Bedbodem Lippe IV

Bestelnummer	Nominale afmetingen ligvlak	Daadwerkelijke ligvlakafmetingen	Speciale ligvlakmaten	Daadwerkelijke ligvlakafmetingen
30.9456.2	90 x 190 cm	85 x 185 cm		
30.9456.1	90 x 200 cm	85 x 195 cm		
30.9456.4	100 x 190 cm	95 x 185 cm		
30.9456.3	100 x 200 cm	95 x 195 cm		
30.9456.6			80 x 190 cm	75 x 185 cm
30.9456.5			80 x 200 cm	75 x 195 cm

Afmetingen en dessins Relax

	90 x 200 cm (ligvlakafmetingen) 100 x 209 cm (buitenafmetingen)	100 x 200 cm (ligvlakafmetingen) 110 x 209 cm (buitenafmetingen)	120 x 200 cm (ligvlakafmetingen) 130 x 209 cm (buitenafmetingen)	120 x 220 cm (ligvlakafmetingen) 130 x 229 cm (buitenafmetingen)	140 x 200 cm (ligvlakafmetingen) 150 x 209 cm (buitenafmetingen)	140 x 220 cm (ligvlakafmetingen) 150 x 229 cm (buitenafmetingen)
Bestelnummer Beukendessin	53.5311.92	53.5311.12	53.5311.22	53.5311.23	53.5311.42	53.5311.43
Bestelnummer Esdoorndessin	53.5184.92	53.5184.12	53.5184.22	53.5184.23	53.5184.42	53.5184.43
Bestelnummer Kersen Havana-dessin	53.5681.92	53.5681.12	53.5681.22	53.5681.23	53.5681.42	53.5681.43
Bestelnummer Bella Noce choco-dessin	53.4889.92	53.4889.12	53.4889.22	53.4889.23	53.4889.42	53.4889.43

Behouder van waarden Vormgever van de toekomst

STIEGELMEYERGROUP

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaardige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, is voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfort bedden

Projectmeubelen

Service



De Stiegmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1200 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken





Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270

32791 Lage (Duitsland)

Telefoon +49 (0) 5232 9841 - 0

Fax +49 (0) 5232 9841 - 41

info@burmeier.com

www.burmeier.com

Een bedrijf van de Stieglmeyer-groep

STIEGLMEYERGROUP

Hoofdkantoor / Headquarters

Duitsland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Telefoon +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

Frankrijk / France

Stieglmeyer SAS

Bâtiment B · 27 chemin des Peupliers

69572 Dardilly

Telefoon +33 (0) 4 7238 - 5336

Fax +33 (0) 4 7238 - 5481

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

Zuid-Afrika / South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Telefoon +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.burmeier.com

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Telefoon +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Telefoon +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Telefoon +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl



Vind uw plaatselijke partner op onze website:

Find your local partner at our website:

stieglmeyer.com/partner

burmeier.com