

Regia



Clinic | Care | **Homecare** | Assist

Das Pflegebett mit vielen Optionen



Erhältlich im
medizinischen Fachhandel



Regia –
das attraktive
**Bett für hohe
Ansprüche**



Inhalt



04 Das Bett für
hohe Ansprüche



05 Die teleskopierbare
Seitensicherung



06 Der große
Höhenverstellbereich



07 Komfort im Alltag



10 Zubehör



11 Technische Daten



Ein Bett für hohe individuelle Ansprüche

Ein Pflegebett mit viel **Komfort und Sicherheit**, das die Mobilisierung der Bewohner fördert, sehr gut aussieht und das Budget schont – so lässt sich das neue Regia beschreiben. Mit diesem Modell erhalten **Privatkunden** ein Bett für hohe individuelle Ansprüche zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Regia eignet sich auch für **anspruchsvolle Seniorenresidenzen**.

Als **Niedrigbett** mit einem Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm leistet das Regia einen wesentlichen Beitrag zur Sturzprophylaxe ohne freiheitsentziehende

Maßnahmen (FEM) und ermöglicht zugleich der Pflegekraft ein ergonomisch günstiges Arbeiten auf Hüfthöhe. Auch die geteilte teleskopierbare Seitensicherung fördert die Mobilität des Bewohners. Sie lässt bei Bedarf ausreichend Raum für einen bequemen Ein- und Ausstieg. So folgt Burmeier der Philosophie des Werdenföhrer Weges, auf FEM konsequent zu verzichten.

Das **elegante Design** des Bettes im Dekor Buche Natur trägt zu seiner hohen Wohnlichkeit bei. Weitere Dekore sind auf Anfrage lieferbar.

Die teleskopierbare Seitensicherung für mehr Schutz und Mobilität

Die geteilte **teleskopierbare Seitensicherung** (TSG) des Regia lässt sich mühelos in 2 Stufen nach oben ausziehen und passt sich den individuellen Schutzbedürfnissen der Bewohner in jeder Situation an. Wird nur die **kopfseitige Hälfte hochgezogen**, bleibt dem Pflegebedürftigen ausreichend Raum zum Ein- und Ausstieg (Bild 1). Das hilft dabei, seine Mobilität zu erhalten. Muss der Bewohner hingegen – besonders nachts – zuverlässig vor einem Herausrollen aus dem Bett geschützt werden, empfiehlt sich das **vollständige Anstellen** der Seitensicherung (Bild 2).

Auf der **1. Stufe** bietet die TSG dem Bewohner Schutz und Orientierung. Dabei bleibt sie optisch so dezent, dass der Blick ungehindert in den Raum oder aus dem Fenster in den Garten wandern kann (Bild 3). Auf Wunsch können die Elemente auch **diagonal angeordnet** werden, um das Gefühl von Halt und Sicherheit für den Pflegebedürftigen zu verstärken (Bild 4). Optional ist das Regia auch mit **durchgehenden Seitensicherungen** (DSG) für eine maximale Sturzprophylaxe erhältlich. Die DSG lässt sich auf Wunsch mit der TSG auf der anderen Bettseite kombinieren.




Immer auf der richtigen Höhe

Niedrigbetten leisten in der Pflege einen wichtigen Beitrag zur **Vermeidung von Sturzverletzungen**. Aus einer Position dicht über dem Boden besteht für den Bewohner nur ein geringes Risiko, selbst wenn die Seitensicherung nicht angestellt ist. Gemäß der Philosophie des **Werdenfeller Weges** lassen sich freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) dadurch einfach vermeiden.

Mit seinem sehr weiten **Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm** wird das Regia allen Anforderungen in der Pflege gerecht. Die tiefste Position ist sehr niedrig und bietet dem Bewohner im Bett optimalen Schutz

(Bild 1). Mit dem Handschalter lässt sich das Bett einfach und intuitiv verstellen. Dank seiner **3-Stopp-Funktion** hält es automatisch bei einer mittleren Position von ca. 40 cm – der idealen Höhe für einen **bequemen Ein- und Ausstieg** (Bild 2). In der oberen Position von 80 cm bietet das Regia der Pflegekraft die Möglichkeit, ergonomisch günstig **auf Hüfthöhe zu arbeiten**. Das spart Kraft und schont den Rücken (Bild 3).

Durch seine individuellen Verstellmöglichkeiten fördert das Regia Mobilität und Gesundheit und erleichtert allen Beteiligten den Alltag wesentlich.

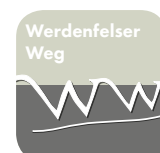

Komfortabel am Alltag teilnehmen

Viele pflegebedürftige Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Bett. Aus einer liegenden Position heraus ist es jedoch oft schwierig, am Alltagsgeschehen teilzunehmen.

Das Regia bietet durch seine **flexiblen Verstellmöglichkeiten** viele Optionen, um den Bewohnern wieder ein Leben auf Augenhöhe zu ermöglichen. Das Bett lässt sich mithilfe des Handschalters in eine **Fußtieflage von bis zu 15°** bringen. Kombiniert mit der bis zu **70° verstellbaren Rückenlehne** nimmt es dadurch eine komfortable Sitzposition ein. Pflegebedürftige Menschen können sich ohne An-

strengung aufrichten. Einem lebhaften Gespräch oder einem gemütlichen Fernsehabend steht nichts mehr im Weg. Auch das Essen ist in der sitzenden Position wesentlich einfacher. Für noch mehr Komfort empfiehlt sich die optionale **Liegeflächenbreite von 100 cm**.

Die elegant verkleideten Doppelaufrollen sorgen für eine **leichte Verfahrbarkeit**. Zugleich hat das Bett immer einen sicheren Stand – die Rollen lassen sich serienmäßig **paarweise** mit dem Fuß **bremsen**. Optional ist auch eine **zentrale Rollenfeststellung** erhältlich.



Wieder mit
Lebensfreude
am Alltag
teilnehmen





Ausstattungen und Optionen

Ausführung	Regia
Liegefläche 90 x 200 cm	●
Liegefläche 100 x 200 cm (nur in Verbindung mit Rundstollen und Dekor Buche Natur)	○
Metall-Liegefläche	●
Komfort-Liegefläche	○
2 x 2-Rollenfeststellung	●
4-Rollen-Zentralfeststellung	○
DewertOkin 24 Volt	●
Kopf- und Fußteil Standard	●
Kopf- und Fußteil Comodo mit Rundstollen	○
Kopf- und Fußteil Prinzino	○
Kopf- und Fußteil Primus (kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste) ¹⁾	○
Dekor Buche Natur	●
Dekore Königsahorn, Kirsche Edel, Kirsche Havanna	○
Aufrichter	○
teleskopierbare Seitensicherungen (TSG) beidseitig	●
durchgehende Seitensicherung (DSG) beidseitig oder mit TSG kombiniert (Kombination nur bei 200 cm Länge)	○
Kojenbrett (200 oder 227 cm) (nur mit TSG)	○
Unterbettbeleuchtung	○
Notabsenkung Batterie	●
mechanische Notabsenkung der Rückenlehne	○
Schaumlederbezug	○
Leseleuchte	○
Trendelenburg-Handschalter (nur für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen)	○
Bettverlängerung 27 cm (TSG), 20 cm (DSG), Polsterteile zur Matratzenverlängerung lieferbar	○
Bettzeugablage	○
Wandabweisrollen (2 Stück/4 Stück wahlweise)	○
Infusionshülse fußseitig	○
Außenmaße 90 x 200 cm	100 x 210 cm
Außenmaße 100 x 200 cm	110 x 211 cm
Bestellnummer	50.2025.12

¹⁾ fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low (nur mit TSG)

● = Standard ○ = optional

Zubehör

Mit einer großen Auswahl an Zubehör können die Kunden das Regia in ihr individuelles Wunschbett verwandeln. So benötigen großgewachsene Bewohner mehr Platz. Für das Regia ist daher je nach Seitensicherung eine **Bettverlängerung** um 27 cm (TSG, Bild 1) oder 20 cm (DSG) lieferbar. Zur Verlängerung der Matratzen stehen passende **Polster** zur Verfügung.

Um den Bewohner vor Stoßverletzungen zu schützen und bei Bedarf den Raum zwischen den Holmen zu schließen, lässt sich die teleskopierbare Seitensicherung mit **Schaumlederbezügen** verkleiden (Bild 2). Die **Bettzeugablage** ist beim Beziehen des Bettes besonders praktisch (Bild 3). Vertikal und horizontal wirkende **Wandabweisrollen** schützen die Zimmereinrichtung und das Bett vor Kollisionen beim Verfahren und der Höhenverstellung (Bild 4).

In der Dunkelheit gibt die **Unterbettbeleuchtung** sichere Orientierung (Bild 5). Sie ist blendfrei und wird mit dem Handschalter aktiviert. Die **Komfortliegefläche** sorgt mit 50 freischwingenden Elementen für punktgenauen Liegekomfort, den man nicht mehr vermissen möchte (Bild 6). Sie ist auch nachträglich montierbar.

Steht das Regia längsseitig an einer Zimmerwand, bietet sich an dieser Seite ein **Kojenbrett** anstelle der Seitensicherung an (Bild 7). Das Kojenbrett sorgt für eine besonders wohnliche und gemütliche Atmosphäre und gibt dem Bewohner Orientierung. Zugleich ist das Bett in dieser Ausstattung noch kostengünstiger und schont das Budget der Nutzer oder Betreiber.

Standardausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit leicht zu reinigenden, robusten Metall-Lamellen, Liegehöhenverstellung von 26 – 80 cm, alle Liegeflächenelemente durch Elektromotoren verstellbar, Fußtieflage bis 15° mit automatischer Einstellung der Autokontur zur Stabilisierung der Position des Bewohners
- Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung

- Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar
- vertikal teleskopierbare geteilte Seitensicherungen beidseitig
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Kopf- und Fußteil Standard im Dekor Buche Natur
- dezente Rollenverkleidung in eckiger Form



niedrigste Stellung der Liegefläche: 26 cm



höchste Stellung der Liegefläche: 80 cm



Orthopädische Lagerung: Unterschenkellehne um 21 cm anhebbar



Fowler-Position



Fußtieflage bis zu 15°



Trendelenburg-Position bis zu 15° (nur für Pflegeeinrichtungen)



Standard



Comodo mit Rundstollen



Prinzino mit Griffleiste



Primus kopfseitig geschlossen, fußseitig mit Griffleiste

Finland / Suomi

Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
E-Mail stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
finland.stieglmeyer.com

Netherlands / Nederland

Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
E-Mail info@stiegelmeyer.nl
netherlands.stieglmeyer.com

Poland / Polska

Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno, Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
E-Mail info.stolno@stiegelmeyer.pl
poland.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS
Bâtiment B
27 chemin des Peupliers
69572 Dardilly
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
E-Mail contact@stiegelmeyer.fr
france.stieglmeyer.com

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries, Century City, Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
E-Mail info.southafrica@stiegelmeyer.com
south-africa.stieglmeyer.com

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage, Germany
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail info@burmeier.com
www.burmeier.com