



Dali-Serie



Die Betten für eine neue
Lebensqualität in der häuslichen Pflege

Pflege mit Herz, Sicherheit und Komfort – zuhause gut aufgehoben

Ein Pflegebett ist mehr als nur ein Möbelstück – es ist ein Ort der Sicherheit, des Wohlbefindens und der Nähe.

Mit den Betten der Dali-Serie von Burmeier gestalten Sie Pflege zu Hause so angenehm wie möglich: für die Person, die Unterstützung braucht, und für alle, die sich kümmern.

Jedes Dali-Bett verbindet Komfort, Sicherheit und leichte Bedienung mit einem wohnlichen Design, das sich harmonisch in den Alltag einfügt. Ob Sie selbst pflegen oder gepflegt werden – das Dali unterstützt Sie in jeder Situation: beim Aufstehen, Ruhen oder Schlafen.

So bleibt das Wichtigste erhalten: Selbstständigkeit, Würde und Lebensqualität – Tag für Tag.



Inhalt

- 4 Dali
- 7 Dali wash
- 9 Dali low-entry
- 10 Easy-Click-System
- 12 Kabelloser Handschalter
- 14 24-Volt-Antriebssystem
- 15 Matratzen
- 16 Softcover
- 17 Praktisches Zubehör
- 21 Ausstattung und Optionen
- 22 Der Weg zum Pflegebett

Dali



- **Höhenverstellung:** 40-80 cm
- **Wirtschaftlich, wohnlich und sicher:**
 - sekundenschnelle Montage der Seitensicherungen mit Easy Click
 - kabelloser oder kabelgebundener Handschalter
 - wohnliche Holzhauben optional

Seite 4

Dali

1 m breite Liegefläche



- **Höhenverstellung:** 40-80 cm
- **Mehr Komfort in der Pflege zuhause:**
 - 100 cm breite Liegefläche gibt dem Bewohner mehr Freiraum
 - kabelgebundener Handschalter

Seite 6

Dali wash



- **Höhenverstellung:** 40-80 cm
- **Maschinell waschbar für ideale Hygiene:**
 - KTL-Beschichtung schützt vor Korrosion
 - Schutz und Entlastung für Sanitätshauspersonal und die häusliche Pflege

Seite 7

Dali low-entry



- **Höhenverstellung:** 23-63 cm
- **Niedrigbett zur Sturzprophylaxe:**
 - niedrige Einstiegs- und Liegehöhe von nur 23 cm schützt vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen
 - Seitensicherungen mit Easy Click
 - kabelgebundener Handschalter

Seite 9



Liegeflächen-
breite:
90 cm
100 cm



Dali

Der Klassiker für Sicherheit und Komfort zuhause


Der Klassiker für Sicherheit und Komfort zuhause

Das Dali ist Deutschlands meistverkauftes Pflegebett – und das aus gutem Grund. Es vereint Komfort, Stabilität und einfache Bedienung in einem modernen, wohnlichen Design. Mit der mitgelieferten **Fernbedienung** stellen Sie bequem alle Positionen ein – ob zum Lesen, Ruhen oder Essen. Die **durchgehende Seitensicherung** schützt zuverlässig und lässt sich mit dem **Easy-Click-System** im Handumdrehen anbringen oder entfernen.

Pflegende Angehörige und Fachkräfte profitieren von der einfachen Sicherheit, wenn sie gebraucht wird und schneller Verfügbarkeit. So schafft das Dali jeden Tag mehr Lebensqualität – für die gepflegte Person ebenso wie für alle, die sich kümmern.

Dali
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

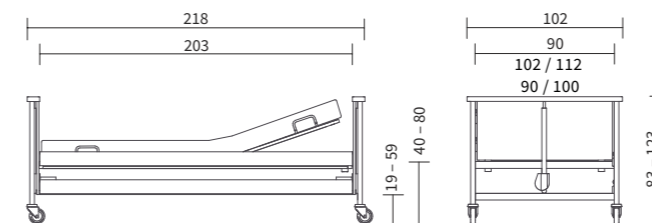

Produktbesonderheiten:



◀ Mit dem kabellosen Handschalter können Bewohner und Pflegendes das Bett mühelos bedienen.

▲ Die bequeme Sitzposition erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten.

▼ Die Bremsen lassen sich auch mit Hausschuhen angenehm bedienen.

▼ Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit einem Handgriff werkzeuglos anbringen und abnehmen.



▲ Auf Wunsch lässt sich am Dali eine digitale Umfeldsteuerung mitsamt Halterung installieren.



Dali (100 x 200cm)
 Hilfsmittel-Nr.
 19.40.01.3050
 Pflege-Hilfsmittel-Nr.
 50.45.01.1089

Dali

Mit komfortabler 100 cm breiter Liegefläche



Dali wash
 Hilfsmittel-Nr.
 19.40.01.3041
 Pflege-Hilfsmittel-Nr.
 50.45.01.1080

Dali wash

Das Hygienebett für höchste Sauberkeit

Das Plus für mehr Wohlbefinden

Wer sich im Bett gerne bewegt oder einfach etwas mehr Platz wünscht, findet beim Dali die ideale Lösung.


Mit der optionalen **100 cm breiten Liegefläche** bietet es spürbar mehr Freiraum, ohne auf die bewährte Stabilität und Sicherheit der Dali-Serie zu verzichten.

Pflegende können dank der einfachen Bedienung rückschonend arbeiten – und Angehörige wissen ihre Liebsten gut aufgehoben.

Starke Vorteile

- sichere Arbeitslast 185 kg
- durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System
- 100 cm breite Liegefläche
- Fußtieflage inklusive

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

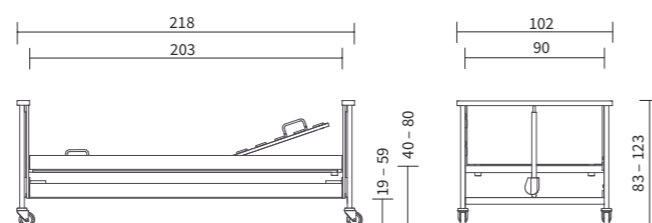

Produktbesonderheiten:



Hygiene leicht gemacht – sicher und zeitsparend

Das Dali wash wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen perfekte Hygiene unverzichtbar ist – ob in der häuslichen Pflege oder beim Wiedereinsatz durch Sanitätshäuser. Das Bett ist maschinell waschbar und dank seiner hochwertigen **KTL-Beschichtung** optimal vor Korrosion geschützt.

Für Pflegende bedeutet das: weniger Aufwand, geringere Infektionsrisiken und ein schneller, hygienisch einwandfreier Wiedereinsatz. Bewohner genießen dabei den vollen Komfort der Dali-Serie – mit bequemer Liegefläche, kabelloser Bedienung und sicherer Seitensicherung.



„Ideal, wenn Hygiene höchste Priorität hat.“

„Für mehr Sicherheit, Bewegungsfreiheit und ruhige Nächte – Tag für Tag.“

Einstiegs-
höhe von nur
23 cm
zur Sturz-
prophylaxe

Dali low-entry

Das Niedrigbett für maximale Sicherheit


Schützt zuverlässig – ohne einzuschränken

Das Dali low-entry ist die beste Wahl für Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko oder kleiner Körpergröße. Mit einer besonders niedrigen **Einstiegs-
höhe von nur 23 cm** senkt es die Verletzungsgefahr deutlich – ganz ohne freiheitsentziehende Maßnahmen.

Senioren und Seniorinnen können sicher ein- und aussteigen, Angehörige wissen ihre Liebsten geschützt, und Pflegekräfte profitieren von ergonomischer Arbeitshöhe bis 63 cm.

Trotz seiner kompakten Bauweise bietet das Dali low-entry alle Vorteile der Dali-Serie – **komfortable Liegeflächenverstellung, langlebige Materialien und zeitloses Design.**

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

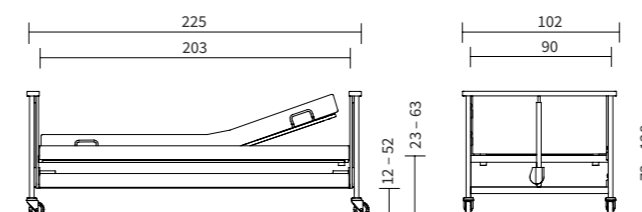

▲ Die niedrige Höhe reduziert das Risiko von Sturzverletzungen.

Dali low-entry
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.5001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.5003



Erleichtert den Pflegealltag und sorgt für eine schnelle, sichere Handhabung



Vorteile von Easy Click

- Werkzeuglos montierbar
- Seitensicherungen stören nicht beim Transfer und der Mobilisierung an der Bettkante

◀ Die durchgehende Seitensicherung bietet optimalen Schutz.

Das Easy-Click-System

Schnell montiert – sicher fixiert

Ein Klick für mehr Sicherheit und Freiheit

Das Easy-Click-System macht die Handhabung Ihres Dali-Pflegebetts besonders leicht. Die Seitensicherungen können mit einem Handgriff angebracht oder entfernt werden – **stabil, sicher und völlig werkzeuglos.**

So bleibt die Pflege flexibel: Schutz, wenn er gebraucht wird, und mehr Bewegungsfreiheit, wenn nicht.

Angehörige können die Holme einfach selbst einrasten, Pflegekräfte sparen wertvolle Zeit – und die Bewohner fühlen sich jederzeit sicher und gut aufgehoben.

Das System ist so konstruiert, dass sich die Seitensicherung nur gezielt lösen lässt – unbeabsichtigtes Entfernen ist ausgeschlossen. Sicherheit, Komfort und Würde – vereint in einem Klick.

„So einfach war Pflege noch nie: Mit dem Easy-Click-System bringen Sie die Seitensicherung in Sekunden an – ganz ohne Werkzeug.“

Alle Dali-Betten sind ab Werk mit vormontierten Halterungen ausgestattet. Die **Seitensicherungsholme** werden einfach eingeklickt und rasten hörbar ein. Diese Konstruktion gewährleistet maximale Stabilität – auch bei häufigem Auf- und Abbau. Der Pflegealltag wird dadurch einfacher, sicherer und effizienter.

Dank der vormontierten Aufnahmen bleibt das Bett auch ohne Seitensicherung optisch aufgeräumt. Pflegekräfte und Techniker sparen wertvolle Zeit, Angehörige gewinnen Sicherheit.

Ein Klick genügt – und das Dali ist bereit für den nächsten Einsatz.

Technische Vorteile auf einen Blick

- vormontierte Aufnahmen im Kopf- und Fußteil
- werkzeuglose Montage in Sekunden
- geprüfte Stabilität für höchste Sicherheit



▲ Der Aufnahmemechanismus für die Seitensicherung ist bereits vorinstalliert. Das spart viel Zeit beim Aufbau. Ohne Seitensicherung verbleiben die Aufnahmen unauffällig in unterster Position am Bett.




▲ Bei diagonaler Anstellung geben die Holme dem Pflegebedürftigen eine gute räumliche Orientierung.



Der kabellose Handschalter

Frei bewegen, sicher bedienen

Produktbesonderheiten:

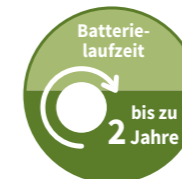

▲ Die handelsübliche Batterie lässt sich in wenigen Sekunden auswechseln.



▲ Die Verstellfunktionen des Bettes können mithilfe eines Magneten einzeln gesperrt und entsperrt werden.

Mit dem kabellosen Handschalter steuern Sie Ihr Dali-Pflegebett ganz bequem – **ohne Kabel, ohne Stolperfallen und ohne fremde Hilfe.**

Ob Sie die Rückenlehne anheben, die Liegefläche absenken oder eine bequeme Sitzposition wählen möchten:

Ein Knopfdruck genügt.

Der Handschalter liegt angenehm in der Hand und kann einfach an der Seitensicherung eingehängt werden. So bleibt er immer dort, wo Sie ihn brauchen.

Die klaren Symbole sind gut lesbar und leicht zu verstehen – ideal für alle, die Wert auf Sicherheit und Unabhängigkeit legen.

Starke Vorteile

- **Einfach & sicher:** Intuitive Bedienung ohne Kabel
- **Immer griffbereit:** Frei positionierbar im Zimmer
- **Mehr Selbstständigkeit:** Komfort auf Knopfdruck

„Mehr Bewegungsfreiheit, weniger Aufwand – und das gute Gefühl, jederzeit alles selbst im Griff zu haben.“

Smarte Technik für mehr Komfort im Pflegealltag

Der kabellose Handschalter verbindet sich **per Bluetooth** sicher mit dem Dali-Pflegebett. Alle Funktionen können klar erkennbar und gezielt angesteuert werden.

Die **robuste Konstruktion** ist hygienisch, leicht zu reinigen und für den täglichen Einsatz konzipiert.

Ob im Pflegealltag oder zuhause – dieser Handschalter bietet **maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand.**

Ein fälliger Batterie-wechsel wird rechtzeitig per Lichtsignal angezeigt.



Handschalter mit Kabel

Maßgeschneiderte Betten für Ihre Anforderungen sind unser Ziel. Daher bieten wir für das Dali auch einen kabelgebundenen Handschalter als Option an. Beim Dali low-entry und beim Dali 100 ist der kabelgebundene Handschalter Standard, das Dali wash ist hingegen nur mit dem hygienischen kabellosen Handschalter lieferbar.





Der Spannungswandler SwitchMode stellt direkt an der Steckdose eine Schutzkleinspannung von 24 Volt her.

Jährlicher Stromverbrauch nur 4,5 kWh*



*Bei einer Belastung von 100 kg sowie 3 Höhenverstellungen der Liegefläche und 5 Anstellungen der Rückenlehne auf 45° pro Tag.

24-Volt-Antriebssystem

Sicher, sparsam und zuverlässig

Sicher und nachhaltig


Das 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier erfüllt **höchste Sicherheits- und Effizienzstandards**.

Alle 230-Volt-Komponenten befinden sich außerhalb des Bettes; ab dem Netzteil liegt eine Schutzkleinspannung von **24 Volt** an.

Damit entfällt die regelmäßige Ableitstrommessung über die gesamte Nutzungsdauer – ein klarer Vorteil in puncto Zeit und Kosten.

Zertifiziert durch den TÜV Rheinland und mit Prüfnachweis für jedes Bett.

Starke Vorteile

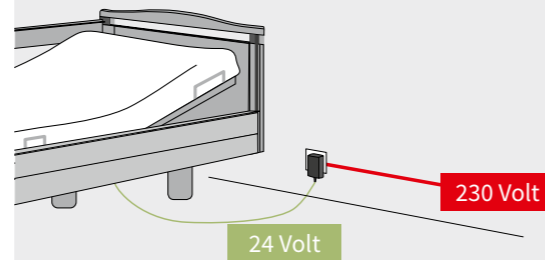

- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- keine Ableitstrommessung nach Aufbau und über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus
- für jedes Bett steht ein Prüfnachweis zum Download zur Verfügung



Erhältlich für Liegeflächenmaße:

Sky-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Basic-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm
90 x 220 cm

Matratzen

Komfortabel, sicher und pflegeleicht

Ein guter Schlaf ist entscheidend für Wohlbefinden und Gesundheit – besonders in der Pflege

Die Matratzen der Dali-Serie sind perfekt auf die Liegefläche abgestimmt und unterstützen jede Bewegung sanft und gleichmäßig. Weiche Materialien entlasten den Körper spürbar und helfen, Druckstellen zu vermeiden. Ob beim Lesen, Ruhen oder Schlafen – Sie liegen immer bequem und sicher. Mit den Modellen Sky-fit, Comfort-fit und Basic-fit finden Sie die passende Lösung für jedes Bedürfnis: von besonders anschmiegsam bis praktisch und solide.



▲ Modell Sky-fit mit hochwertiger Skytherm®-Auflage.

Sky-fit – das Premium-Modell

- hochwertige 2-Schicht-Matratze mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- Randzonenverstärkung verhindert das Einsinken beim Transfer über die Bettseite
- abnehmbarer Wendebegzug, eine Seite Inkontinenzschutzbezug (PU), andere Seite flauschiger Comfortbezug, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



▲ Modell Comfort-fit mit Randzonenverstärkung.

Comfort-fit – die Mittelklasse

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm)
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- Randzonenverstärkung verhindert das Einsinken beim Transfer über die Bettkante
- abnehmbarer Wendebegzug, eine Seite Inkontinenzschutzbezug (PU), andere Seite flauschiger Comfortbezug, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



▲ Modell Basic-fit.

Basic-fit – das Einsteigermodell

- Einschichtmatratze aus angenehmem Polyurethan (12 cm)
- weißer abnehmbarer PU-Begzug, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 4,5 kPa, Raumgewicht 40 kg/m³



Softcover

Hygienisch, robust und einfach zu handhaben



Ihr Pflegebett, so wohnlich wie Ihr Zuhause

Ein Pflegebett darf schön sein. Mit den Softcovern von Burmeier verwandeln Sie Ihr Dali-Bett in ein Möbelstück, das perfekt in Ihr Zuhause passt.

Die weichen Stoffhüllen in warmen Farben verleihen dem Bett eine behagliche, persönliche Note – ganz ohne komplizierte Montage. Wählen Sie Ihren Lieblingston, ob sanftes Vanilla, elegantes Bordeaux oder frisches Petrol. Die Bezüge lassen sich leicht abnehmen und in der Waschmaschine reinigen.

Die Softcover für die Dali-Serie bestehen aus hochwertigen, pflegeleichten Stoffen und sind nach dem Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert. **Sie lassen sich mühelos an Kopf- und Fußteilen sowie an der Seitensicherung anbringen – ganz ohne Werkzeug.**

Die Stoffe sind waschbar, strapazierfähig und langlebig, ideal für die häusliche Pflege und häufige Nutzung. Die Softcover schützen das Holzdekor des Bettes und verbessern zugleich die Akustik und Raumwirkung.



Mehr Komfort, mehr Selbstständigkeit, mehr Alltag

Mehr wohnlicher Komfort mit der Holzhaube.



Die Häupter des Dali und des Dali low-entry lassen sich mit **Holzhauben** verkleiden. Diese hochwertigen Designelemente verbergen die Antriebstechnik des Bettes und sorgen für eine noch wohnlichere und privateren Optik.



Die **Leselampe** sorgt für angenehmes Licht.

Praktisches Zubehör

Kleine Helfer, große Wirkung

Funktionale Details, die den Pflegealltag erleichtern

Das Original-Zubehör von Burmeier ergänzt die Dali-Serie perfekt – für mehr Komfort und Sicherheit in der häuslichen Pflege. Alle Elemente sind passgenau, langlebig und lassen sich mühelos montieren.

Seitensicherungserhöhungen bieten zusätzlichen Schutz, **Füllpolster und Schaumlederbezüge** verhindern Druckstellen und sorgen für Sicherheit beim Ein- und Aussteigen.

Bettverlängerungen schaffen Platz für große Personen, während Wandabweisrollen Möbel und Wände schützen. Auch **Rastomaten** und **Nachttische** unterstützen eine komfortable, sichere Pflegeumgebung.



Die **Bettverlängerung** bietet großen Menschen den benötigten Platz. Sie lässt sich auch nachträglich montieren. In Verbindung mit der Bettverlängerung sind entsprechende Seitensicherungsholme in 220 cm erhältlich.



Dezent und flexibel: die ausziehbare **Erhöhung der Seitensicherung**.



▲ **Nachttische** von Burmeier bieten viel Stauraum und praktische Flächen für Utensilien und Getränke. Hier im Bild das Modell Cherusker mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Betttisch.

▼ Der **Bettisch Duo** eignet sich ideal als Abstellfläche und bequemes Lesepult.



▲ Mit seinem großen Verstellbereich passt sich der **Server Pleto** allen Anforderungen mühelos an.



◀ Die **Aufstehhilfe** unterstützt den Bewohner dabei, das Bett selbstständig und mühelos zu verlassen.



▲ Mithilfe des optionalen **Rastomaten** lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



▲ Das **Serviertablett** wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



▲ **Wandabweisrollen** schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



▲ Das **Füllpolster** lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



▲ Weiche **Schaumlederbezüge** schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



▲ Die **adaptierbare Seitensicherung** für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



▲ Die wohliche **Holzhaube** für das Dali und das Dali 100 bringt mehr Komfort in das Schlafzimmer.



Die Dali-Serie – für erholsamen Schlaf und neue Lebensqualität

Ausstattungen und Optionen

Alle Angaben sind Circa-Maße.

Modellbezeichnung	Dali	Dali (100 x 200 cm)	Dali wash	Dali low-entry
Liegefläche	90 × 200 cm, 4-geteilt	100 × 200 cm, 4-geteilt	90 × 200 cm, 4-geteilt	90 × 200 cm, 4-geteilt
Außenmaße	102 × 218 cm	112 × 218 cm	102 × 218 cm	102 × 225 cm
Höhenverstellung	40-80 cm	40-80 cm	40-80 cm	23-63 cm
Sichere Arbeitslast	185 kg	185 kg	185 kg	175 kg
Fußtieflage	12°	12°	12°	12°
Holzdekor	Buche Natur	Buche Natur	Buche Natur	Buche Natur
Gestellfarbe	Topas	Topas	Topas	Topas
Kabelloser Handschalter mit selektiver Sperrfunktion	✓	–	✓	–
Kabelgebundener Handschalter mit selektiver Sperrfunktion	0	✓	–	✓
Maschinelle Aufbereitung	–	–	✓	–
Federholzleisten-Liegefläche	✓	✓	–	✓
Metall-Liegefläche	0	–	✓	–
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓	✓	✓	✓
Holzhauben für Häupter	0	0	–	0
Aufrichter	✓	✓	✓	✓
Durchgehende Seitensicherungen aus Holz	✓	✓	✓	✓
Ausziehbare Seitensicherungserhöhung: Für alle Betten	0	0	0	0
Adaptierbare Seitensicherungen	0	0	–	–
Schaumlederbezug	0	0	0	0
Mechanische Notabsenkung der Rückenlehne	✓	✓	✓	✓
Wandabweisrollen	0	0	0	0
Bettverlängerung 20 cm	0	0	–	–
Leselampe	0	0	0	0
Serviertablett	0	–	0	0
Aufstehhilfe fest	0	0	–	0
Aufstehhilfe schwenkbar	0	0	0	0
Aufstehhilfe breit	0	0	0	0
Softcover für Häupter	0	–	0	–
Softcover für Seitensicherungen	0	0	0	0
Manuelle Verstellung der Unterschenkellehne (Rastomat)	0	0	✓	✓
Füllpolster	0	0	0	0
Tragetasche für Holme der Seitensicherung	0	0	0	0
Geberhalter	0	0	0	0

✓ = Standardausstattung
 0 = optional erhältlich
 – = nicht lieferbar

Pflege-Hilfsmittel-Nummern:	Hilfsmittel-Nummern:
Dali und Dali wash: 50.45.01.1080	Dali und Dali wash: 19.40.01.3041
Dali (100 x 200): 50.45.01.1089	Dali (100 x 200): 19.40.01.3050
Dali low-entry: 50.45.01.5003	Dali low-entry: 19.40.01.5001

◀ Das Niedrigbett Dali low-entry sorgt für einen erholsamen Schlaf und senkt das Risiko von Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen.



„Seit 2022 können Pflegefachkräfte das Dali-Pflegebett direkt und ohne ärztliche Verordnung empfehlen und so die Versorgung erleichtern.“

Drei Wege führen zum passenden Pflegebett

Je nach persönlicher Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Dali-Pflegebett zu erhalten:

- 1 Mit Verordnung durch Arzt oder Pflegekraft (Krankenkasse):**
Für eine vorübergehende Pflege oder medizinische Notwendigkeit.
- 2 Über die Pflegekasse (Pflegegrad erforderlich):**
Bei dauerhaftem Unterstützungsbedarf im Alltag.
- 3 Privatkauf:**
Wenn Sie das Bett unabhängig von einer Bewilligung wünschen oder besondere Ausstattung bevorzugen.


Das Sanitätshaus kümmert sich um den Antrag, die Lieferung und die Einweisung. So kommt Ihr Dali-Bett sicher und stressfrei zu Ihnen nach Hause.

Der Weg zum Pflegebett – so einfach geht’s!

Ein Pflegebett zu bekommen, ist oft einfacher, als man denkt. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen Unterstützung im Alltag benötigen, kann das Dali-Pflegebett über die **Pflege- oder Krankenkasse** bereitgestellt werden – oder Sie entscheiden sich für den **Privatkauf**.

Sprechen Sie zuerst mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt. Diese stellen bei Bedarf ein **Rezept** für ein Pflegebett aus. Mit dem Rezept gehen Sie zu Ihrem Sanitätshaus, das Sie berät, den Antrag bei der Kasse unterstützt und das passende Bett auswählt.

Nach der Bewilligung wird das Bett geliefert, aufgebaut und erklärt – damit Sie sich zuhause sofort sicher und wohl fühlen.

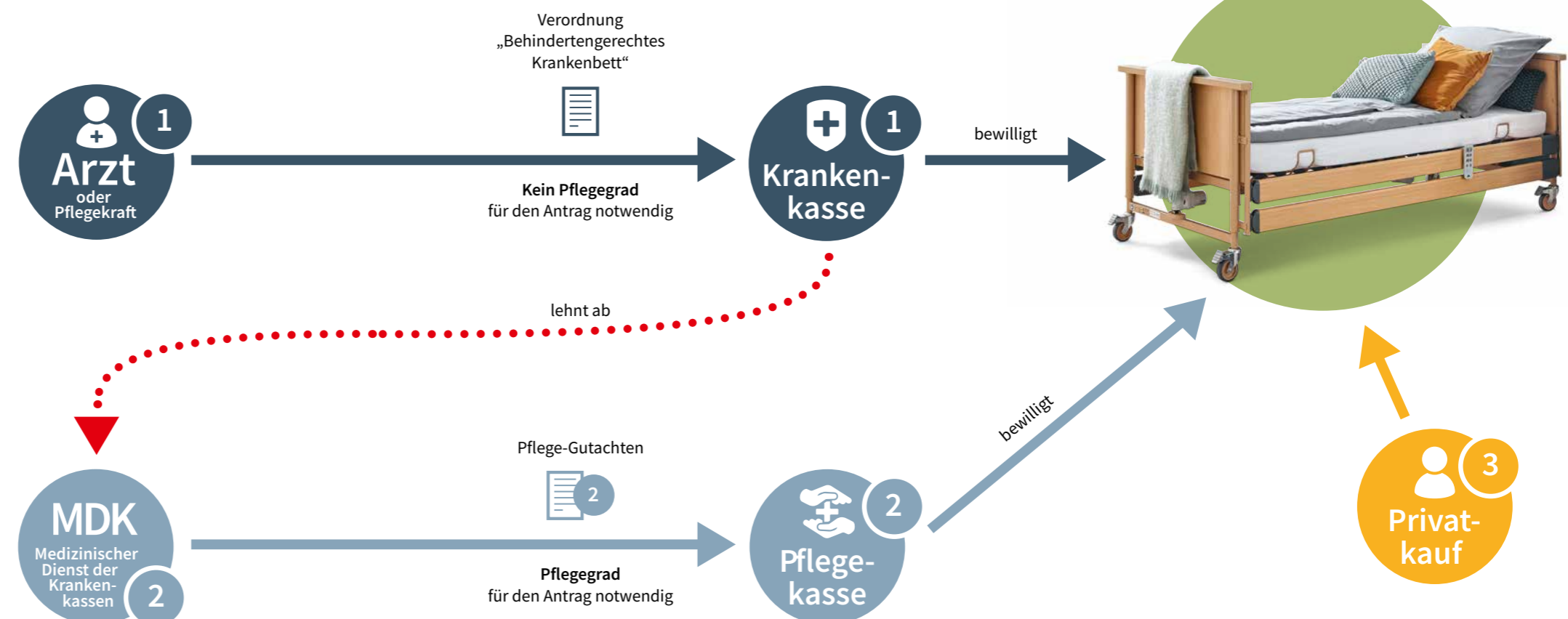



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com