


VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ



Regia

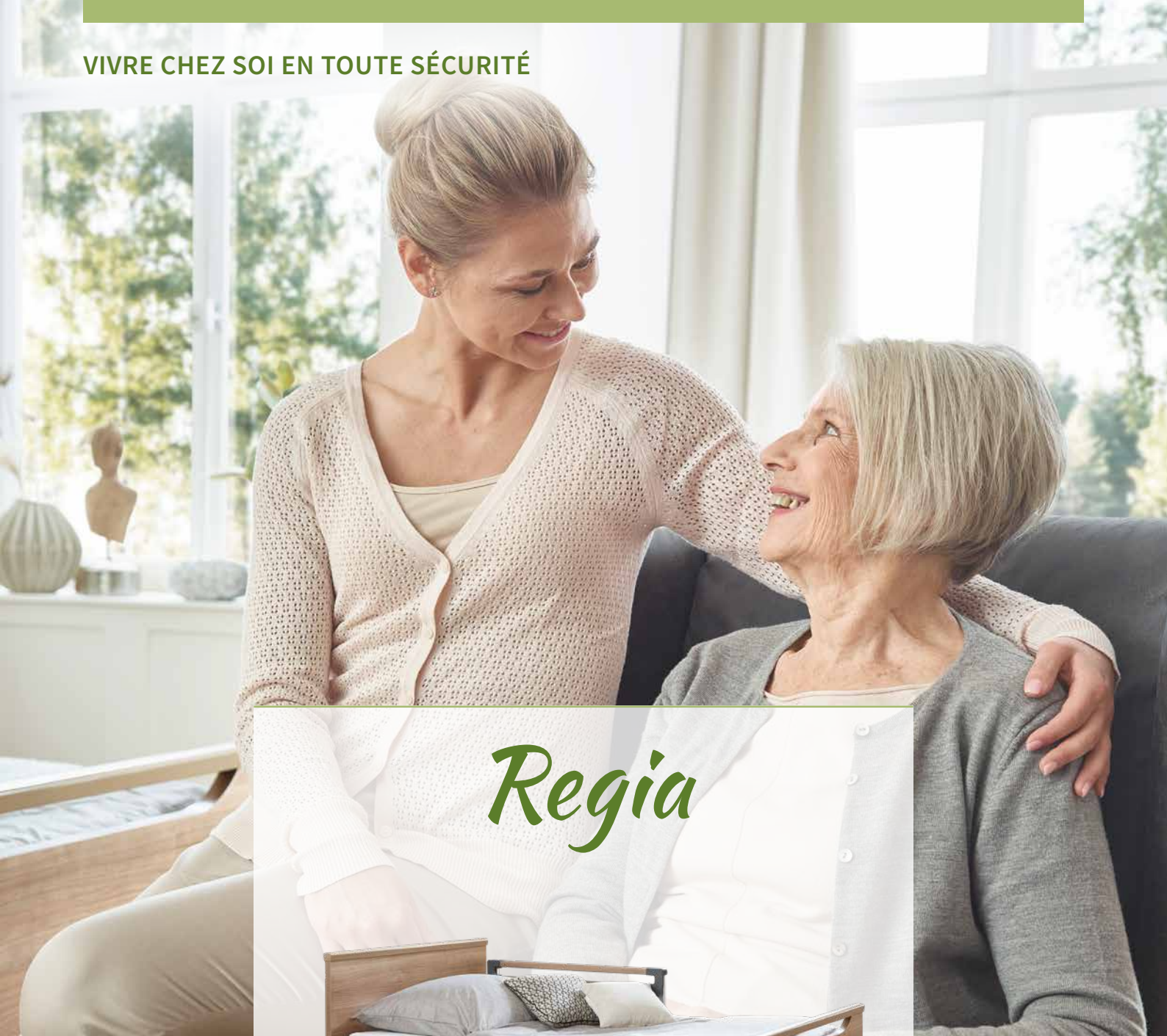

Le lit de soins individuel
avec de nombreuses options

Édition Internationale

STIEGELMEYERGROUP



BURMEIER

Regia – Lit surbaissé pour plus de protection, de confort et de bien-être

Lorsque des personnes nécessitant des soins vivent chez elles, leur lit devient souvent le lieu central de leur quotidien. Dormir, manger, regarder la télévision, discuter – beaucoup de choses sont faites dans le lit de soins lorsque l'état de santé ou l'état de forme du jour ne permettent pas de se lever. Par son confort et son caractère cosy, le lit devrait donc faire office de cocon, favoriser la mobilité du résident et soulager les proches qui s'occupent des soins. Notre Regia avec son système Easy Switch innovant répond de manière optimale à ces exigences.

Le Regia s'adresse aux clients qui souhaitent un lit de soins avec de nombreuses possibilités d'aménagement et un support technique moderne. En tant que lit surbaissé avec une grande plage de réglage de la hauteur, il favorise la prévention des chutes et permet aussi de prodiguer les soins sans se faire mal au dos. Le système

de protection à barreaux discontinus télescopique permet un équilibre optimal entre protection et liberté. À l'aide du système Easy Switch, il est en outre possible de le clipser ou déclipser en quelques secondes. Le lit peut ainsi répondre aux variations des besoins et peut être adapté facilement à de nouvelles situations. Avec le lit double Regia partner, les couples peuvent de nouveau se tenir compagnie.


Le Regia peut être équipé de panneaux et caches latéraux avec un rembourrage fixe. Des tissus ou du cuir synthétique de grande qualité ainsi qu'une large sélection de décors en bois élégants transforment le lit en un élément design agréable qui comblera tous les goûts.

Page de garde : Regia avec combinaison de panneaux Primus/Primus Low en décor Havane cerise.



Table des matières

2	Introduction
4	Le Regia
5	Le Regia partner
7	Systèmes de protection
8	Le système Easy Switch
10	Réglage de la hauteur
11	Fonctions confort
13	Système d'entraînement 24 volts
15	Matelas
16	Accessoires
18	Caractéristiques techniques
19	Le groupe Stiegmeyer

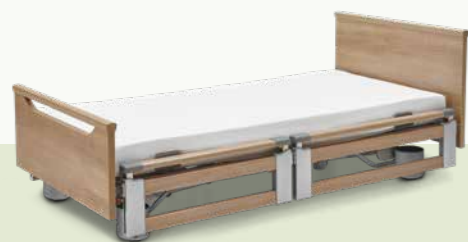

• **Grande plage de réglage de la hauteur :**
26 – 80 cm

• **Charge de travail sûre élevée :**
225 kg

• **Personnalisable :**

- Largeur de sommier de 90 ou 100 cm
- Système de protection à barreaux discontinus pour une protection flexible
- Système de protection, panneaux et caches faciles à monter sans outil grâce à Easy Switch



Des tissus étincelants

Les panneaux de tête et de pied peuvent être recouverts de tissus agréables. Si aucun élément du système de protection à barreaux discontinus n'est configuré, il est aussi possible d'installer des panneaux d'apparence bois, tissu ou cuir. Ainsi, le lit peut être adapté à tous les styles d'intérieur.



Cuir synthétique élégant

Une fois entièrement recouvert de cuir synthétique élégant, le Regia ne ressemble plus à un lit de soins. Cependant, les utilisateurs profitent de tous les avantages des réglages électriques. Des systèmes de protection ou des éléments avec une autre apparence peuvent être ajoutés à tout moment. Ainsi, le lit s'adapte à l'évolution de vos exigences.



Lit double Regia partner

- **Lit flexible pour les couples de personnes âgées :**
 - Réglage individuel des dispositifs de relevage des sommiers
 - Position assise confortable
 - Possibilité de séparer et d'assembler de nouveau les deux moitiés du lit en toute facilité
 - Aspect attrayant



Le lit surbaissé élégant Regia s'adapte à tous les besoins de confort et de protection.

Regia

Un lit pour les exigences élevées


Un lit de soins avec beaucoup de confort et de sécurité qui préserve la **mobilité** des résidents, soulage les soignants et offre de nombreuses options de personnalisation – voici comment décrire au mieux notre Regia. Avec ce modèle, les clients privés, tout comme les résidences pour personnes âgées exigeantes, obtiennent un lit qui s'adapte en toute flexibilité aux évolutions des exigences.

En tant que **lit surbaissé** avec une grande plage de réglage de la hauteur de 26 à 80 cm et un système de protection à barreaux discontinus en option, le Regia protège le résident des blessures dues aux chutes, sans mesures de privation de liberté. Il suit ainsi la philosophie du « **Werdenfelser Weg** », à savoir ne pas restreindre la liberté des personnes nécessitant des soins.

Des avantages considérables

- La hauteur de soin de jusqu'à 80 cm permet de travailler en soulageant le dos
- Charge de travail sûre de 225 kg aussi adaptée pour les résidents en surpoids
- Largeur de sommier de 100 cm et rallonge de lit d'env. 20 cm disponibles en option
- Sommier métallique en 4 parties avec position surélevée des jambes à réglage électrique
- Télécommande à verrouillage sélectif

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

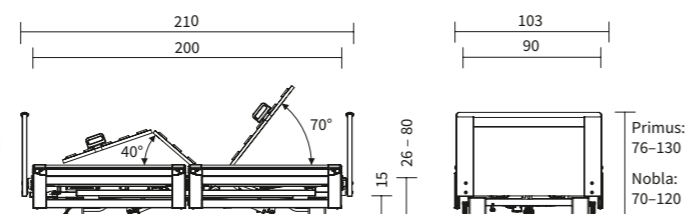

Particularités du produit :



Rembourrage élégant ou décors en bois cosy, caches latéraux ou systèmes de protection, les couples ont le choix avec le lit double Regia partner.

Regia partner

Le lit double pour une vie épanouissante au quotidien


L'incertitude croissante et la dépendance des personnes âgées confrontent les couples à de nombreux défis. Cela concerne également la question du **lit commun**. Souvent, l'un a besoin d'un lit de soins tandis que l'autre reste seul dans le lit conjugal. La relation et l'intimité du couple en sont affectées. Notre lit double Regia partner offre alors une solution optimale.

Le Regia partner allie le confort ainsi que les avantages qu'offre un lit individuel en termes de **soins aux fonctions de sécurité** spécifiquement adaptées aux couples. Il est possible de séparer et d'assembler de nouveau les deux moitiés du lit en toute facilité lorsqu'il est nécessaire de procéder à des soins au lit ou lorsque les partenaires souhaitent dormir dans des chambres séparées pendant un certain temps.

Des avantages considérables

- Grande plage de réglage de la hauteur de 26 - 80 cm
- 2 sommiers de 90 x 200 cm
- Charge de travail sûre élevée de 225 kg par sommier
- Réglage individuel du relève-buste et du relève-jambes des sommiers
- Réglage de la hauteur et position de proclive du corps de lit de manière toujours synchrone de façon à éviter tout risque de coincement pour les occupants
- Modifications et système de protection adaptables en toute flexibilité avec le système Easy-Switch

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

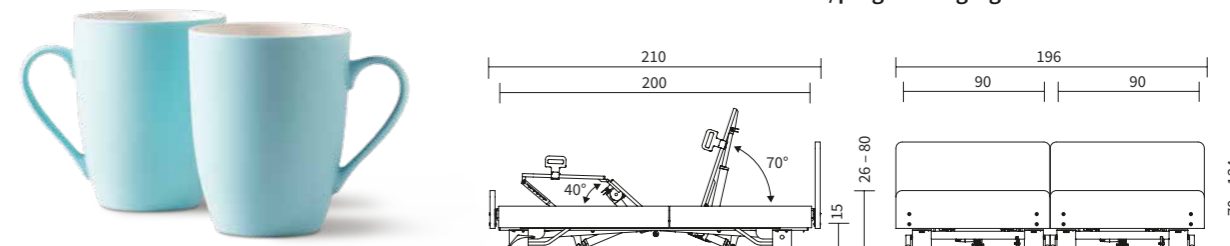

Particularités du produit :





▲ La séparation aisée des deux moitiés du lit facilite les soins au lit ainsi que le nettoyage de la pièce.

Confort et sécurité pour les couples

Le Regia partner offre un confort individuel à ses deux utilisateurs, il les protège et soulage le personnel soignant. Il est possible de régler individuellement le relève-buste et le relève-jambes des deux sommiers permettant par ex. à un partenaire de poursuivre sa lecture tandis que l'autre dort déjà. Chaque moitié de lit dispose pour cela d'une propre télécommande.

Le corps de lit par contre se déplace de manière synchronisée pour le réglage de la hauteur de 26 à 80 cm et le pivotement en position de proclive. Cela permet d'éviter tout espace libre entre les sommiers pouvant créer des zones de coincement pour les occupants. Les systèmes de protection à barreaux discontinus disponibles en option peuvent être rajoutés à tout moment et garantissent une sécurité taillée sur mesure.



▲ Chaque moitié de lit dispose par défaut d'une propre télécommande.



▲ Le corps du lit se déplace de manière synchronisée tandis que les sommiers peuvent être réglés individuellement. Cela permet par ex. d'avoir une position assise confortable.

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

La position assise

Les lits doubles à réglage électrique sont souvent des lits simples juxtaposés avec des fonctionnalités limitées. Le Regia partner séduit notamment par son pivotement en position assise pour un confort optimal. Cela favorise la respiration, facilite les repas pris au lit et permet aux occupants de participer à la vie quotidienne à hauteur d'yeux.



▲ La configuration côté tête du système de protection déployé sur le deuxième niveau offre un équilibre idéal entre liberté et protection conforme aux normes.



▲ Déployé sur le premier niveau, le TSG aide le résident à s'orienter et à monter et descendre du lit de manière autonome du côté tête.



▲ La configuration diagonale des barres donne un bon sentiment de sécurité.



▲ Les résidents susceptibles de tomber sont bien protégés lorsque le système de protection est complètement déployé.

Systemes de protection modernes

Le système de protection à barreaux discontinus télescopiques (TSG) du Regia se relève en tout simplicité. Si seule la moitié côté tête est relevée, la personne nécessitant des soins dispose encore d'assez de place pour monter et descendre du lit. Il est possible d'équiper le lit uniquement d'un système de protection côté tête – avec une longueur de 110 cm, les éléments offrent une protection conforme aux normes.

Le TSG se relève sur 2 niveaux. Sur le premier niveau, il offre au résident une aide à l'orientation et une apparence si discrète qu'il est possible de regarder la pièce sans gêne. Le deuxième niveau assure une protection complète. Le réglage en diagonale des barreaux est aussi utile pour offrir une sensation de maintien et de sécurité. Tous les éléments du TSG s'installent et se démontent de manière aussi simple que les caches latéraux et les panneaux – et ce grâce au système Easy Switch innovant. Le Regia s'adapte ainsi à tous les besoins et favorise la mobilité des personnes nécessitant des soins.

Pour les résidents très susceptibles de tomber et en cas d'utilisation de matelas anti-escarres, nous recommandons d'utiliser le système de protection à barreaux continus (DSG) en option. Lui aussi s'installe et se retire simplement avec le système Easy-Click.



▲ Le système de protection à barreaux continus (DSG) en option s'installe en quelques secondes grâce au système Easy Click.



▲ Avec le DSG, les résidents susceptibles de tomber profitent d'une protection maximale (semblable à l'illustration).



Le système breveté pour des lits de soins ajustables et une sécurité conforme aux normes


Choisissez le Regia avec système de protection à barreaux discontinus télescopiques ou sans système de protection pour découvrir toute la flexibilité de notre système Easy Switch. Le principe de Easy Switch est aussi simple qu'il est convaincant : retirez et installez les éléments du système de protection, les panneaux de lit ainsi que les caches latéraux **sans le moindre outil**. Pour ce faire, utilisez les attaches faciles à manipuler qui s'enclenchent en toute sécurité et ne peuvent pas être actionnées par inadvertance par le résident. Les panneaux de la série Nobla et les caches peuvent être **commandés avec des rembourrages attrayants en tissu ou cuir synthétique**.

Grâce au système Easy Switch, le Regia peut être équipé simplement de systèmes de protection ou d'une nouvelle apparence et être ainsi **adapté à vos besoins** tout au long de son utilisation. Ainsi, il s'agit d'un lit qui évolue avec vous et vous soutient dans chacune de vos phases de vie. Les systèmes de protection amovibles permettent en plus une transformation rapide pour s'adapter à la situation en question. En outre, ils facilitent grandement le montage du lit.

Conception modulaire et montage sans outils

Échangez le panneau de tête en quelques secondes

- variantes cosy avec ou sans poignées
- décors en bois, tissus et cuirs synthétiques attrayants au choix
- panneaux de lit et caches latéraux à combiner librement

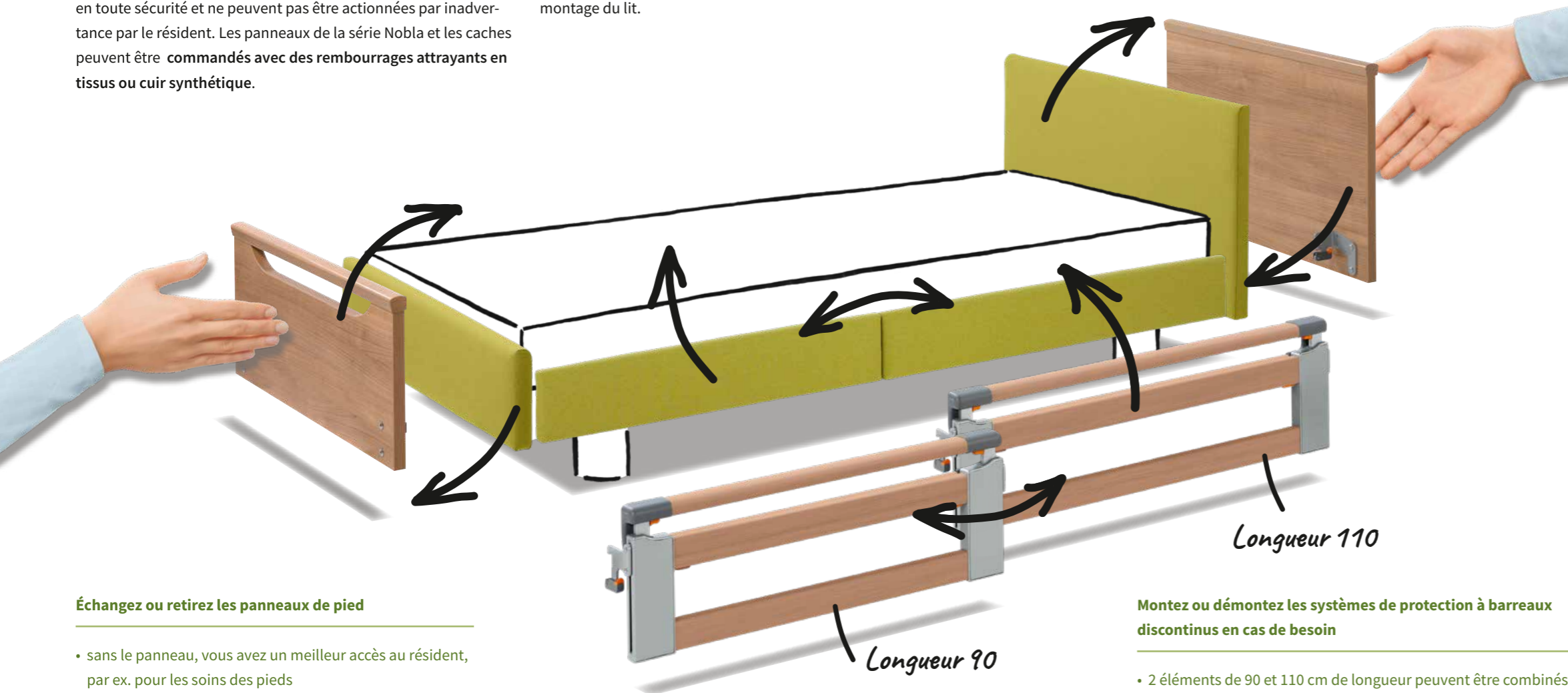

Échangez ou retirez les panneaux de pied

- sans le panneau, vous avez un meilleur accès au résident, par ex. pour les soins des pieds
- panneau de pied haut pour un sentiment de confort, ou panneau de pied bas pour une vue dégagée au choix
- décors en bois, tissus et cuir synthétique attrayants au choix

! Systèmes de protection à combiner librement : 110/90 ou 90/110

Montez ou démontez les systèmes de protection à barreaux discontinus en cas de besoin

- 2 éléments de 90 et 110 cm de longueur peuvent être combinés librement ou utilisés individuellement
- une protection de 110 cm installée seule côté tête offre une protection conforme aux normes
- une protection de 90 cm installée seule côté tête offre un sentiment de sécurité et d'orientation tout en laissant suffisamment de place pour monter et descendre du lit

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

Plus de flexibilité et de sécurité avec Easy Switch

Les lits dotés du système Easy Switch remplissent les exigences en termes de protection changeantes des résidents et leur aspect peut être ajusté aux préférences de chacun. Le système de protection flexible permet d'offrir une protection conforme aux normes sans restreindre la mobilité de la personne nécessitant des soins.



▲ Tous les éléments Easy Switch sont insérés dans le cadre du lit et fixés à l'aide d'attaches faciles à manipuler.



▲ Il suffit de presser l'attache vers le haut.



▲ L'attache s'enclenche en toute sécurité - l'élément est fixé.



▲ Pour détacher la fixation, tirez la protection orange vers l'avant et pressez l'attache vers le bas.





La position la plus basse de seulement 26 cm protège contre les blessures dues aux chutes.

Toujours à la bonne hauteur



▲ L'arrêt intermédiaire automatique à environ 40 cm est optimal pour monter et descendre confortablement du lit.



▲ La hauteur de soin ergonomique de jusqu'à 80 cm ménage le dos des personnes soignantes.

Dans le domaine des soins, les **lits surbaissés** contribuent de manière importante à la prévention des blessures dues aux chutes. À proximité du sol, le risque pour le résident est réduit, même quand le système de protection n'est pas relevé. Conformément à la philosophie du « *Werdenfelser Weg* », les mesures de privation de la liberté sont ainsi simples à éviter.

Avec sa **grande plage de réglage de la hauteur** de 26 à 80 cm, le Regia répond à toutes les exigences en termes de soins. La position la plus basse offre au résident une protection optimale dans le lit. Avec la télécommande, il est possible de régler le lit en toute facilité et de manière intuitive. Grâce à la **fonction 3 arrêts**, il s'arrête automatiquement à une position intermédiaire d'env. 40 cm – la hauteur idéale pour monter et descendre confortablement du lit. Dans la position supérieure de jusqu'à 80 cm, le Regia offre aux soignants la possibilité de travailler de manière **ergonomique, à hauteur des hanches**.

Des avantages considérables

- Grande plage de réglage de la hauteur de 26 – 80 cm
- Réglage en continu avec une télécommande facile d'utilisation
- Le lit surbaissé permet de prévenir les chutes sans mesures de privation de la liberté
- La hauteur de soin ergonomique ménage le dos du personnel soignant et des proches et préserve leur santé
- La hauteur de montée et descente optimale favorise la mobilité du résident



En position assise, les personnes nécessitant des soins peuvent prendre part à la vie quotidienne à hauteur des yeux.

Confort

Profiter du quotidien avec une nouvelle joie de vivre

Grâce à ses possibilités de réglage flexibles, le Regia offre de nombreuses options pour permettre au résident de vivre de nouveau à hauteur d'yeux. À l'aide de la télécommande, le lit peut être amené dans une **position de proclive** de jusqu'à 15°. Combiné avec le dossier réglable jusqu'à 70°, cela permet d'obtenir une **position assise** confortable. Les personnes nécessitant des soins peuvent se redresser sans effort. Plus rien ne peut empêcher une conversation animée ou une agréable soirée télé. Les repas sont aussi nettement plus agréables en position assise. Cela diminue aussi le risque de fausses routes.

Le relève-jambes peut être amené à l'horizontale à l'aide de la télécommande lorsqu'une **position surélevée des jambes** est souhaitée pour des raisons médicales.



VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

Regia movo

Lorsque les résidents ne peuvent plus se lever aussi souvent, un lit de soins mobile rend leur quotidien plus dynamique. La variante Regia movo peut être déplacée sans effort dans le salon ou sur la terrasse.

- Grandes roulettes doubles de 100 mm pour des manœuvres simplifiées
- La roulette directionnelle permet de diriger plus facilement le lit
- Plage de réglage en hauteur 28 - 83 cm
- Roulettes à frein centralisé (par défaut sur toutes les variantes Regia)




Le lit surbaissé Regia protège contre les blessures dues aux chutes sans restreindre la liberté et le confort du résident.



◀ Le transformateur de tension SwitchMode génère une basse tension de protection de 24 volts directement à la prise.

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ *Économies d'énergie*

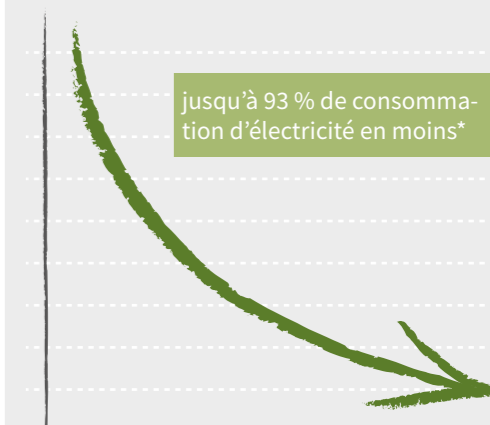

* par rapport aux systèmes 230 Volt pour env. 5 réglages par jour


Systeme d'entraînement 24 volts

Le système d'entraînement 24 volts de Burmeier offre un niveau de sécurité optimal pour les soins à domicile. Tous les composants sous tension 230 volts sont installés en dehors du lit. Juste derrière la fiche secteur se trouve le transformateur de tension électronique **SwitchMode**. Les résidents bénéficient ainsi d'un niveau élevé de sécurité.

Le lit reste hors tension tant que la télécommande n'est pas utilisée. La consommation en électricité baisse ainsi de jusqu'à 93 %. Il n'est plus nécessaire de mesurer le courant de fuite, comme le certifie **TÜV Rheinland**, ce qui permet d'économiser encore plus de frais et d'effort. En général, les lits de soins utilisés à usage professionnel doivent être soumis à une mesure du courant de fuite tous les 2 ans. Grâce au système 24 volts, cet intervalle est tellement prolongé qu'il n'est pas nécessaire de réaliser d'autres mesures durant la totalité de la durée d'utilisation prévue du lit de soins. Veuillez consulter la notice d'utilisation pour connaître la durée d'utilisation prévue.

Aucune mesure du courant de fuite n'est requise lors de la première mise en service, car elle a déjà été réalisée en usine. Ainsi, il n'est **pas** nécessaire de faire appel à un **spécialiste de l'électricité** lors de la mise en service du lit – ce qui permet à l'exploitant d'économiser des frais supplémentaires.

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ *Des avantages considérables*

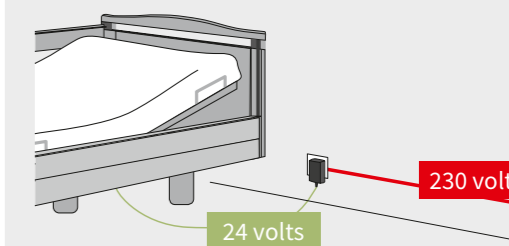

- Basse tension de protection à partir du transformateur sur la prise
- Aucun composant de 230 volts sur le lit
- Pas de mesure du courant de fuite après l'installation et pour toute la durée d'utilisation prévue du lit
- Un certificat de contrôle est disponible au téléchargement pour chaque lit



Style et élégance – le Regia vous convaincra par son design intemporel associé à des avantages techniques uniques.



Le matelas haut-de-gamme Sky-fit (ici sans housse) s'adapte en toute précision au sommier du Regia.

Disponible pour les dimensions de sommier :

Sky-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Basic-fit
90 x 200 cm
90 x 220 cm
100 x 200 cm
100 x 220 cm

Matelas

Profitez d'un bon sommeil

Que ce soit pour vous ou vos proches, misez sur davantage de confort en choisissant un matelas Burmeier pour votre lit Regia. Lors des réglages du relèvement du buste et du relèvement des cuisses, nos matelas pour lits de soins se déplacent avec une telle précision que les positions allongées favorables à la santé déploient leur plein effet. En outre, les modèles Sky-fit et Comfort-fit sont des matelas réversibles avec une face lisse et une face présentant des incisions. Ces matelas ne sont donc jamais « trop durs » ou « trop mous ». Ils se retournent en toute facilité et proposent deux confort de couchage différents.



▲ Modèle Sky-fit avec revêtement haut-de-gamme Skytherm®.

Sky-fit – le modèle premium

- Matelas haut-de-gamme à 2 couches avec un revêtement Sky-therm® de 2 cm et une base composée de mousse à froid de 12 cm
- Les incisions dans la base garantissent une adaptation optimale au sommier
- Les deux faces peuvent être utilisées comme sommier
- Renforcement des bords pour une assise confortable sur le bord du lit
- Housse réversible amovible, une face en polyuréthane (PU), l'autre face en polyester et viscose, nettoyage en machine à laver classique
- Résistance à la compression 5,0 kPa (au niveau des bords), 4,0 kPa (base), 2,5 kPa (revêtement), densité 50 kg/m³ (base), 40 kg/m³ (revêtement)



▲ Modèle Comfort-fit avec renforcement des bords.

Comfort-fit – le milieu de gamme

- Le matelas confortable avec un noyau en mousse à froid de polyuréthane élastique (14 cm)
- Les incisions dans la base garantissent une adaptation optimale au sommier
- Les deux faces peuvent être utilisées comme sommier
- Le renforcement des bords protège contre une chute du lit
- Housse réversible amovible, une face en polyuréthane (PU), l'autre face en polyester et viscose, nettoyage en machine à laver classique
- Résistance à la compression 5,0 kPa (au niveau des bords), 4,0 kPa (base), densité 40 kg/m³



▲ Modèle Basic-fit.

Basic-fit – le modèle d'entrée de gamme

- Matelas monocouche en polyuréthane agréable (12 cm)
- Housse PU blanche amovible, nettoyage en machine à laver classique
- Résistance à la compression 4,5 kPa, densité 40 kg/m³



▲ La **rallonge de lit** d'env. 20 cm s'insère simplement dans le cadre de lit. Des parties matelassées adaptées pour rallonger le matelas sont aussi disponibles.



▲ Le **sommier tout confort** se compose de 50 éléments à ressort à oscillation libre.



▲ Le **porte-literie** est très pratique pour faire le lit.



▲ Les **revêtements en similicuir** protègent contre les coups dans les systèmes de protection.



▲ La **lampe de lecture** peut être insérée dans la douille de la potence ou montée sur la potence.



▲ L'**éclairage sous le lit** sert à une meilleure orientation de nuit et crée une sécurité supplémentaire.



▲ Avec le **support flexible**, la télécommande est toujours dans une position adéquate.



▲ Grâce au **câble de rallonge** de 2,40 m, la télécommande peut être utilisée dans toute la pièce.




▲ Les **galets défecteurs** protègent le lit et le mobilier pendant les déplacements et les réglages de la hauteur.

Accessoires pratiques

Avec les accessoires originaux de Burmeier, votre Regia se transforme en lit sur mesure et offre encore plus de confort et de protection. Par exemple, pour les résidents de grande taille, il est recommandé d'utiliser la **rallonge de lit** d'env. 20 cm. Elle s'insère simplement dans le cadre de lit côté pied. Pour les lits avec système de protection à barreaux discontinus, **deux éléments de 110 cm de long** peuvent couvrir le sommier avec rallonge.

Les accessoires comme le **revêtement similicuir** pour le système de protection ou l'**éclairage sous le lit** pour une meilleure orientation de nuit augmentent sensiblement la sécurité du résident. Le **sommier tout confort** avec ses éléments à oscillation libre, le **porte-journaux** ou le **porte-literie** garantissent plus de confort et un soulagement au quotidien.

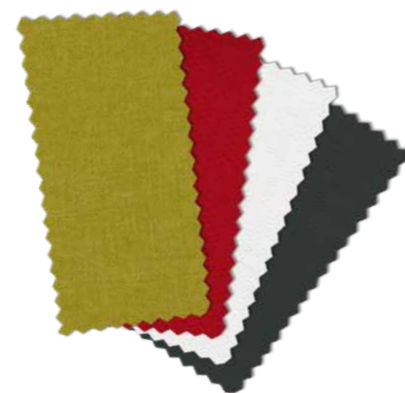

▲ **Tissus :**
Vent clair Tiba 6210
Rouge Tiba 3210

▲ **Cuir synthétique :**
Blanc 1-1142-197
Anthracite 1-1142-395

Décor¹⁾



▲ Havane cerise



▲ Chêne Lindberg



▲ Hêtre naturel



▲ Érable royal

¹⁾ Regia partner : hêtre naturel et havane cerise


Panneaux²⁾



▲ Primus côté tête fermé, côté pied avec poignée (uniquement décor bois)



▲ Primus côté tête, Primus-Low côté pied (uniquement décor bois)

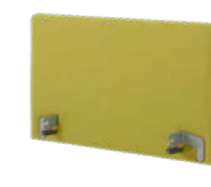

▲ Nobla (décor en bois ou rembourrage, livraison plus longue)



▲ Nobla côté tête, Nobla reha côté pied (décor en bois ou rembourrage)



▲ Prinzino (uniquement décor bois, livraison plus longue)

²⁾ Regia partner : seulement avec les combinaisons Nobla ou Nobla mala, décor en bois ou rembourrage

Équipements et options

Modèle	Regia	Regia partner
Sommier 90 x 200 cm	✓	-
Sommier 100 x 200 cm	0	-
Sommier 2 x 90 x 200 cm	-	✓
Réglage de la hauteur	26 – 80 cm Regia movo: 28 – 83 cm	26 – 80 cm
Charge de travail sûre	225 kg	2 x 225 kg
Sommier métallique en 4 parties avec relève-buste coulissant	✓	✓
Soulèvement électrique du relève-jambes (21 cm)	✓	✓
Position de proclive (15°)	✓	✓
4 roulettes à frein centralisé, Ø 50 mm (Regia movo: Ø 100 mm)	✓ (Regia movo ✓)	✓
Système d'entraînement 24 volts Linak	✓	-
Panneau de tête et de pied Primus (uniquement décor bois)	0	-
Panneau de tête Primus et panneau de pied Primus-Low (uniquement décor bois, non disponible avec le système de protection à barreaux continus DSG)	0	-
Panneau de tête et de pied Prinzino (uniquement décor bois)	0	-
Panneau de tête et de pied Nobla (décor en bois ou rembourrage, non disponible avec DSG)	0	0
Panneau de tête Nobla et panneau de pied Nobla reha (décor en bois ou rembourrage, pas disponible avec DSG)	0	0
Décors Havane cerise, Chêne Lindberg, Hêtre naturel, Érable royal	0	Hêtre naturel, havane cerise
Système de protection télescopique (TSG) avec Easy Switch		
- 2 éléments 110/90 cm, caches latéraux complémentaires compris si besoin	0	0
- 2 éléments 110/110 cm, caches latéraux complémentaires compris si besoin	0	0
- 2 éléments 90/90 cm, caches latéraux complémentaires compris si besoin	0	0
- Pas de système de protection, 4 caches latéraux	0	0
- Caches latéraux rembourrés	0	0
Système de protection continu (DSG) avec Easy Click des deux côtés	0	-
Système de protection continu (DSG) avec Easy Click d'un côté, combiné avec TSG/caches latéraux	0	-
Rallonge de lit (env. 20 cm)	0	0
Potence avec poignée triangulaire	0	0 (des deux côtés uniquement)
Éclairage sous le lit	0	-
Batterie remise à plat d'urgence	0	0
Revêtement similicuir (disponible pour TSG et DSG)	0	0 (TSG uniquement)
Lampe de lecture	0	0
Porte-literie	0	-
Galets déflecteurs (2 unités/4 unités au choix)	0	-
Sommier tout confort	0	0
Support flexible pour télécommande	0	-
Câble de rallonge pour télécommande (1,40 m)	0	-
Télécommande Trendelenburg (uniquement pour les établissements de soins)	0	-

✓ = Équipement standard
0 = En option

Plus d'informations
sur les prix/
configurations sur
www.burmeier.com



Garante de valeurs
Créatrice d'avenir

STIEGELMEYERGROUP

Garante de valeurs

Notre entreprise a été fondée en 1900 à Herford et est aujourd'hui encore entre les mains familiales. Respect et responsabilité vis-à-vis de nos clients, collaborateurs et partenaires forment la base de notre travail quotidien. C'est sur le socle de ces valeurs ainsi que de nos années d'expérience que nous proposons à nos clients du monde entier des produits, solutions et services haut de gamme pour des exigences dans le domaine des soins et de la santé.

Créatrice d'avenir

Afin de répondre aux modifications rapides du secteur des soins et de la santé, nous développons nous-mêmes tous nos produits. Les innovations et visions pour les soins du futur constituent l'objectif de notre travail. Ce faisant, nous sommes en échange continu avec nos clients afin de les aider de manière ciblée dans leurs tâches quotidiennes. Chez nous, mettre en œuvre dès aujourd'hui les tendances de demain est une tradition couronnée de succès.

Notre expertise

Hôpital

Long séjour

Soins à domicile

Lits exclusifs

Mobilier spécialisé

Service



Le groupe Stiegmeyer est votre partenaire international pour les hôpitaux et établissements de soins ainsi que pour les soins à domicile avec la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec produits, solutions et services adaptés à la pratique que nous peaufinons continuellement.

- fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales
- plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier
- fabrication de tous les produits clés dans nos propres usines
- développement des produits et production en Allemagne
- service, formation et optimisation des processus chez les clients
- certifications internationales et exportation dans plus de 60 pays
- sociétés de distribution en Belgique, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Afrique du Sud

Nos marques

STIEGELMEYER

BURMEIER



Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Une entreprise du groupe Stieglmeyer

STIEGELMEYERGROUP

Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet :
Find your local partner at our website:
www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com