



ERFAHREN
MENSCHLICH
LÖSUNGS-
ORIENTIERT



Westfalia-Serie



Für mehr Sicherheit, Komfort und
Lebensqualität zu Hause



Westfalia IV

Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit

Das Zuhause ist ein Ort der Geborgenheit – gerade im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit. Wer sich Unterstützung im Alltag wünscht oder auf ein Pflegebett angewiesen ist, möchte dennoch nicht auf ein wohnliches Umfeld verzichten. Das Westfalia Pflegebett wurde genau für diese Bedürfnisse entwickelt: Es verbindet durchdachten Komfort, moderne Sicherheitstechnik und ein ansprechendes, wohnliches Design, das sich harmonisch in jedes Schlafzimmer einfügt.


Pflegebetten werden heute nicht nur im professionellen Umfeld, sondern auch im privaten Zuhause immer wichtiger. Ob zur Unterstützung im Alter, bei eingeschränkter Beweglichkeit oder in einer Pflegesituation – das richtige Bett kann wesentlich zur Sicherheit und Lebensqualität beitragen. Umso entscheidender ist es, dass Funktionalität und Wohnlichkeit in Einklang stehen.

Das Westfalia Pflegebett erfüllt diese Ansprüche auf überzeugende Weise. Mit seinem warmen Holzdesign und verschiedenen wählbaren Kopf- und Fußteilen passt es sich individuell an Ihre Wohnumgebung. Gleichzeitig bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort: Die Liegefläche ist stufenlos von 35 bis 80 Zentimeter höhenverstellbar. So wird der Ein- und Ausstieg erleichtert, das Sturzrisiko gesenkt – und Angehörige oder Pflegekräfte können in angenehmer Höhe, rückschonend und auf Augenhöhe mit der betreuten Person arbeiten.

Starke Vorteile

- Unterschenkellehne elektrisch einstellbar
- 185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche
- wohnliche Häupterformen wählbar
- sparsames 24-Volt-System
- Höhenverstellung 35-80 cm
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- verschiedene Liegeflächenmaße zur Auswahl

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

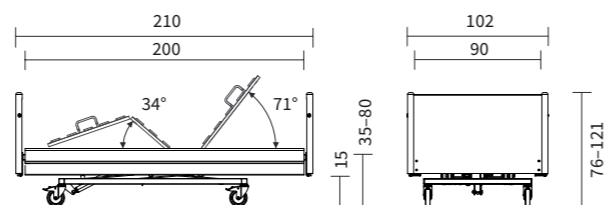

Produktbesonderheiten:



Westfalia-Klassik

Das Pflegebett mit besonderen Eigenschaften

Praktisch, hygienisch und durchdacht

Im Alltag überzeugt das Westfalia Pflegebett mit vielen liebevollen Details. Die Liegefläche lässt sich besonders gründlich und einfach reinigen – ein wichtiger Aspekt für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Eine zentrale Rollenfeststellung sorgt dafür, dass das Bett bei Bedarf mühelos verschoben und ebenso einfach wieder stabil fixiert werden kann – mit nur einem Fußtritt.

Ein besonders sparsames 24-Volt-System senkt den Energieverbrauch und erhöht die elektrische Sicherheit.

Pflegekomfort, der gut aussieht


Wenn die Seitensicherungen nicht gebraucht werden, verschwinden sie optisch fast vollständig: Ihre Holme liegen bündig aufeinander und stören so weder das Gesamtbild noch die Bewegungsfreiheit. Im hochgezogenen Zustand sorgen sie für zuverlässigen Schutz und sind mit wohnlichen Holzblenden verkleidet – ein echtes Plus für Ästhetik und Wohlbefinden.

So erfüllt das Westfalia Pflegebett höchste Ansprüche an Funktionalität und Wohnlichkeit – sowohl für den Pflegebedürftigen selbst als auch für seine Angehörigen. Es macht den Pflegealltag einfacher, sicherer und angenehmer.

Starke Vorteile

- Unterschenkellehne elektrisch einstellbar
- 200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche
- attraktive Holzumbauten lieferbar
- robuste Qualitätsrollen mit Zentralfeststellung
- sparsames 24-Volt-System
- Höhenverstellung 35-80 cm
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Rückenlehnenrückzug zur Verminderung von Scherkräften

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

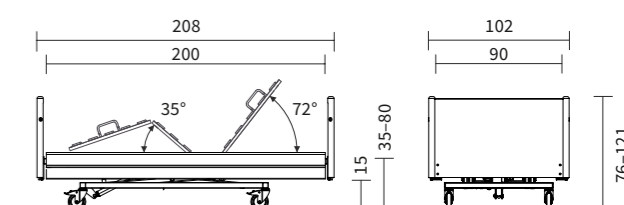

Produktbesonderheiten:





Erhältlich für
Liegeflächenmaße:

Sky-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Basic-fit
90 x 180 cm
90 x 190 cm
100 x 200 cm

Matratzen

Gesunden Schlaf genießen

Gönnen Sie sich oder Ihren Angehörigen noch mehr Komfort, indem Sie zu Ihrem Westfalia auch eine Matratze von Burmeier auswählen. Unsere Pflegebettmatratzen bewegen sich bei Verstellungen der Rücken- und Oberschenkellehnen genau mit, sodass gesundheitsfördernde Liegepositionen ihre volle Wirkung entfalten. Die Modelle Sky-fit und Comfort-fit sind zudem Wendematratzen mit einer glatten und einer eingeschnittenen Seite. Dadurch sind diese Matratzen niemals „zu hart“ oder „zu weich“ – sie lassen sich einfach umdrehen und bieten zwei verschiedene Liegegefühle.



▲ Modell Sky-fit mit hochwertiger Skytherm®-Auflage.

Sky-fit – das Premium-Modell

- hochwertige 2-Schicht-Matratze mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- beide Seiten lassen sich als Liegeflächen nutzen
- Randzonenverstärkung für bequemes Sitzen auf der Bettseite
- abnehmbarer Wendebезug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



▲ Modell Comfort-fit mit Randzonenverstärkung.

Comfort-fit – die Mittelklasse

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm)
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- beide Seiten lassen sich als Liegeflächen nutzen
- Randzonenverstärkung schützt vor Herausrollen
- abnehmbarer Wendebезug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



▲ Modell Basic-fit.

Basic-fit – das Einsteigermodell

- Einschichtmatratze aus angenehmem Polyurethan (12 cm)
- weißer abnehmbarer PU-Bezug, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 4,5 kPa, Raumgewicht 40 kg/m³

Details Westfalia IV



▲ Höhenverstellbereich 35–80 cm.



▲ Liegefläche mit Federholzleisten.



▲ Höhenverstellbereich 35–80 cm.



▲ Liegefläche mit Metall-Lamellen.



▲ Aufrichter.



▲ Rollen einzeln bremsbar.



▲ Aufrichter.



▲ Zentrale Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition.

Zubehör für die Westfalia-Serie



▲ Serviertablett (nur 90 cm Breite).



▲ Wandabweisrolle inkl. Halterung.



▲ Schaumlederbezug.



▲ Leselampen.



▲ Bettverlängerung um 20 cm mit passenden Holmen und (beim Westfalia-Klassik) Seitenblenden.



▲ Häupter zur Auswahl: Standard (serienmäßig), Comodo mit Rundstollen (optional), Primero mit Griffleiste (optional).



▲ Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



▲ Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).




▲ Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



▲ Schwenkbare Aufstehhilfe



▲ Aufstehhilfe (nur Westfalia IV).

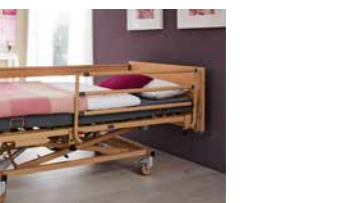

▲ Adaptierbare Seitensicherung (nur Westfalia IV).

Ausstattungen und Optionen

Modellvariante	Westfalia IV	Westfalia-Klassik
Liegefläche 90 x 180 cm	✓	-
Liegefläche 90 x 190 cm	✓	-
Liegefläche 90 x 200 cm	✓	✓
Liegefläche 100 x 200 cm	✓	-
Nettogewicht	112 kg	132 kg
Höhenverstellbereich	35 - 80 cm	35 - 80 cm
sichere Arbeitslast	185 kg	200 kg
max. Bewohnergewicht	145 - 175 kg	160 - 190 kg
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓	✓
Gestellfarbe: Topas	✓	✓
Dekor: Buche Natur	✓	✓
Federholzleisten-Liegefläche	✓	-
Metall-Liegefläche	-	✓
Seitensicherung	DSG	DSG
selektiv sperrbarer Handschalter mit Kabel	✓	✓
Notabsenkung mechanisch	✓	✓
Rollendurchmesser	125 mm	100 mm
Rollenfeststellung	einzel	zentral
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	-	✓
Aufrichter	✓	✓
Bettverlängerung 20 cm	0	0
beidseitig adaptierbare Seitensicherung	0	-
Aufstehhilfe (Verwendung ohne DSG)	0	-
Aufstehhilfe extra breit (Verwendung ohne DSG)	✓	✓
Schwenkbare Aufstehhilfe	✓	✓
Holzumbau Standard (nur 90 cm Breite)	✓	✓
Holzumbau Comodo mit Rundstollen	0 (100 cm: ✓)	0
Holzumbau Primero mit Griffleiste (nur 90 cm Breite)	0	0
Bettverlängerung auf 220 cm Liegeflächenlänge	0	0
Polsterteil für Bettverlängerung	0	0
Wandabweisrollen horizontal (2 Stück/ 4 Stück wahlweise)	0	0
Schaumlederbezug DSG	0	0
Leselampe zum Einstecken	0	0
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	0
Serviertablett für DSG 90 cm Breite	0	0
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	0
Geberhalter für Handschalter	0	0
Handschalter-Verlängerungskabel	0	0

✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich - = nicht lieferbar

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeier-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

1 000
MITARBEITER
WELTWEIT

11
STANDORTE
in Deutschland, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Finnland,
Südafrika und China

Maßgeschneiderte
ANGEBOTE
für alle
MÄRKTE

MEHR ALS
100 000
produzierte
Betten
pro Jahr

Internationale
ZERTIFI-
ZIERUNG

BIS ZU
10 JAHRE
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB
in über
100
Ländern

DEUTSCHE
INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com