

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Das Pflegebett mit innovativen Ideen


Inovia

VORTEILE

Das Pflegebett Inovia überzeugt mit seinem wohnlichen Aussehen, das vor allem durch die opulenten Häupter geprägt wird. Die besonders niedrige Tiefposition von 22 cm schützt den Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen. Auch die optionalen teleskopierbaren Seitensicherungen fördern die Mobilität des Pflegebedürftigen.

- sichere Arbeitslast 225 kg
- max. Bewohnergewicht 195 kg
- Höhenverstellung 22-77 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- auswandernde Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- geteilte teleskopierbare Seitensicherung optional
- attraktive Holzdekore zur Auswahl

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

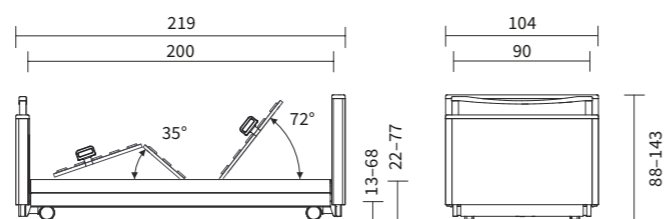

Produktbesonderheiten:



Praktische, wohnliche Griffleiste aus Massivholz

Seitensicherungs-schutzhöhe von 41 cm für Matratzen bis max. 19 cm

Auswandernde Rückenlehne

Hygienische Liegeflächen-Lamellen, optionale Komfortliegefläche

Holzhaube im ansprechenden Wohndesign

Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition

Weitere Info:



Produktseite

Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Griffleiste aus Massivholz.



Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition.



Handschalter mit selektiver Sperrung.



Auswandernde Rückenlehne.



Liegehöhenverstellung von 22-77 cm, Verstellbereich = 55 cm



Buche Natur (Standard).



Kirsche Havanna.

ZUBEHÖR



Teleskopierbare Seitensicherung (TSG).



Schaumlederbezug für DSG.



Schaumlederbezug für TSG.



Bettverlängerung.



Serviertablett.



Leselampe Sola.



Die Aufnahmeschale für Brillen, Handys oder Pflegeutensilien lässt sich an der durchgehenden Seitensicherung anbringen.



Die Komfort-Liegefläche besteht aus 50 freischwingenden Feder-elementen.



Flexibler Geberhalter für den Handschalter.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Inovia 90 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262626LFB_001 SHC_001	3.179,00
Inovia 100 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262626LFB_002 SHC_001	3.749,00
Technische Daten			
Nettogewicht	153/159 kg		
Außenmaße	105 x 120 cm 115 x 120 cm		
Höhenverstellbereich	22 - 77 cm		
sichere Arbeitslast	225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	achsweise		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Sonderausstattungen und Zubehör			
teleskopierbare Seitensicherung (TSG) beidseitig	0	SHC_002	698,00
teleskopierbare Seitensicherung (TSG) einseitig/DSG einseitig	0	SHC_008	349,00
Aufrichter	0	AUI_001	119,00
Buche Natur	✓	DHU_027	
Kirsche Havanna	0	DHU_024	99,00
Griffleiste kopfseitig	0	KTA_003	89,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit TSG	0	262626LFL_006	379,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit DSG	0	262626LFL_005	509,00
Polsterteil für Bettverlängerung 90 cm Breite, 12 cm hoch	0	166715	99,00
Polsterteil für Bettverlängerung 100 cm Breite, 12 cm hoch	0	219857	119,00
Komfortliegefläche	0	LIF_013	295,00
Wandabweisrolle mit Halter (rechts oder links)	0	links 215921 rechts 221306	39,00
Schaumlederbezug DSG	0	225921	154,00
Schaumlederbezug TSG	0	716556	165,00
Leselampe zum Einstecken	0	264877	288,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	1 x 191879 1 x 174231	288,00
Serviertablett für DSG 90er Breite	0	174296	164,00
Serviertablett für DSG 100er Breite	0	229222	224,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	0	258395	134,00
Geberhalter für Handschalter	0	199137	124,00
Handschalter-Verlängerungskabel	0	238047	75,50
Aufnahmeschale	Weiß	266970	19,95
	Gelb	266971	19,95
	Rot	266619	19,95

✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich